**2010 年 8 月 20 日（第 3 版）
*2008 年 5 月 20 日（第 2 版）

承認番号：20200BZY00058000

機械器具 62　歯科用切削器
管理医療機器　特定保守管理医療機器　超音波歯周用スケーラ　JMDN:36047000

オドントソン インスツルメント

【禁忌・禁止】


・超音波を発生する歯石・歯垢除去装置は、ペースメーカー使用者には使用しないこと。
・本品に、感作またはアレルギー反応を示す患者には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】


1．外観　**

（チップ）


クラウンリムーバー

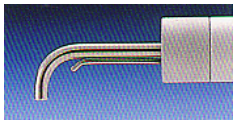


ペリオチップ

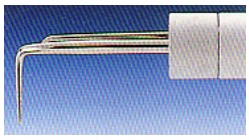


スリムチップストレート

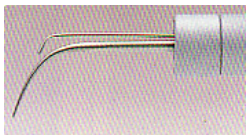

スリムチップ右

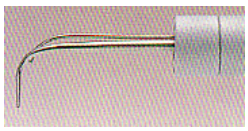

スリムチップ左

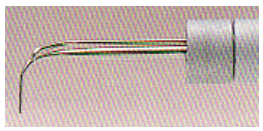

2．原材料

①チップ

先端部　：チタン
発振部　：フェライト
ハンドピース取付部：アルミニウム

②ハンドピース

内　部　：一般電気部品
外　装　：ベークライト等
チップ取付部：アルミニウム

【使用目的、効能又は効果】

超音波歯石・歯垢除去器「オドントソン全種」のハンドピースに取り付けて、超音波微振動による歯石・歯垢除去に用いる。

【品目仕様等】

試験規格

外観、作動機能

【使用上の注意】

1．使用注意

①本品は、記載の使用目的のみに使用すること。
②本品は、歯科医療有資格者のみ使用すること。
③インスツルメントは確実に取り付けること。
④インスツルメントの注水不足は歯面への損傷の原因になるので、注水量に注意すること。
⑤振動しているインスツルメントが粘膜に接触すると振動摩擦熱により火傷をおこすので、操作中にインスツルメントの露出部が患者の口腔粘膜に接触しないようにすること。
⑥チップ先端部は摩耗するので適時交換すること。
⑦再使用する際には、清掃液、消毒剤を用いて付着物を除去した後、オートクレーブ、ケミクレーブによる滅菌若しくは薬剤による消毒をすること。なお、グルタラール製剤、塩素系消毒剤は使用しないこと。
⑧チップの先端を研いだり、加工しないこと。**
⑨チップ先端部が変形したりフェライトが破損するので、チップを落下させないこと。**

2．重要な基本的注意

本品の使用により感作またはアレルギー反応が表れる可能性があるので、異常を認めた場合は直ちに使用を中止し、専門医の診断を受けさせること。

【保守・点検に係わる事項】*

使用者が行う日常の手入れ

①チップ先端部と発振部の接続部に緩みが無いかを点検する。
②チップ及びハンドピースは 121℃のオートクレーブ滅菌が可能である。滅菌は滅菌バックに入れて行なう。この際、乾燥工程は高温になることがあるので行なわないこと。
③チップが摩耗していないかを点検する。

業者が行う保守

本品には、業者に定期的に依頼をしなければならない保守はない。

【包装】**

1本

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：株式会社ヨシダ
住　　所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合せ先
器材営業本部
電 話 番 号：03-3845-2931
ＦＡＸ番号：03-3841-8204

製　造　元：エックスオーケア社
XO Care A/S　（国名：デンマーク）

取扱説明書等を必ずご参照ください。