* 2020 年 5 月改訂（第 2 版）
2019 年 5 月作成（第 1 版）
認証番号：20500BZY00152000

機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
管理医療機器　単回使用骨髄採取・移送セット　33984002

再使用禁止

ボーン　マロウ　コレクション　キット


【禁忌・禁止】
1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】
本品は、骨髄液をろ過、収集するために用いる器具であり、次の構成部からなる。

セット内容

1.	コレクションコンテナー（骨髄採取用バッグ）（容量 1200mL、850μm のフィルター付き）	1 枚
2.	500μm フィルター（赤キャップ）	2 個
3.	200μm フィルター（青キャップ）	1 個
4.	トランスファーパックコンテナー（容量 600mL）	3 枚
5.	トランスファーパックコンテナー（容量 2000mL）	1 枚
6.	チッププロテクター（青色のキャップ/通気口なし）	4 個
7.	無菌ラップ（製品を包んである覆布）	2 枚

※コレクションコンテナー、トランスファーパックコンテナーは Y 字管の違いにより 2 種類ある。

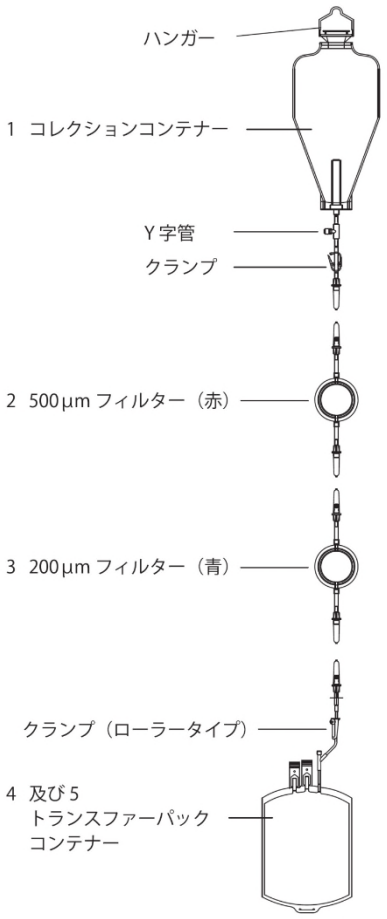

- 図は代表的な構成であり、上記構成と仕様が異なる場合があります。
- 本品はポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ（2-エチルヘキシル））を使用しています。
- コレクションコンテナーの目盛りは、おおよその値です。目安として使用して下さい。

【使用目的又は効果】
本品は骨髄移植のための骨髄液のろ過、収集を行うために使用する器具である。

【使用方法等】
本品は、滅菌済のディスポーザブル製品であり、一回限りの使用で使い捨て、再使用しないでください。

1. コレクションコンテナーキャップを開け、コレクションコンテナーに抗凝固液を入れる。
2. 骨髄液を注入し、軽くコレクションコンテナーを絞り、抗凝固液とよく混和する。
3. コレクションコンテナーキャップを閉める。
4. ボーンマロウコレクションキットにあるフィルターを、上から 500μm（赤）、200μm（青）の順に小さくなるように接続する。
5. トランスファーパックコンテナーを、一番下のフィルター（200μm のフィルター）に接続する。
6. コレクションコンテナーとトランスファーパックコンテナーのクランプを開ける。
7. 重力により、骨髄液はフィルターを通り、トランスファーパックコンテナーにろ過される。
8. 操作終了後のコレクションコンテナーとトランスファーパックコンテナーの両方のクランプを閉め、すみやかに 200μm フィルターの下方の連結管 4 を鉗子等で締める。
9. トランスファーパックコンテナーを、200μm フィルターより取りはずし、別包装されてあるコネクターキャップを、コネクターにはめる。

【使用上の注意】
＜重要な基本的注意＞
- トランスファーパックコンテナーに収集した骨髄液を凍結しないで下さい。
- 骨髄液の入ったコレクションコンテナーはキャップやクランプが閉じていることを確認し、常に垂直な状態で取り扱って下さい。

【保管方法及び有効期間等】
＜保管方法＞
- 水濡れに注意し、室温で保管して下さい。
- 直射日光及び高温多湿を避けて保管して下さい。
- 医療従事者以外の方の手の触れない場所に保管して下さい。
- 凍結させないで下さい。

＜使用期限＞
- 外箱に表記した使用期限を必ず守って下さい。[自己認証（当社データ）により設定]

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**
＜製造販売業者＞
FRESENIUS KABI
フレゼニウスカービジャパン株式会社
https://www.fresenius-kabi.com/jp/

＜製造業者＞
Fenwal, Inc.（アメリカ合衆国）

＜販売業者＞
株式会社ジェイ・エム・エス
電話番号：03-6404-0607

別紙の使用説明書等を必ずご参照下さい