＊２０１６年　１月２８日（第２版）　　医療機器認証番号　20600BZZ00961000

２０１０年１０月　１日（第１版）　　機械器具 58　整形用器具器械

管理医療機器　能動型手用他動運動訓練装置（17137002）　特定保守管理医療機器

ロムーバー の付属品

グローブ 右 L　A7039、グローブ 左 L　A7039、グローブ 右 S　A7039、グローブ 左 S　A7039

【警告】

・本機器の取扱い者は、医師の処方に従ってください。


・患者が、骨粗しよう症やリウマチ性疾患など、筋、骨格系に関わる疾患を持っている場合は、使用前に医師に相談してください。また、使用する際には圧力設定に注意し、痛みなど自覚症状を訴えなくても低い圧力で使用し、安全を確認してください。

・患者が疼痛、異常感覚、不快感を訴えた場合は、使用を中止し、医師に相談してください。

【禁忌・禁止】

患手に化膿巣、出血、火傷、炎症などがある患者には使用しないでください。病巣をひろげたり、循環系を介して病原菌などを伝搬したりする危険があります。

【形状・構造及び原理等】

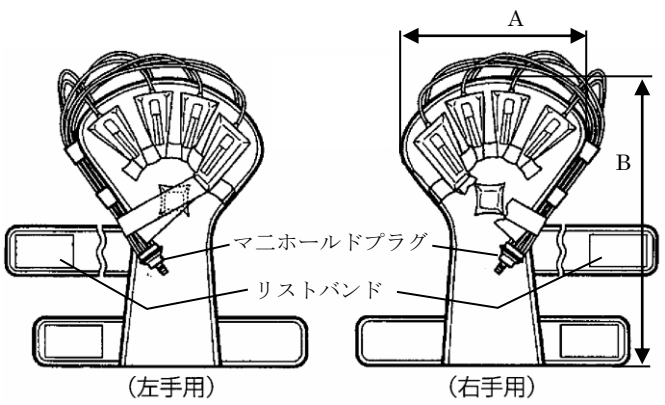

グローブ　（材質：ウレタン合皮）	A 寸法	B 寸法
L サイズ	267mm	420mm
S サイズ	240mm	370mm

＊【使用目的又は効果】

ロムーバー　と組み合わせて使用する。

関節の癒着・拘縮の予防及び関節可動域の改善を行うこと。

＊【使用方法等】

1．電源スイッチを“切”、圧力調節ツマミを最低の圧力状態にし、電源プラグをコンセント（AC100V）に差し込む。

2．電源スイッチを“入”にする。

3．グローブを患手に装着する。

4．ホースを本体とグローブに接続する。

5．時間設定スイッチで使用時間の設定、加圧時間設定ツマミでグローブの加圧時間の設定をする

6．始動スイッチを押し、圧力調節ツマミを徐々に患手に適合した圧力へ調節する。

7．時間設定スイッチで設定された時間になると、停止しブザーが鳴ります。

8．停止したら、圧力調節ツマミを最低の圧力状態に戻す。又、本体の使用を終了する場合は、電源スイッチを“切”にする。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

（1）使用環境及び使用条件

周囲温度 10～40℃、湿度 35～75%

（2）使用前の注意事項

・取扱説明書に従って、本体、グローブ、ホースの各部が正常かつ安全に作動することを確認すること。

・電源プラグはAC100Vの電源コンセントに確実に差し込むこと。

・リストバンドは強く巻き付けないこと。

・ホースは折り曲げたり、重い物を載せたりしないこと。

・圧力調節ツマミは、最低の圧力状態にしてから始動し、徐々に患手に適合した圧力へ調節すること。

取扱説明書を必ずご参照ください。

（3）使用中の注意事項

・マ二ホールドプラグを外した状態で、ホースのソケットを耳、目、鼻、口などに当てないこと。

・本体に患者を触れさせないこと。

・使用中はグローブ装着部位の状態を確認し、発赤、かぶれ、疼痛等の異常がみられたときは直ちに使用を中止し、適切な処置を行なうこと。

（4）使用後の注意事項

・圧力調節ツマミを最低の圧力状態に戻すこと。

・本体の使用を終了する場合は電源スイッチを“切”にすること。

・電源プラグを抜くときは、電源コードを持たすに必ず先端の電源プラグを持って抜くこと。

＊【保管方法及び有効期間等】

水濡れに注意し、直射日光の当たる場所や温度、湿度の高い場所を避けて保管のこと。

保管条件：周囲温度-10～45℃、湿度 10～95％（結露なきこと）

＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元　日東工器株式会社

〒146-8555　東京都大田区仲池上 2-9-4

TEL 03-3755-1111（代表）

FAX 03-3755-5294

製造元　栃木日東工器株式会社