**2008 年 4 月 8 日改訂　（第 3 版）
* 2005 年 12 月 21 日改訂

承認番号　20700BZZ00719000

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
管理医療機器 卵巣内容液排出用セット 70335000

サクションニードル
（リデューサー）

再使用禁止


【禁忌・禁止】

・再使用禁止


【形状・構造及び原理等】

＜構造図（代表図）＞

5mmトロッカー用

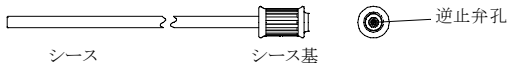

10mm、12mmトロッカー用

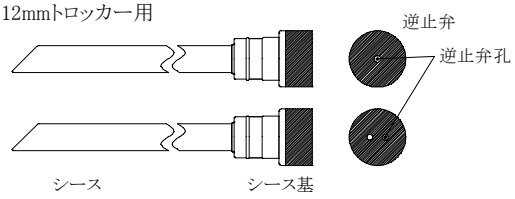

・サイズ、長さ、逆止弁孔径等については、包装表示で確認すること。

** **＜構成品＞**

構成品	一般的名称	JMDN コード
リデューサー	リデューサ	70225000

【使用目的、効能又は効果】

** 本品は、卵巣嚢胞内容液の吸引、排出、洗浄等を行うために用いる。

【品目仕様等】

** ・特記事項なし

【操作方法又は使用方法等】

本品は、手技に精通した医師の管理下で使用すること。

1) 本品を包装から取り出す。

2) サクションニードル穿刺針等の内視鏡下用器具をリデューサーに挿入する。

** 3) トロカールスリーブを介して、穿刺針等の器具及びリデューサーを術野に挿入する。

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

** ・使用直前に、組み合わせる穿刺針等の器具がリデューサーに挿入可能か、また、リデューサーは、トロカールスリーブに挿入可能か確認すること。

・使用直前に、リデューサー後端の逆止弁孔と器具が適切か確認すること。［逆止弁径が器具と比較して、大き過ぎると気腹ガスの顕著な漏れの原因となる。］

・穿刺針等の器具をリデューサーに挿入する際は、シース、逆止弁を傷つけないように注意すること。

** ・トロカールスリーブへ挿入する際は、穿刺針等の器具先端をリデューサーに収納した状態で挿入すること。［穿刺針等の器具が損傷する恐れがある。］

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

・包装が既に破損していたり、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。

・使用直前に開封して使用すること。

＜その他の注意＞

・使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。

・本品はエチレンオキサイドガス滅菌済み。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

＜貯蔵・保管方法＞

・水ぬれ、直射日光、高温多湿を避け保管すること。

＜有効期間・使用の期限＞

・箱に記載している使用期限を参照のこと。（自己認証による）

【包 装】

5 本／1 箱

10 本／1 箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

* **＜製造販売業者＞**

株式会社八光
長野県千曲市大字磯部 1490
TEL 026-275-0121

＜製造業者＞

株式会社八光
長野県千曲市大字戸倉温泉 3055

販売窓口：東京都文京区本郷三丁目 42-6
TEL 03-5804-8500