2017年11月改訂　（第 4 版）（新記載要領に基づく改訂）　　医療機器承認番号　20700BZZ00719000
＊ 2008年04月改訂　（第 3 版）

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
管理医療機器　卵巣内容液排出用セット　70335000

サクションニードル

（リデューサー）


再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止


【形状・構造及び原理等】

＜構造図（代表図）＞

5mmトロッカー用

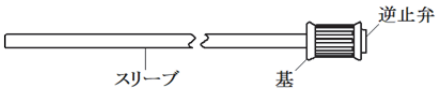

10mm、12mmトロッカー用

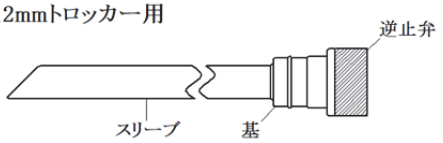

1)　スリーブ：フッ素樹脂
2)　逆止弁：シリコーンゴム

【使用目的又は効果】

＊　本品は、卵巣嚢胞内容液の吸引、排出、洗浄等を行うために用いる。

【使用方法等】

1)　サクションニードル穿刺針等の内視鏡下用器具をリデューサーに挿入する。
＊ 2)　トロカールスリーブを介して、穿刺針等の器具及びリデューサーを術野に挿入する。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1)　使用の際は、汚染に十分注意すること。
2)　使用直前に、リデューサー後端の逆止弁孔と器具が適切か確認すること。
［逆止弁径が器具と比較して、大き過ぎると気腹ガスの顕著な漏れの原因となる。］
3)　穿刺針等の器具をリデューサーに挿入する際は、シース、逆止弁を傷つけないように注意すること。
［スリーブや穿刺針刃先を損傷する恐れがある。］
＊ 4)　トロカールスリーブへ挿入する際は、穿刺針等の器具先端をリデューサーに収納した状態で挿入すること。
［穿刺針等の器具が損傷する恐れがある。］

【使用上の注意】

＜不具合・有害事象＞

手技に伴い、一般的な不具合や有害事象が発生する恐れがある。有害事象が発生した場合は術者の知見に基づき、適切な処置を行うこと。

1)　その他の不具合
①　本品破損
②　気腹ガスの漏れ
2)　重大な有害事象
①　感染
3)　その他の有害事象
①　アレルギー反応

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

水ぬれ、直射日光、高温多湿を避け保管すること。

＜有効期間＞

箱に記載している使用期限を参照のこと。（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

株式会社八光
TEL 026-275-0121

＜製造業者＞

株式会社八光

販売窓口：
東京都文京区本郷三丁目 42-6
TEL 03-5804-8500