** 2011年3月改訂（第３版）
＊2006年4月改訂

コード番号　ATC4510

Baxter

高度管理医療機器	
承認番号	20800BZZ00296000
JMDNコード	70588000

機械器具 7.　内臓機能代用器
チタニウムアダプタ

CAPDチタニウムアダプター


再使用禁止

【警　告】
本品の接続部及び透析液が接する部分を汚染した場合は使用しないこと［腹膜炎を発症することがある］。

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は連続携行式腹膜透析において腹膜透析用カテーテル（以下、「カテーテル」という）と当社の接続チューブ（以下、「接続チューブ」という）を接続するために用います。

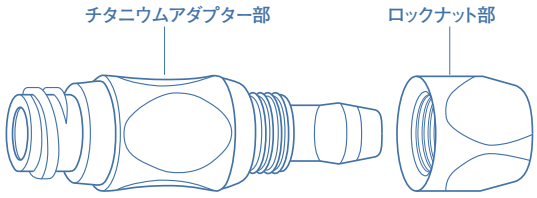

【使用目的】

滅菌済であるので、そのまま直ちに使用できる。

【操作方法又は使用方法等】

・開封前に包装に破れ、傷、汚れがないことを確認して下さい。
・本品に変色、ヒビ、変形、劣化、破損があった時は使用しないで下さい。
・本品の接続操作は、清潔な環境下で無菌的操作により、行って下さい。

1. ロックナット部の細い側を腹腔側にしてカテーテルに通して下さい。
2. チタニウムアダプター部のカテーテル接続部をカテーテルに挿入します。
3. ロックナット部を右に回しながらチタニウムアダプター部に接続します。ロックナット部とチタニウムアダプター部の隙間が約0.5mm以下になるようにして下さい。
4. 以下、ご使用になる接続チューブの添付文書に従って接続チューブと接続して下さい。

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

1. 本品とカテーテル及び接続チューブとの接続操作は確実に行って下さい。
2. 接続チューブの添付文書に従い、本品にポビドンヨード液以外の殺菌消毒剤は使用しないで下さい。
3. 本品はエチレンオキサイドガス滅菌済みにつき、包装開封後、直ちに1回限りの使用とし、再滅菌、再使用しないで下さい。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. カテーテルと接続するときはカテーテルを傷つけないように注意して下さい。
2. 本品のチタニウムアダプター部にロックナット部を結合するときには金属製鉗子で固定すると傷が付きカテーテルや他の器材を傷つける可能性がありますので、金属製鉗子を直接接触させないで下さい。
3. ロックナット部がチタニウムアダプター部のカテーテル接続部に十分装着されていない場合は接続の補強が不十分になり、本品とカテーテルの離脱の可能性がありますので確実に装着してください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】**

貯蔵方法
室温にて保管して下さい。

有効期限・使用の期限
本品の包装に記載

【包装】

1個

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】**

バクスター株式会社
〒104-6009 東京都中央区晴海一丁目８番10号
電話番号：03（6204）3700〔ダイヤルイン〕
03（6204）3730〔留守番電話対応〕

製造業者
株式会社カナエ

製造販売元*
バクスター株式会社
東京都中央区晴海一丁目８番10号