**2020年 2月改訂（第15版）
*2019年 1月改訂（第14版）

承認番号 20900BZZ00772000

機械器具 74 医薬品注入器
高度管理医療機器 ヘパリン使用長期的使用注入用植込みポート 35911204

生物由来製品 P−U セルサイトポート（静脈留置専用）

再使用禁止

【警告】

1．使用方法

1）鎖骨下静脈へカテーテルを留置する場合、第１肋骨と鎖骨の間にカテーテルが挟まれないようにすること。
［カテーテルが断裂、損傷又は閉塞するおそれがある。］[1),2),3)]

2）長期留置に伴いカテーテルの断裂、心臓等への迷入などの可能性があることから、患者の状態等により、本品を引き続き留置することが医学的に必要とされず、かつ抜去が安全に行えると判断される場合には、抜去すること。但し、カテーテル抜去に際しては、カテーテル留置に伴う血栓症や梗塞症の危険性を考慮に入れ、必ずカテーテル操作に熟練した医師が行うこと。［血栓又は体組織を循環血液へ飛散させる危険性がある。］[4),5),6),7),8),9),10),11),12)]

3）ドセタキセル水和物（タキソテール注）又はパクリタキセル（タキソール注）を投与する場合、当該薬剤の添付文書に記載された用法並びに用量を厳密に遵守すること。
［当該薬剤の溶解液として使用されたエタノール濃度により、カテーテル強度を低下させる危険性がある。］[20)]

4）市販のヘパリンナトリウムには、ベンジルアルコールを包含するものがある。当該薬剤をヘパリンロックなどで使用する場合には、当該薬剤の添付文書に記載されているベンジルアルコール量を確認し、ベンジルアルコール濃度を0.3mg/mL以下に希釈すること。
［カテーテル強度を低下させる危険性がある。］[13)]

5）エトポシド（ベプシド注100mg、ラステット注100mg／5mL、エトポシド点滴静注液100mg「サンド」）を投与する場合、当該薬剤の添付文書に記載された用法並びに用量を厳密に遵守すること。
［カテーテル材質に浸透し、著しく強度を低下させる危険性がある。］[13)]

【禁忌・禁止】

下記の禁忌・禁止事項を遵守すること。

1．適用対象（患者）

次の患者に使用しないこと。

1）敗血症をはじめとする重篤な感染症があるか、その疑いがある患者。
［症状が増悪する危険性がある。］

2）本品の構成品にアレルギー反応又はアナフィラキシー反応を示すか、その疑いがある患者。

3）血液凝固線溶障害あるいは何らかの要因による凝固線溶能の重篤な変化を有する患者。
［重篤な出血性有害事象又は血栓症の危険性がある。］

4）ヘパリン起因性血小板減少症患者。
［症状が増悪する危険性がある。］[15)]

2．使用方法

1）再使用禁止。

2）再滅菌禁止。


3）静脈留置以外には使用しないこと。
［本品は静脈用に設計されており、X線透視下でのカテーテルの視認性が乏しいため、動脈では使用できない。］

4）併用禁忌。
次の薬剤とは併用しないこと。（【使用上の注意】相互作用の項を参照）
DMSO（ジメチルスルホキシド）
［カテーテル材質を溶解させる。］

**5）ガイドワイヤー（樹脂被覆タイプ）の表面をアルコール、殺菌薬（グルコン酸クロルヘキシジン水溶液等）又は乾いたガーゼで強く拭かないこと。（【使用上の注意】相互作用の項を参照）
［表面潤滑性が損なわれる可能性がある。］

【形状・構造及び原理等】

1．形状・構造（代表例）

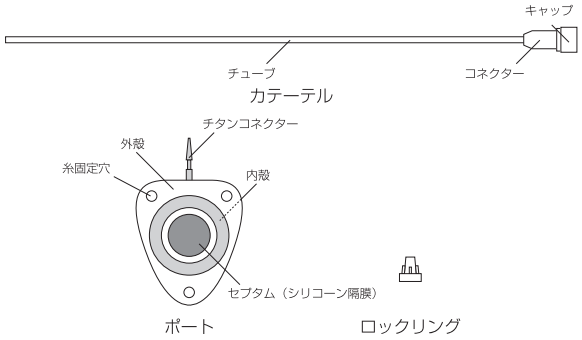

1）アンスロン®P−Uカテーテル

Fr.サイズ（Fr.）	6	5
長さ（cm）	35	100
タイプ	ソフト	ソフト
カテーテル内容量（mL）（コネクター部含む）[注1]	0.4	1.0

注1）製品参考値

2）ポート

ポートサイズ	ラージ	スモール	ベビー
底部の長さ（mm）	31.5	26	22
底部の幅（mm）	26.5	22	18
セプタムから底部までの高さ(mm)	12.2	9.7	8.7
糸固定穴の数	3	3	0
セプタム直径（mm）[注2]	12.5	9.5	7.6
重量（g）[注2]	8	5	2.5
プライミング容量（mL）[注2]	0.5	0.3	0.2
穿刺耐用回数（回）[注3]	3000	3000	1500
ポート - カテーテル接続時の最大注入圧力 MPa (psi)[注3]	2.1 (300)	2.1 (300)	2.1 (300)

注2）製品参考値

注3）19Gのノンコアリングニードルで繰り返し穿刺したポートと、カテーテルを接続して高圧注入（300psi）したとき、ポート、カテーテル及びその接続部が破損しないこと。

3）付属品

ロックリング
耐キンクチューブ
ノンコアリングニードル（22G×30mm）
穿刺針（カニューレ付穿刺針、金属針）
**ガイドワイヤー[注4]
*ティアウェイシースダイレーター[注5]
*インサーター
*インナーガイドチューブ
*ダイレーター
トンネラー

ウィング付ノンコアリングニードル
フック

**注4)金属タイプと樹脂被覆タイプがある。
*注5)止血弁を備えたものと、備えてないものがある。

上記の付属品は代表例であり、一部の付属品が含まれない場合もある。
同梱されている付属品及び寸法仕様は製品ラベルに記載されている。

2. 材質

構成品		組　成
カテーテル	チューブ	ヘパリン化親水性材料 ポリウレタン樹脂
	コネクター	ポリスルホン又はポリプロピレン
ポート	外殻	エポキシ樹脂
	セプタム(シリコーン隔膜)	シリコーンゴム
	内殻・チタンコネクター	チタン
ロックリング	ストッパー	チタン
	本体	MBS（メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン共重合体）
耐キンクチューブ		ポリウレタン樹脂 チタン MBS（メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン共重合体）
** ガイドワイヤー（金属タイプ）		ステンレス（SUS304）
** ガイドワイヤー（樹脂被覆タイプ）		ポリウレタン コート剤
* インナーガイドチューブ		ナイロン12及びナイロンエラストマー

注6)本品に同包されているアンスロン®P-Uカテーテルは、豚の腸粘膜由来のヘパリンナトリウム（日局）を使用している。

3. 原理

本品は、ポート、カテーテル及び付属品からなり、皮下に埋め込まれ体内に留置される。医療用ポンプ又はボーラス投与により薬液等を血管に送達させるために用いられる。高圧注入対応のノンコアリングニードルを使用する場合、造影剤等の高圧注入が可能である。

【使用目的又は効果】

*本品は、皮下埋込型カテーテルアクセスシステムとして、体内に設置され、経皮的に血管内に薬液又は他の液体を投与するため、及び血液標本の採取のために使用する。

【使用方法等】


本品の設置は、十分な技術と経験を持つ医師が、患者の状態及び意図する治療内容に応じて適切な手段並びに技術を選択して施行する必要がある。
下記の説明は、一般的方法である。従って細部については、医師各位の臨床経験に基づき、手段の追加変更を適宜行うこと。

1. ポート、カテーテル及び付属品のプライミング


① カテーテルをヘパリン加生理食塩液又は生理食塩液で十分プライミングすること。
② ノンコアリングニードルを使用し、ヘパリン加生理食塩液又は生理食塩液でポートを十分プライミングすること。
③ それぞれの付属品をヘパリン加生理食塩液又は生理食塩液で十分プライミングすること。

2. 血管確保

1）カニューレ付穿刺針を使用する場合
① カニューレ付穿刺針の刃面が上になるように保持し、目的の血管を穿刺する。必要に応じて、超音波診断装置や血管造影などの手法を用いて、目的血管へ正確な穿刺を行うことが望ましい。

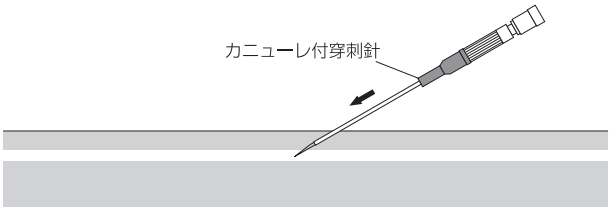


② シリンジで吸引するなどして、針先端が血管に入ったことを確認すること。
③ 血管を確保したら、針部分を指で固定したままカニューレ付穿刺針のカニューレだけを必要な深さまで進める。
④ 止血をしながら針を抜去する。
*⑤ 出血や空気の引き込みを防止しながら、留置したカニューレからガイドワイヤーを挿入する。必要に応じてX線透視下で先端を確認しながら適切な位置まで進める。

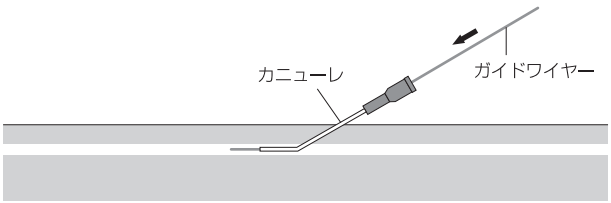


⑥ 皮膚の上からガイドワイヤーを押さえ、留置したカニューレを抜去する。
2）金属針を使用する場合
① 金属針の刃面が上になるように保持し、目的の血管を穿刺する。必要に応じて、超音波診断装置や血管造影などの手法を用いて、目的血管へ正確な穿刺を行うことが望ましい。
② シリンジで吸引するなどして、針先端が血管に入ったことを確認すること。
**③ 出血や空気の引き込みを防止しながら、ガイドワイヤー（金属タイプ）を金属針に挿入する。必要に応じてX線透視下で先端を確認しながら適切な位置まで進める。
④ 皮膚の上からガイドワイヤーを押さえ、金属針を抜去する。

3. カテーテルの挿入

*1）ティアウェイシースダイレーターを使用する場合
*① ティアウェイシースダイレーターをガイドワイヤーに沿わせて血管に挿入する。

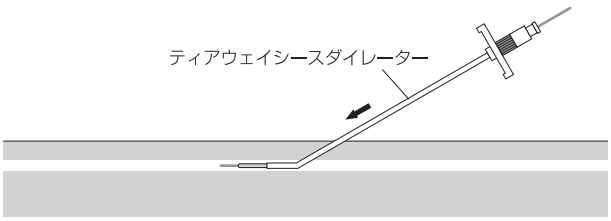

② 出血や空気の引き込みを防止しながら、シースを残して、ガイドワイヤーとダイレーターをゆっくり抜去する。

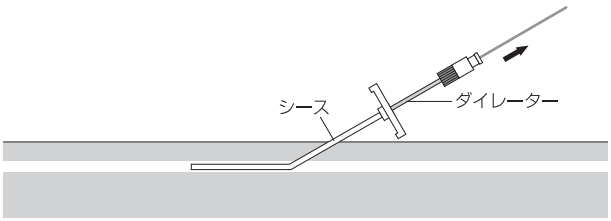


③ X線透視下でカテーテル先端の位置を確認しながら、カテーテルを目的部位に留置する。
④ 目的位置にカテーテルを留置した後、カテーテルがずれないように注意しながら、シースを分割しながら引き抜く。
*2）インナーガイドチューブを使用する場合
*① カテーテルにインナーガイドチューブを挿入し、カテーテルコネクタを時計方向に締め込み、カテーテル本体と一体化する。
*② ダイレーターをガイドワイヤーに沿わせて、血管内に挿入する。

*③ ダイレーターを目的の深さまで挿入した後、ゆっくりと抜去する。
*④ 一体化したカテーテル・インナーガイドチューブを、ガイドワイヤーに沿わせて、血管内に挿入する。
*⑤ X線透視下でカテーテル先端の位置を確認しながら、カテーテルを目的部位に留置する。
*⑥ 目的位置にカテーテルを留置した後、カテーテルがずれないように注意しながら、インナーガイドチューブ及びガイドワイヤーを抜去する。


4. 皮下ポケット・皮下トンネルの作製

① ポートの安定性がよく、患者の動きを制約したり、圧迫感を与えないようにポート埋込部位を決定すること。
② 皮下ポケットを作製する。
③ トンネラー等を用いて、カテーテルの血管挿入部から皮下ポケットまでの皮下トンネルを作製する。
④ カテーテルを適当な長さにカットした後、カテーテル末端をトンネラー等に接続し皮下ポケットまで挿通する。

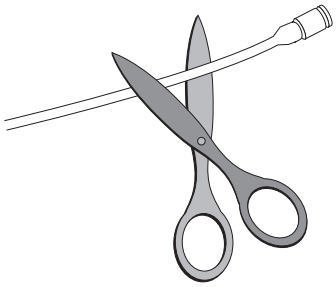


5. カテーテルとポートとの接続

① カテーテルを適当な長さで垂直に切断する。
② カテーテル後端からロックリング又は耐キンクチューブを挿入する。耐キンクチューブを使用する場合には、耐キンクチューブの長さを皮下トンネルの長さに対して半分になるように適宜切断して使用すること。

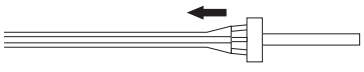


耐キンクチューブの使用例

③ ポートのチタンコネクターに奥まで挿入する。

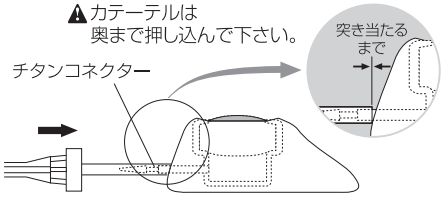


④ ロックリング又は耐キンクチューブをカテーテルの上からポートのチタンコネクター根元まで押し込んで接続を完了する。

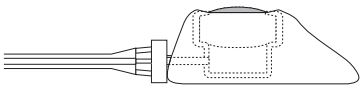


6. ポートの埋込

① 皮下ポケットにポートを挿入し、必要に応じてポートの糸固定穴と皮下ポケット下の筋膜を縫合糸で固定する。
② 切開創を適切な抗生物質で洗浄する。
③ 22Gのノンコアリングニードルと注射筒を用いて生理食塩液を注入し、カテーテル閉塞、液漏れ等のないことを確認する。

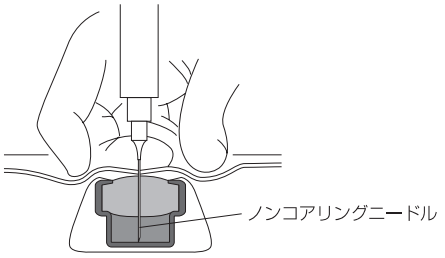

④ 10mLのヘパリン加生理食塩液又は生理食塩液を勢いよく注入して、フラッシュする。[14)]

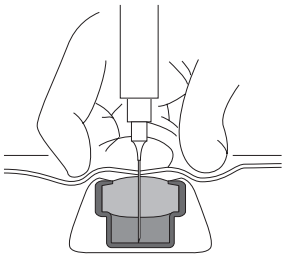

⑤ 皮下ポケットの切開創を縫合する。
⑥ X線透視下でシステム全体の走行状態を確認する。

7. ウィング付ノンコアリングニードルを用いて薬液を投与する場合

① 穿刺部位周辺を十分に消毒する。
② 薬液チューブコネクタにヘパリン加生理食塩液又は生理食塩液が入ったシリンジ及び輸液ライン等を接続し、プライミングを十分に行う。
③ プライミング終了後、ホースクリップを閉じる。
④ ウィングを持ち、もう片方の手で皮下に埋め込んだポートを触知にて確認し、穿刺針をセプタム部の適切な位置へ垂直に穿刺する。
⑤ 針先がポート底面に確実に当たるまでゆっくりと針を進めて挿入する。
⑥ 薬液チューブコネクタに生理食塩液の入ったシリンジを接続し、生理食塩液を緩やかに注入して通水テストを行い、針先が正しくポートタンク内に挿入されていること、システムが開存していることを確認する。
⑦ ウィング付ノンコアリングニードルが抜けないよう、必要に応じてガーゼ等で皮膚とウィングの隙間を埋めて、滅菌済みテープでウィングを止めた後、穿刺針とウィングを透明なドレッシングで被覆・固定する。
⑧ 薬液チューブコネクタに投与する薬剤の入った携帯型持続ポンプ、輸液バッグ等の輸液ラインを確実に接続する。
⑨ ホースクリップを開放し、薬液の注入を開始する。
⑩ 薬液を変えて注入を行う場合は、配合変化による反応を防ぐため生理食塩液を用いてシステムを洗浄すること。
⑪ 薬液投与終了後、ヘパリン加生理食塩液又は生理食塩液を用いて、システムを洗浄する。
⑫ システム洗浄後、カテーテルへの血液逆流を防ぐため、シリンジで陽圧を掛けながらホースクリップを閉じ、穿刺針をポートから抜去する。抜去は、刺入部を押さえながらウィングを上方に引き上げること。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. 使用前の注意

1）穿刺部位、使用目的にあったカテーテル及びポートサイズを選択すること。
2）同梱されたカテーテルとポートの組み合わせで使用すること。［異なる組み合わせの場合、カテーテルとポートの接続部から薬液等が漏出する危険性、接続不良によりカテーテルが外れる危険性がある。］
3）ポートに使用する針は19G以下の細いノンコアリングニードルを使用すること。［それ以外の針を使用した場合、ポートセプタムの耐久性を著しく低下させる。また、セプタムの断片が流路の閉塞あるいは体内へ流入する可能性がある。］

4）挿入・埋込前にシステムを生理食塩液で満たし、空気塞栓を防止すること。

**5）金属針とガイドワイヤー（樹脂被覆タイプ）は併用しないこと。［ガイドワイヤーの損傷、切断が生じるおそれがある。］

**6）ガイドワイヤー（樹脂被覆タイプ）の表面は、湿潤時において潤滑性を発現するため、予めディスペンサー及びカテーテル内をヘパリン加生理食塩液又は生理食塩液で満たして、ガイドワイヤー表面を濡らした状態にして取り扱うこと。

*7）止血弁付のティアウェイシースダイレーターにおいて、シースにダイレーターを挿入する際に、止血弁の中心を狙って挿入すること。［中心部から外れたまま無理に押し込んだ場合、止血弁が損傷し、気密性が維持できず、血液の漏れ、または空気混入のおそれがある。］

2．使用中の注意

1）カニューレ付穿刺針のカニューレからニードルを抜き取る際は、カニューレが損傷・破断する可能性を回避するため、ニードルを途中で止めないこと。また、ニードルをカニューレ内で針先方向に進めないこと。

**2）金属針を使用してガイドワイヤー（金属タイプ）を挿入する際は、金属針をしっかりと保持した状態でガイドワイヤーの挿入を行うこと。また、ガイドワイヤーを引き戻さなければならない場合は、金属針とガイドワイヤーの両方を一体化して引き戻すこと。
［金属針の先端位置が移動し、ガイドワイヤーが意図しない部位へ迷入するおそれがある。またガイドワイヤーのみを前後させた場合、金属針の刃先に引っかかり、破損・破断するおそれがある。］

3）ガイドワイヤー及びカテーテル挿入時に、異常な抵抗を感じたら、無理な挿入を止め、X線透視により確認し、異常を感じた場合はカテーテル等を抜去すること。

*4）止血弁付きのティアウェイシースダイレーターを使用した際は、シースからダイレーターを真っ直ぐに、ゆっくりと引き抜くこと。［シースからダイレーターを傾けながら、或いは急激に引き抜くと、止血弁が正しく閉じられず弁の隙間から血液が漏れる、または空気が混入してしまうことがある。もし、弁から血液が流れ出た場合は、シースにダイレーターを再挿入したうえ、ダイレーターをゆっくりと引き抜くこと。］

*5）シースを分割する際、カテーテルの位置ずれを起こさないよう十分注意し、シース本体の持ち手部分を持って、左右均等の力で慎重に分割すること。［一方の持ち手を固定し、他方の持ち手のみを引っ張って裂いた場合や勢いよく裂いた場合等は、シースがラインに沿って裂けずに、破断するおそれがある。］

*6）インナーガイドチューブを使用してカテーテルを挿入・留置した際は、必ずインナーガイドチューブが引き抜かれている事を確認した後にカテーテルの切断、ポートとの接続操作に進むこと。

7）カテーテルとポートを接続した直後又は接続して埋め込む前に接続部等から薬液の漏出がないことを確認すること。

8）ウィング付ノンコアリングニードルを使用する際は、皮下組織の厚み、ドレッシング材の厚み等を考慮して、針が適切な長さであることを確認すること。［針が長すぎる場合は針の刺入により本品の損傷又はポートの損傷、針が短すぎる場合はポートセプタムの不完全貫通、又は周辺組織への薬液の漏出又は針が塞栓するおそれがある。］

9）ウィング付ノンコアリングニードルの穿刺はゆっくり慎重に行うこと。［針先端をポート底面に強く押しつけると、針先端の変形によりセプタムを破損する危険性がある。］

10）ウィング付ノンコアリングニードルの使用中は、穿刺部分を注意深く観察し、発赤、浮腫、潰瘍や浸出液がないことを確認すること。また薬液チューブが引っ張られないよう注意すること。

【使用上の注意】

1．使用注意（次の患者には慎重に適用すること）

1）先天性ATⅢ欠乏症患者
［血栓症の危険性がある。］

2）肘・鼠径部等、頻繁に屈曲する部位を跨いでカテーテルを留置した患者
［カテーテルが破損する危険性がある。尚、特に前腕などに留置された患者に抗癌剤を投与する前には、生理食塩液などで通水の状態を確認すること。異常が認められた場合、投薬を中止するとともに、ポートの埋込位置を移動・変更するなど適切な医学的措置を講じること。］

3）糖尿病患者
［血栓症の危険性がある。］

4）高脂血症・高血圧症患者
［血栓症の危険性がある。］

2．重要な基本的注意

1）カテーテル留置時及び留置中は、X線透視によりカテーテル先端位置並びにカテーテルの走行状態を定期的に検査し、異常が認められた場合には、適切な処置を行うこと。特にカテーテルの切断、結節形成、キンク、捻れ等のないことを確認すること。

2）ポートを覆う皮下組織の厚みに注意すること。皮下組織が厚いとセプタムの位置確認が困難になり、薄いと皮膚壊死を招くことがある。

3）ポートチャンバ内へ薬液注入又はフラッシングを行う場合、容量2.5mL以上のシリンジを使用すること。
［2.5mL未満のシリンジを使用した場合、ポートチャンバ内の圧力が上昇し、ポート本体やカテーテルの破損等を引き起こすおそれがある。］

4）薬液注入前に生理食塩液又は造影剤を注入して、システムの開存を確認すること。尚、逆血確認した場合は、生理食塩水等を注入してシステム内を十分洗浄すること。

*5）薬液注入後は、システム内を十分洗浄するために、10mL以上のヘパリン加生理食塩液又は生理食塩液でフラッシュすること。また、少なくとも4週間に1度の頻度でシステムのフラッシュを行うこと。フラッシュの際は、陽圧を掛けながら抜針する等により、システムへの血液の逆流を防ぐこと。[13),14),21),22),23)]

＜フラッシュ量の目安＞

	薬液、TPN溶液	10mL以上
**	採血、輸血、粘稠度の高い液体（脂肪乳剤等）	10mL以上

6）インジェクターを用いて造影剤等の薬液を高圧注入する場合は、【形状・構造及び原理等】で示された最大注入圧力以上の加圧はしないこと。［システムが破損する危険性がある。］

7）薬液の漏出、システムの閉塞等の兆候が見られたら、直ちに医学的処置を実施すること。

*8）本品は以下の条件において、安全性が確認されている。
・静磁場強度：3テスラ以下
・最大空間磁場勾配：4,000ガウス/cm以下
・最大全身平均比吸収率：2.9W/kgで15分のスキャン
（通常操作モードがある場合は、2W/Kgで15分のスキャン）

3．相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）

1）併用禁忌（併用しないこと）

医薬品の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
DMSO（ジメチルスルホキシド）	カテーテルの破損	カテーテル材質を溶解させる
**アルコール、殺菌薬（グルコン酸クロルヘキシジン水溶液等）	付属のガイドワイヤー（樹脂被覆タイプ）の潤滑性コーティングの潤滑性低下	表面コート剤を損傷させる

2）併用注意（併用に注意すること）

医薬品の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
脂肪乳剤[16),17)]	システムの閉塞	粘稠度が高く、システム内で滞留する危険性がある
脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含む医薬品、ヒマシ油等の油成分、界面活性剤又はアルコール等の溶解補助剤などを含む医薬品及びアルコールを含む消毒剤	ウィング付ノンコアリングニードルの破損に伴う血液及び薬液漏れ、空気混入	薬液によりウィング付ノンコアリングニードルの薬液チューブコネクタにひび割れが生じることがある。

4. 不具合・有害事象

一般的な不具合・有害事象の一部である。細部については、医師各位の臨床経験に基づき、注意及び適切な治療を行うこと。

不具合・有害事象		原因
重大な不具合	カテーテルの破損、穿孔、断裂	・カテーテルに繰り返し曲げ応力が加わるような場合 ・カテーテルが狭い隙間に挟み込まれるような場合 ・カテーテルがキンクし、このキンクに応力が集中する場合 ・鉗子・穿刺針・メス・はさみ等による機械的な損傷 ・システムの閉塞などにより、最大注入圧力以上の圧力が加わった場合
	ポート本体、セプタムの破損	・システムの閉塞などにより、最大注入圧力以上の圧力が加わった場合
	ポートとカテーテルの接続外れ、ポートとカテーテルの接続が外れ、薬液等が漏出する	・使用方法で示した以外の接続方法を実施した場合 （特にカテーテルの挿入が浅い場合には注意を要する） ・小児・乳幼児等では、患者の身長が伸び、接続部分に過度な力が加わり抜けたというケースが報告されている
	ポートの突出	・同一箇所を頻繁に穿刺することにより潰瘍を生じる場合
	カニューレの離断	・血管内に挿入したカニューレに針を入れ直した場合 ・穿刺時にニードルだけを抜き差しした場合
**	ガイドワイヤーの離断、樹脂層の剥離	・無理なガイドワイヤー操作による機械的損傷 ・血管の蛇行が著しく、血管内でガイドワイヤーがキンクし、このキンクに引張りと捻れの応力が集中した時 ・カニューレ付穿刺針のニードル内に直接ガイドワイヤーを挿入した場合
重大な有害事象	カテーテルの心臓・肺・血管等への迷入	・カテーテルが破損、断裂した場合（破損、断裂の原因については、「カテーテルの破損、穿孔、断裂」の項を参照） ・カテーテルがポートのコネクターから外れた場合
	皮膚潰瘍	・埋込部分の感染や鬱血並びに薬液漏出などによる
	脳梗塞[7),10),11),12)]	・化学療法を施行している患者の約1～10%程度に発生するとの報告がある 危険因子としては、シスプラチン等抗癌剤の副作用・担癌生体[18),19)]・加齢・高脂血症・高血圧症・鎖骨下動脈へのカテーテル留置などがある
	血栓症、梗塞症（肺血栓塞栓症等）、あるいはカテーテル留置静脈の閉塞	・カテーテル周囲に形成された血栓 ・抗癌剤等の薬理作用によるもの ・プライミングの不十分などにより空気が血管内へ流入することによって発生する
	システムの周辺組織との癒着	・システムが周辺組織と癒着し、体外へ抜去できなかったとの報告がある
	感染症（敗血症等）、ポート埋没部の感染、システムに関連する感染	・消毒不十分、器具の汚染など （カテーテル感染・薬液ルートからの感染） ・自己感染
	骨髄抑制	・抗癌剤等の薬理作用によるもの
重大な有害事象	消化管潰瘍	・消化管を栄養する血管へ抗癌剤が流入する ・消化管を栄養する血管の閉塞による壊死
	肝機能障害	・留置カテーテルによる肝動脈閉塞 ・抗癌剤等の薬理作用によるもの
	血管炎症	・抗癌剤等の薬理作用によるもの ・システムによる機械的刺激 ・カテーテル・ガイドワイヤー・付属品操作による血管損傷 ・感染
	埋込部組織の炎症、壊死	・消毒不十分、器具の汚染などによる感染 ・抗癌剤等の皮下漏出
	出血、血腫、仮性動・静脈瘤、動・静脈瘤	・医師の不適切な手技 （カテーテル・ガイドワイヤー・付属品操作による機械的損傷） ・患者側の要因 （凝固線溶障害、高血圧、加齢、動脈硬化等）
	心内膜炎、心タンポナーデ、心室不整脈	・高カロリー輸液又は全身化学療法を目的としてカテーテルを留置したが、カテーテル先端位置が不適切であったため、心内膜炎、心タンポナーデ、心室不整脈を併発したとの報告がある
	気胸・血胸	・鎖骨下動・静脈を穿刺しようとした時、誤って肺を穿刺した場合
	胸水	・担癌生体、鬱血性心不全、サルコイドーシスなどが危険因子として挙げられる
	血管攣縮	・無理なカテーテル・ガイドワイヤー・付属品操作による血管への機械的刺激
	上腕神経叢損傷・神経叢損傷	・無理な穿刺やダイレーター挿入操作による機械的損傷
	動脈穿刺	・無理な穿刺やダイレーター挿入操作による機械的損傷 ・穿刺位置が適切でなかったことによる誤穿刺
	ショック、アナフィラキシー	・本品に使用されているヘパリンナトリウムは、薬剤として投与された場合の副作用として、ショック、アナフィラキシーが使用上の注意に記載されている
その他の不具合	カテーテルのキンク	・血管の蛇行・走行 ・鋭角な角度で留置された場合 ・カテーテルが体内で移動した場合
	ポートの移動、又は反転、ポートの回転によるカテーテル逸脱	・ポートを結紮糸等で皮下組織に固定していない場合 ・皮下ポケットのサイズがポートに対して大きい場合 ・過度の運動
	システムの閉塞	・微量元素とビタミン剤の混合投与など配合禁忌薬剤の投与 ・血栓 ・カテーテルのキンク ・異物（セプタムの破片・薬剤に混入した異物等） ・脂肪乳剤
	フィブリンシース	・蛋白様物質の析出
	カニューレ先端の捲れ	・カニューレ先端が骨など硬い組織と接触した場合
	ガイドワイヤーのキンク	・血管の蛇行が著しい場合 ・刺入角度が鋭角である場合
	ティアウェイシースダイレーターのキンク	・血管の蛇行が著しい場合 ・刺入角度が鋭角である場合
*	ダイレーターのキンク	・血管の蛇行が著しい場合 ・刺入角度が鋭角である場合
*	インナーガイドチューブのキンク	・血管の蛇行が著しい場合 ・刺入角度が鋭角である場合
	ウィング付ノンコアリングニードルの破損	・体動による位置移動、折れ曲がり
	ウィング付ノンコアリングニードルの接続外れ	・過度な引っ張りなどにより発生する

5．妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用

本品を使用する際にはX線照射を伴うので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、診断上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ適用すること。また、低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に適用する場合には、患者の状態を十分に観察しながら慎重に適用すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。

有効期間：本品の包装に記載されている使用期限までに使用すること。（自己認証による）

【主要文献及び文献請求先】

1）RAMSDEN WH, COHEN AT, BLANSHARD KS：Case Report “Central Venous Catheter Fracture Due To Compression Between the Clavicle And First Rib”：Clin. Radiol., Vol.50, No.1,：59～60, 1995.

2）LAFRENIERE R.：Indwelling Subclavian Catheters and a Visit with the “Pinched-Off Sign”, J. Surg. Oncol., vol.47, No.4：261～264, 1991.

3）HINKE DH, Zandt-Stastny DZ, Goodman LR et al.：Pinch-Off Syndrome “A Complication of Implantable Subclavian Venous Access Devices”, Radiology, Vol.177, No.2：353～356, 1990.

4）煎本 正博, 片山 仁：リザーバー留置カテーテルの血栓形成についての経験と考察, 第10回関東IVR研究会抄録集：9,1998.

5）坂田 研二, 平井 賢治, 梶原 雅彦 他：Reservoir留置による血管壁の変化, 第10回リザーバー研究会抄録集：4, 1992.

6）小沢 善, 森田 荘二郎, 秦 康博 他：左鎖骨下動脈経由でリザーバー留置後脳梗塞をきたした2症例, IVR, Vol 10 (4)：449-452, 1995

7）山川 真, 高 勝義, 毛受 英次 他：リザーバー留置後、脳梗塞を来した2例, 第8回リザーバー研究会抄録集：13～14, 1991.

8）伊藤 治, 中野 哲, 武田 功 他：リザーバー留置後生じた脳梗塞の2例, 第10回リザーバー研究会抄録集：46, 1992.

9）須永 雅彦, 吉川 正治, 江原 正明 他：動注リザーバー埋め込み後脳梗塞を繰り返した1症例, 第11回リザーバー研究会抄録集：30, 1993.

10）佐古田 勝, 荒井 保明, 松枝 清 他：左鎖骨下動脈経由肝動脈カテーテル留置例における脳血管障害発生についての検討, 第23回リザーバー研究会抄録集：86, 2002

11）柴田 邦隆, 徳永 仰, 今井 康陽 他：肝動注化学療法における脳梗塞合併症例の検討, 癌と化学療法, Vol.28, No.11：1554～1557, 2001.

12）平松 一秀, 齋藤 博哉, 高邑 明夫 他：左鎖骨下動脈経由動注リザーバー留置後の脳梗塞発症例の検討, 第22回リザーバー研究会抄録集：31, 2000.

13）社内資料

14）高安 幸生, 本間 士朗：リザーバー・システム内の完全洗浄には何cc・何回の生食水フラッシュが必要か？, 第18回リザーバー研究会抄録集：44, 1998.

15）小出 昌伸, 松尾 武文：ヘパリン起因性血小板減少症, 日本臨床別冊血液症候群2：307～310, 1998.

16）井上 善文, 藤田 繁雄：HPN実施のコツ：輸液方法、カテーテル, JJPEN., Vol.21, No.8：547～552. 1999.

17）山東 勤弥, 高木 洋治, 吉田 洋 他：在宅静脈栄養児のカテーテル管理, 小児外科, Vol.27, No.4：364～369, 1995.

18）Patterson WP, Ringenberg OS: The Pathophysiology of Thrombosis in Cancer, Seminars in Oncology, Vol.17, No.2：140～146, 1990.

19）Luzzatto G, Schafer AI：The Prethrombotic State in Cancer, Seminars in Oncology, Vol.17, No.2：147～159, 1990.

20）田中 暢彦, 本間 士朗, 川村 明：留置カテーテルの併用禁忌薬剤に関する再評価, 第26回リザーバー研究会抄録集：81, 2003.

21）Lombardi TP, Gundersen B, Zammett LO et al.：Efficacy of 0.9% sodium chloride injection with or without heparin sodium for maintaining patency of intravenous catheter in children, Clinical Pharmacy, vol 17, Nov.：832～836, 1988.

22）Weber DR：Is heparin really necessary in the lock and, if so, how much?, DICP, vol 25：399～405, 1991.

23）Ashton J, Gibson V, Summers S: Effect of heparin versus saline solution on the intermittent infusion device irrigation, Hart & Lung, vol 19, No.6：608～612, 1990.

**[文献請求先]

東レ・メディカル株式会社

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2-4-1

TEL 03（6262）3822

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売業者及び製造業者]

東レ株式会社

〒103-8666 東京都中央区日本橋室町2-1-1

TEL 03（3245）5144

[連絡先]

東レ株式会社

〒103-8666 東京都中央区日本橋室町2-1-1

TEL 03（3245）6372

[販売業者]

東レ・メディカル株式会社

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2-4-1

TEL 03（6262）3822

TORAY

15A