**2018 年 7 月（第 6 版）
*2017 年 11 月（第 5 版）（新記載要領に基づく改訂）

承認番号　21200BZY00573000

医療用品 4　整形用品
管理医療機器　　歯科根管ポスト成形品キット　　70924000

# ユーロポスト

再使用禁止

**【禁忌・禁止】**

＜適用対象（患者）＞

- 本品の材質（ニッケル）に対し、アナフィラキシー症状の既往歴がある患者

＜使用方法＞

- 本品の材質（ニッケル）に対し、アナフィラキシー症状の既往歴がある医療従事者は使用しないこと。
- ユーロポストは、再使用禁止。

## 【形状・構造及び原理等】

［形状・構造］

① ユーロポスト（再使用禁止）　② 専用リーマー（ショート）



［サイズ・種類］

本品には、以下の種類がある。　　（単位：mm）

| 種類名 | | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポストの径 | | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.65 |
| ポストの長さ | S | 6.4 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 |
| | M | 8.4 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 13.0 |
| | L | 10.4 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 |

専用リーマー（全長 28mm）には、ポストの径に対応した 5 種類があり、ハンドル部のラインの本数によって識別することができる（0.9 用：0 本　～　1.7 用：ライン 4 本）。

［体に接触する部分の主な組成］

ユーロポスト：ステンレス鋼（成分表以下のとおり）

| 成分 | % |
|---|---|
| ニッケル | 9 |
| クロム | 18 |
| 鉄 | 70 |
| その他 | 3 |

専用リーマー　　：ステンレス鋼
シリコンストップ　：シリコーン樹脂

［原理］

リーマーで形成した根管内にセメント等を充填し、ユーロポストを挿入し、支台を築造する。

［付属品］**

・ボックスドライバー
・シリコンストップ
・ポスト長ガイドフィルム

## 【使用目的又は効果】

支台築造に用いる。

## 【使用方法等】*/**

［使用方法］

(1) ポスト長ガイドフィルムを X 線写真に対照させ、適切なサイズのユーロポスト（以下「ポスト」という。）を選択する。
(2) ポストの径に対応する専用リーマー（以下「リーマー」という。）を選択する。
(3) リーマーにシリコンストップを付け、ルーラーを使ってリーミングする深さに調整する。（図 1）
(4) 一方方向に根管拡大し、十分な根管壁の厚みを確保する。（図 2）
(5) レンツロ等を用いて、少量のセメント又はコア用レジンを根管内に充填し、ポストのネジ山にも少量のセメント又はコア用レジンを盛りつける。（図 3）
(6) ポストはボックスドライバーを使って根管内へ移送する。

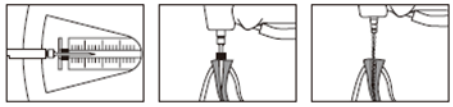


図 1　図 2　図 3

［使用方法等に関連する使用上の注意］

(1) 付属のリーマー以外は使用しないこと。
(2) リーマーは、2,000～5,000rpm の回転速度で使用すること。
(3) ポストを根管内へ挿入する際は、落下・誤飲を防ぐためにドライバーの穴に糸を通すこと。
(4) ポストをドライバーでねじ込まないこと。［ドライバー先端の曲がりの原因となる］
(5) 根管内へのポストの装着は、セメント又はコア用レジンを使用すること。
(6) リーマーの使用回数は、20～40 回が目安である。（40 回まで使用可能ということではない。）使用状況により、数回で使用限界に達したと思われる場合は、廃棄すること。

## 【使用上の注意】

［重要な基本的注意］

(1) リーマーに、損傷、変形（キズ、屈曲）、劣化などがみられた場合は、すぐに使用を中止し、新しいものと交換すること。［作業部が破折し、根管内に破折片が残る可能性があるため］
(2) 本品の使用により、かゆみ、蕁麻疹などのアレルギー性症状が現れた患者及び医療従事者には使用を中止し、医師に相談するなど適切な処置を施すこと。

## 【保守・点検に係る事項】*

［滅菌］（ユーロポスト、専用リーマー）

(1) 使用前に、必ず高圧蒸気滅菌又は乾熱滅菌を行うこと。（シリコンストップも同様に滅菌可）
高圧蒸気滅菌の場合：
推奨滅菌条件（日本薬局方による）：115～118℃ 30 分間
121～124℃ 15 分間
126～129℃ 10 分間
乾熱滅菌の場合：
推奨滅菌条件（日本薬局方による）：160-170℃ 120 分間
170-180℃ 60 分間

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者：株式会社モリタ

電 話 番 号 ： 06-6380-2525
外国製造業者： アントジール　Anthogyr SAS
国　　名　　： フランス

［お問い合わせ先］

問 合 せ 窓 口 ： 株式会社モリタ　お客様相談センター
電 話 番 号 ： 0800-222-8020（無料）
Ｆａｘ 番 号 ： 0800-222-6480（無料）
Ｅ－ｍａｉｌ ： e-customer@morita.com