＊＊2005 年 8 月 4 日改訂(第 3 版)
＊2005 年 2 月 5 日改訂(第 2 版)

医療機器承認番号　21300BZZ00429000

機械器具　４７　注射針及び穿刺針

＊＊管理医療機器　プレフィル式シリンジ用両刃針　70195000

ニプロフラッシュバック両頭針


再使用禁止

【 禁忌・禁止 】

〇再使用禁止

【 形状・構造及び原理等 】

本品は滅菌済みの注射針であり、主に医薬品が充填された注射筒やバイアルに接続して使用する。本品はステンレス製の針管と合成樹脂製の針基、およびそれらを収納するコンテナとコンテナキャップによって構成されている。

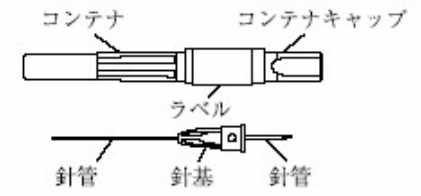

【 使用目的、効能又は効果 】

〇本品は滅菌済みであるので、そのまま直ちに使用できる。
〇本品の主たる使用目的は以下の通りである。
本品は、主に血管、皮下又は機器の混注部に穿刺し、薬液の注入又は少量の血液採取等を目的に使用する滅菌済みの注射針であり、主に医薬品が充填された注射筒やバイアルに接続して使用するものである。

【 操作方法又は使用方法等 】

１．容器の両端を持ち、回転させて開封して下さい。
〈注意〉開封は使用直前に行うこと。
２．キャップを外して、本品を注射薬容器兼注射器の筒先に押し込み連通させて下さい。
〈注意〉針管には直接手を触れないこと。
〈注意〉接続部について十分嵌合したことを確認の上、使用すること。
３．まっすぐ引くようにしてコンテナを外し、穿刺して下さい。
〈注意〉コンテナを外すときは、針先に当たらないように注意すること。
針先が変形する可能性がある。
〈注意〉血管穿刺時には、刃面を確認の上、血管を突き破らないように慎重に行うこと。
４．薬液注入等が終了したら、注意して抜去して下さい。

【使用上の注意 】

重要な基本的注意
〇万一、容器、シール紙が損傷、汚損している場合、又は、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
〇医薬品の添付文書を確認後、使用すること。又、他の医療機器に接続して使用する場合、それぞれの使用方法、使用上の注意に従って使用すること。
〇使用後、リキャップをする必要がある場合には、誤刺に十分注意し、慎重に行うこと。
〇使用後は、感染防止に留意し、安全な方法で処分すること。

【 貯蔵・保管方法及び使用期間等】

１．貯蔵方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿をさけて保管すること。
２．使用の期限
内箱の使用期限欄を参照のこと（自己認証による）。

【 包装 】

＊50 本、100 本／箱

＊＊【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等 】

製造販売（問い合わせ先）
ニプロ株式会社
大阪市北区本庄西３丁目９番３号
電話番号：06-6372-2331（代表）

製造
ニプロ医工株式会社

NIPRO　ニプロ株式会社