医療機器承認番号　21900BZX00275000

**2015年3月23日(第7版)
*2013年9月13日(第6版)

機械器具30　結紮器及び縫合器

管理医療機器　外科手術用血管クランプ　35596000

# バスキュスタットアプロキシメーター

再使用禁止


**【警告】**

- 血管からはずれないようしっかりはさむこと

**【禁忌・禁止】**

- 再使用禁止
- 再滅菌禁止

**【形状、構造及び原理等】***

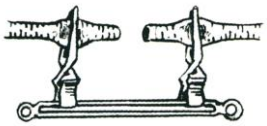

| カタログNo. | 規格 | 圧力（g） |
|---|---|---|
| 1001-507 | 赤 直・小 | 10～15 |
| 1001-508 | 赤 45°・小 | 10～15 |
| 1001-509 | 白 直・中 | 25～30 |
| 1001-510 | 白 45°・中 | 25～30 |
| 1001-511 | 青 直・大 | 50～60 |
| 1001-512 | 青 45°・大 | 50～60 |

- 2個の本体とレールから成る。
- X線不透過

＜原材料＞

- ポリブチレンテレフタレート
- 硫酸バリウム

**【使用目的又は効果】***

血管吻合部の一時的止血を目的とした手術器具をいう。通常、血管クランプには末梢血管クランプ、腸骨クランプ等が含まれる。再使用を除く。

**【使用方法等】**

1. 本品使用の際は、血管の外径に適合するサイズ、把持圧並びに先端形状のクランプをご使用ください。サイズ等が適合しないと血流を完全に遮断できないことがあります。
2. 本品使用の際は、親指と人差し指で挟んで力を加え、ジョー部を開き閉鎖する血管や組織の上に位置させ、指の力を緩めてください。本品のジョー部が閉じ血管等を閉鎖します。
3. 専用のアプライヤー鉗子にて閉鎖する場合は、本品がアプライヤー鉗子より逸脱しないよう十分に注意してください。
4. その後アプロキシメーターバーに沿ってバスキュスタットをやさしく寄せ、吻合部位を近づけ吻合します。
5. 吻合終了後は指もしくは専用のアプライヤー鉗子にて外してください。

**【使用上の注意】****

1.**重要な基本的注意**

- 使用する前に必ず正常に作動するか確認してください。また、本品に傷やひびなどの損傷が無いことを確認し、それらがある場合には使用しないでください。

2.**その他の注意**

- 本品は滅菌包装されており、同一症例に限り使用可能です。使用後は必ず廃棄し再滅菌はしないでください。また未使用であっても一旦開封した製品は破棄してください。
- 本品は、滅菌有効期限内であってもパッケージが破損または開封していた場合、製品の滅菌状態を保証できないので使用しないでください。
- 本品には放射線不透過の材料が用いられていますが、放射線技術や解剖学的性状により検出できないことがありますので注意してください。

**【保管方法及び有効期間等】**

1.**保管方法**

- 高温、多湿、直射日光及び水ぬれを避けて室温で保管してください。
- 包装材料に傷をつけたり、ピンホールを生じさせないでください。
- 本品は改良されることがあるので、先入れ先出しを励行してください。

2. **有効期間**

- 自己認証(当社データ)による使用期限は被包に表示

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】****

製造販売業者：日本エー・シー・ピー株式会社
ＴＥＬ：０４２－４２９－０２００

製造業者：スキャンラン　インターナショナル　インク
Scanlan International, Inc.　(米国)



添付文書管理番号　100-1-S12-07