ご使用に際しては、この説明書を必ずお読み下さい。又、必要な時に読めるように保管しておいて下さい。

MES-CG07-932-02

＊＊２０１４年 ９ 月 ５ 日（改訂第３版）
＊２０１４年 ３ 月 ７ 日（改訂第２版）

製造販売承認番号：22000BZX00712000

類別：機械器具 30 結紮器及び縫合器

高度管理医療機器

一般的名称：脳動静脈奇形手術用クリップ

JMDN:70421020

未滅菌 販売名：杉田ＡＶＭマイクロクリップ

再使用禁止

【警告】
1. 杉田ＡＶＭマイクロクリップの使用や、これに関わる手術に由来する利点と欠点について、それぞれの患者に十分な説明を行うこと。
2. 本品への二次加工禁止
本品表面に衝撃や振動を用いて印を刻み込む等の二次加工はしないこと。［折損の原因となります］
3. 粗雑な取扱いの禁止
本品を変形あるいはキズをつける等の粗雑な取扱いはしないこと。

＊＊【禁忌・禁止】
1. 再使用の禁止
杉田ＡＶＭマイクロクリップは、１回限りの使用に限定とすること。また、一度でもクリップ鉗子にて把持されたり、患者の血液又は組織に触れたりした場合には廃棄すること。［折損の原因・感染の危険］
2. 機能以外の使用禁止
杉田ＡＶＭマイクロクリップは、脳動静脈奇形又は脳腫瘍摘出術において、脳動静脈の血管を一時的に遮断する以外の目的で使用することは禁忌であり永久閉鎖や永久挿入を行うために使用しないこと。
3. クリップの閉鎖力や機械的特性が変化することが無いよう、専用のクリップ鉗子を使用すること。その他の製造業者のクリップ鉗子を使用しないこと。
4. 指で圧縮してクリップを開かないこと。クリップは、適切なクリップ鉗子内に正しく設置した場合にのみ開くこと。
5. 本クリップを曲げたり改造したりしないこと。
6. 他社製インプラント及び材質の異なるインプラントと併用しないこと。［「使用上の注意」３．相互作用の項参照］
7. 金属や異物に対して重篤なアレルギーがある患者に使用禁止。
8. 感染症又は感染症の恐れがある場合使用禁止。
＊＊ 9. 過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌の禁止
本品は過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌には適合しておりません。［表面が褪色し、性状に影響を及ぼします。］

【形状、構造及び原理等】
１．形状、構造



商品コード	07-932-02	07-932-03	07-932-04	07-932-05
ブレード長	2mm	3mm	4mm	5mm

２．材質：
コバルトクロム合金／ASTM F1058G2(ISO5832/7)

３．動作原理
１）スプリング形式：INTEGRAL SINGLE BEND
２）作動機構：ALLIGATOR ACTION

【使用目的、効能又は効果】
本クリップは、脳動静脈奇形又は脳腫瘍摘出術において、脳動静脈の血管遮断を目的に使用するクリップです。

【品目仕様等】
性能
・杉田ＡＶＭマイクロクリップは非強磁性材料（ASTM F1058/ISO 5832-7）で製造されており、ASTM に定義される試験等で、臨床に用いられている 3T（テスラ）以下の MRI（磁気共鳴画像診断装置）で影響なく使用できることが確認されています。
ASTM: American Society for Testing and Materials,
ISO: International Organization for Standardization
・閉鎖力は最終的保証段階で 1.0mm 幅に開いたブレード部全長(L)の遠位端から 1.0mm の位置（図１）で、コンピュータ化された電子ゲージ計測器で測定されます。
測定結果としてニュートン及びグラムでラベルに表示されます。

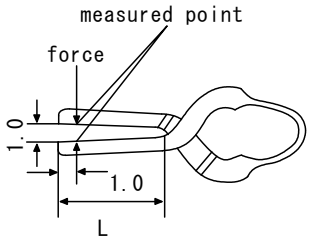


図1

＊＊【操作方法、使用方法等】
使用方法に関する使用上の注意
・使用者は、手術機器の操作方法を熟知し十分なトレーニングを行ったうえで使用して下さい。不正確なクリップの選択及び不正確な手術手技は、重篤な健康被害並びに合併症を引き起こす原因となります。
・杉田ＡＶＭマイクロクリップは、脳動静脈奇形又は脳腫瘍摘出術において、脳動静脈の血管を一時的に遮断する目的で用います。
・杉田ＡＶＭマイクロクリップは専用のクリップ鉗子を使用して一回限り、使用することができます。
＊・**本品は未滅菌品です。**使用に際しては超音波洗浄機（推奨）で洗浄し、適切に機能することが確認された高圧蒸気滅菌器による標準的滅菌条件又は、医療機関で滅菌バリデーションが検証され、有効性が立証された滅菌条件により滅菌を行って下さい。
＊＊ **過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌は行わないで下さい。**
標準的滅菌条件の例：高圧蒸気滅菌（日本薬局方）

滅菌温度	保持時間
115-118℃	３０分
121-124℃	１５分
126-129℃	１０分

・ラベルに記載した閉鎖力は、専用のクリップ鉗子にて初回に把持した場合のみ保証されます。鉗子や指により反復して開閉すると、閉鎖力は低下します。

取扱い説明書を必ずご参照下さい

＊【使用上の注意】

1．使用注意

・神経障害、精神障害、アルコール中毒等、術者の術後指導の徹底が困難な患者。［医師の指導に従えず、術後管理が充分に行えないため、治療が長期化し不具合発現の可能性が高い場合］

・糖尿病などの生活習慣病、慢性リウマチの患者。［合併症等により不具合発現の可能性がある］

・てんかんの患者。［医師の指導に従えず、術後管理が充分に行えないことにより不具合発現の可能性がある場合］

2．重要な基本的注意

1）専用のクリップ鉗子を必ずご使用下さい。他社製のクリップ鉗子は使用しないで下さい。

2）杉田ＡＶＭマイクロクリップは、血管を一時的に遮断する以外の目的では使用しないで下さい。

3）使用する準備ができるまではクリップを開かないで下さい。反復して開く事によりクリップの適正な閉鎖力を損なう危険があります。

4）使用前には注意深く各クリップを点検してご使用下さい。

5）使用前に損傷を発見した場合は、そのクリップを使用しないで下さい。

6）製品の完全性を確保するために、容器はシーリングされています。このシーリングを開けられたものは、返品として受け付けられません。

7）本品の使用前に、必ず取り扱い説明書を参照して下さい。正しい取扱方法に反して使用された場合の責任は、当社は一切負いかねますのでご了承下さい。

3．相互作用

［併用禁忌・禁止］（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状 処置方法	機序 危険因子
クリップサイズに適合しない鉗子	クリップが正しく開閉できない	クリップの破損 クリップの性能低下
他社製クリップ鉗子	クリップが正しく開閉できない	クリップの破損 クリップの性能低下
他の金属製のクリップや他社製クリップ及びクリップ鉗子	腐食による不具合発現の危険性	異種の金属が相互に触れ合うことによる、電気化学的腐食

＊4．不具合・有害事象

本品の使用により、予想される不具合・有害事象（これに限らない）を以下に記します。この様な異常が見られた時は適切な処置を行って下さい。

＊1）重大な有害事象

・クリップ脱離（スリップアウト）
・クリップ鉗子からのクリップの脱出
・クリップの破損
・脳動脈瘤の破裂
・脳血管損傷
・出血
＊・突然死

2）その他の有害事象

・手術創の感染症
・一般的な手術合併症
・磁場にかけたための後発性クリップ脱離
・近隣血管閉塞
・異物反応

5．その他の注意

・使用済みインプラントは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従い適切に廃棄して下さい。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1．貯蔵・保管方法

・本製品は高温、多湿、結露及び直射日光をさけて保管及び輸送して下さい。

【包装】

本品は１個１包装となっており、シーリングされた外箱に入った金属製ケースに内包されています。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

ミズホ株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷３－３０－１３
ＴＥＬ　０３－３８１５－３０９６

製造業者

ミズホ株式会社　五泉工場

取扱い説明書を必ずご参照下さい