【GM-23】
** 2016 年 10 月（第 8 版）（新記載要領に基づく改訂）
＊ 2014 年 4 月（第 7 版）
医療機器承認番号:22000BZX01575000

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
管理医療機器 単回使用マウスピースコネクタ（JMDN コード：44545000）

マウスピース

再使用禁止

【警告】

** 〈使用方法〉
使用前に本品の接続に誤りがないか、使用前及び使用中に各接続部が気密かつ確実であり、漏れや閉塞がないことを確認すること。［適切なエアロゾル投与を行えないおそれがある。］


【禁忌・禁止】

〈使用方法〉
** 1. 再使用禁止


【形状・構造及び原理等】

〈形状〉
本品は未滅菌品である。

ストレートマウスピース（カタログ番号：001200）
接続部：外径 22mm

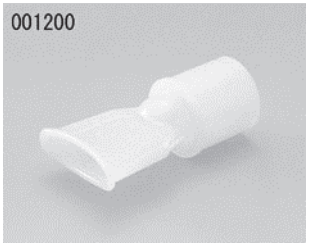

アングルドマウスピース（カタログ番号：004460）
ミニネブライザー（カタログ番号：002220）の専用部品である。

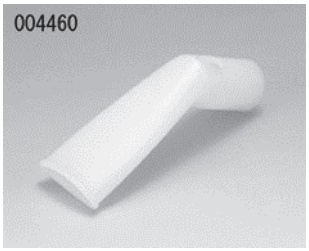

〈組成〉
材質：ポリエチレン
〈作動・動作原理〉
本品を口唇で被覆することにより、呼吸回路と気道との気密性を向上させ、ネブライザーにより発生させたエアロゾルを効率よく気道に導入する。

【使用目的又は効果】

** 〈使用目的〉
単回使用マウスピースコネクタの定義から逸脱しない使用目的、効能又は効果

【使用方法等】

〈使用方法〉
1. 本品をネブライザーのエアロゾル排出口又は排出口に接続した蛇管のもう一方の先端に緩みのないよう確実に接続する。
2. エアロゾル噴出口を口にくわえて使用する。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉
** 1. アングルドマウスピース（カタログ番号：004460）はミニネブライザー（カタログ番号：002220）専用の部品であり、他の器具と接続して使用しないこと。［エアロゾルの漏出など、適切な薬剤投与が行えないおそれがある。］
** 2. 火気のある場所及び発火のおそれのあるものの近くでは酸素を使用しないこと。［火災発生のおそれがある。］

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
** (1) 本品の滅菌は行わないこと。［製品に変形及び破損の発生、有毒ガスが残留するおそれがある。］
** (2) フェノールやエーテルなどの有機溶媒やホルマリン系消毒剤は使用しないこと。［製品の変形及び破損のおそれがある。］

【保管方法及び有効期間等】

** 1. 保管上の注意
水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて室温で保管すること。

＊〈有効期間〉
本品のラベルの使用期限を参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元
日本メディカルネクスト株式会社
** 電話番号：06-6222-6606
＊ 製造元
ゲイルメッド社（台湾）
GaleMed Corporation