2017年 7月改訂（第2版）（新記載要領に基づく改訂）
2013年 7月作成

医療機器認証番号：224AABZX00089000


機械器具 47 注射針及び穿刺針
管理医療機器　画像誘引生検キット　10403000
（軟組織生検キット　16835010）

ニプロＡＰニードル
（シングル・針基ルアーテーパータイプ）

再使用禁止

【禁忌・禁止】
1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】
1. 形状・構造
本品は、超音波断層法監視下で経皮的、又は経膣的に卵子を吸引採取するために用いる採取針である。

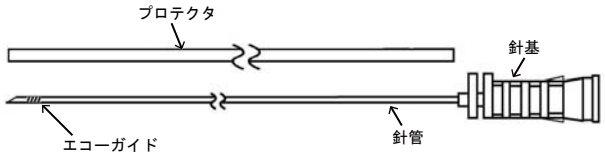

2. 材質
針管：ステンレス鋼
針基：ポリプロピレン

【使用目的又は効果】
検査、治療又は診断のため、人体に穿刺し、組織採取又は薬液等注入をすること。

【使用方法等】
1. 使用方法
1)針基に注射筒等を接続し、吸引が問題なく行えることを確認します。
2)プローブにプローブガイドを装着します。
3)挿入部位を充分に洗浄します。
4)プローブを膣内に挿入します。
5)本品をプローブガイドへ挿入します。
6)超音波診断装置の監視下で目標とする卵胞に本品を慎重に穿刺し、接続された注射筒等により、卵胞液ごと卵子を吸引します。
7)使用後は感染防止に留意し、安全な方法で廃棄します。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞
1. 誤って手指等に針管を刺さないように取扱いには十分注意してください。
2. プロテクタを外すときは、針管の針先に当たらないよう注意してください。［針先が変形し、穿刺しづらくなるおそれがあります。］
3. 超音波断層法監視下での使用において、万一エコーガイドが映らない場合は、新しい製品と交換してください。
4. 針管をリキャップしないでください。［リキャップ自体に誤穿刺のおそれがあり、また、誤って斜めにリキャップすることで、針先がプロテクタを貫通するおそれがあります。］

【使用上の注意】
1. 重要な基本的注意
1)本品は婦人科治療・診断のため卵胞に穿刺し、卵子を採取することに限定して使用すること。それ以外の生検では使用しないこと。
2)使用中は本品の破損、接合部の緩み及び薬液漏れ等について、確認すること。

【保管方法及び有効期間等】
1. 保管方法
水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間
包装の使用期限欄を参照のこと。
有効期間：滅菌後3年（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売（お問い合わせ先）
ニプロ株式会社
電話番号：06-6372-2331（代表）

製造
ニプロ医工株式会社

針先注意
処置後の誤刺注意

NIPRO　ニプロ株式会社