

機械器具 12 理学診療用器具  
高度管理医療機器 白内障・硝子体手術装置 JMDNコード：70652000

## 「コンパクト intuitiv」の付属品

ディスプレイダブルパック (OPO80)

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】


使用方法

- (1) 再使用禁止。
- (2) 再滅菌禁止。

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状


- (1) チューブカセット

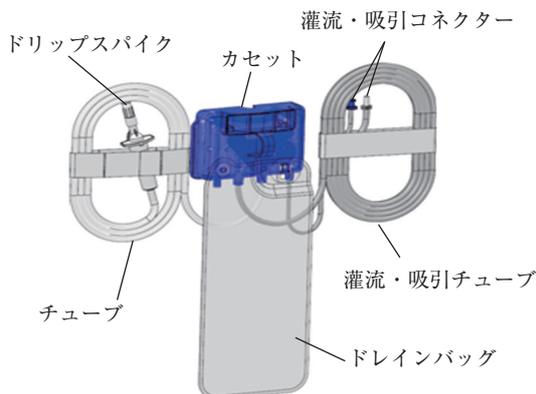

- (2) テストチャンパー



- (3) モニターカバー

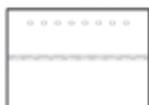

#### 2. 原材料

チューブカセット  
 カセット : ABS樹脂、シリコン、合金  
 ドリップスパイク : ABS樹脂、ポリ塩化ビニル\*  
 灌流・吸引チューブ : ポリ塩化ビニル\*  
 灌流・吸引コネクタ : ABS樹脂  
 チューブ : ポリ塩化ビニル\*  
 ※可塑剤：トリメリット酸トリス (2-エチルヘキシル) を使用

### 【使用目的又は効果】

白内障手術及び/又は硝子体手術に用いる眼内手術用複合機器であり、灌流、吸引、水晶体破碎、硝子体切除、ジアテルミーの機能を備える。

### 【使用方法等】

#### 1. 使用方法

本品は灌流吸引チューブであり、本体に接続し、同装置の操作方法に従い使用する。詳細は本体の取扱説明書を参照すること。

#### 2. 組み合わせて使用する医療機器

本品は組み合わせて使用する機器があるので、詳細は本体の取扱説明書を参照すること。

### 【使用上の注意】

#### 重要な基本的注意

使用中、灌流・吸引チューブの折れ曲がりには注意すること。  
 [灌流不全により前房虚脱のおそれがある] 本体の添付文書も参照すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 1. 保管方法

高温、多湿、直射日光及び水濡れを避け、室温で保管すること。

#### 2. 有効期間

3年 [自己認証による]

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

#### \* 【製造販売業者】

エイエムオー・ジャパン株式会社  
 電話：03-4411-4902

#### 【製造業者】

ジョンソン・エンド・ジョンソン サージカル ビジョン社  
 Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. アメリカ合衆国