機械器具 47 注射針及び穿刺針
一般医療機器　薬液用両刃針　70196000

イージーアクセス®


再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止[単回使用のため]

【形状・構造及び原理等】

本品は、溶解液と各種製剤を混ぜ合わせ、その後シリンジ等で吸入する際に用いられる合成樹脂製の滅菌済み両刃針である。本品は中央部で分離可能な合成樹脂製の本体に、２枚の異物除去フィルタが組み込まれている。

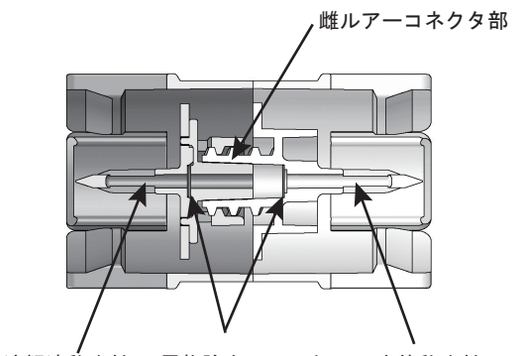

［イージーアクセスの形状・構造］

【使用目的、効能又は効果】

本品の両端が針状の形状であり、ゴム栓等で密封された複数の薬液を混合する際に使用するものをいう。本品は単回使用である。

【品目仕様等】

１．漏れ
針部を密封し150kPaの圧力を15秒間与えたとき漏れがないこと。

【操作方法又は使用方法等】

１．本品の包装を開封後、ケースから製品を取り出さず、溶解液瓶のゴム栓中央部に溶解液移注針（青色）をまっすぐ根元まで刺通します。
２．本品からケースのみを取り外します。
３．溶解液瓶ごと本品を逆さまにして、薬液瓶のゴム栓中央部に本体移注針（無色）をまっすぐ根元まで刺通します。
４．溶解液が薬液瓶内に全量移注したことを確認し、本品を中央部で指示方向に捻って分離します。
５．本体移注針（無色）の雌ルアーコネクタ部に注射筒をまっすぐ装着します。
６．注射筒と薬液瓶を反転させ、注射筒内に薬液を全量吸入します。
７．注射筒内に薬液が全量吸入されたことを確認し、注射筒を本品から取り外します。
８．使用後は安全な方法で廃棄します。

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

○本品の移注針部には直接手を触れないように注意してください。
○接続部への薬液等の付着に注意してください。
○移注針部をバイアルのゴム栓に刺通する場合は、刺通面に垂直に刺し、横方向に力を加えたり、同一部位に穿刺することが無いよう注意してください。
○接続部からの液漏れ等の異常が認められた場合は使用しないでください。
○本体移注針と溶解液移注針を分離する際は、薬液が飛散しないよう注意してください。
○本体移注針と溶解液移注針を分離する際は、指示方向と逆に捻らないよう注意してください。
［製品が破損するおそれがある。］

【使用上の注意】

重要な基本的注意

○使用は１回限りとし、使用後は直ちに廃棄すること。
○併用する医薬品及び医療機器の添付文書を確認し、それぞれの使用方法、使用上の注意に従って使用すること。
○包装を開けたらすぐ使用し、使用後は直ちに安全な方法で廃棄すること。
○包装が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
○本品は合成樹脂製品のため、低温時の取扱には注意すること。［製品が破損するおそれがある。］
○本品の使用は、医師、技師などの専門知識を持った医療関係者による指導を受けた者が行うこと。

【貯蔵･保管方法及び使用期間等】

１．貯蔵･保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

２．有効期間・使用の期限

包装の使用期限を参照のこと。［自己認証による］

【包装】

１個入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売（お問い合わせ先）
ニプロ株式会社
住所　　：大阪府大阪市北区本庄西３丁目９番３号
電話番号：06-6375-6709（医療推進部）

製造
ニプロ医工株式会社

NIPRO　ニプロ株式会社