
機械器具 51　医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器　ガイドワイヤ挿入コネクタ　JMDN コード :70286000

メディキット インサーター


再使用禁止

【禁忌・禁止】
・再使用禁止
・再滅菌禁止


【形状・構造及び原理等】
キャセーター型
＜形状図＞　(代表図)

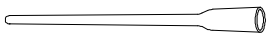


標準型
＜形状図＞　(代表図)

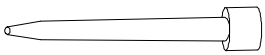

マイクロ型
＜形状図＞

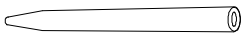

ピールオフ型
＜形状図＞

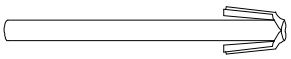

＜原理＞
ガイドワイヤを本品の内腔を通じてカテーテル等のコネクタ部へ導くものである。

【使用目的、効能又は効果】
ガイドワイヤを体内に挿入する手技において、カテーテル等のコネクタ部からのガイドワイヤの挿入を補助する。

【品目仕様等】
(1)外観
規格：①インサーターに折れ、凸凹及び傷、毛羽、異物の付着がないこと。
②包装材料に傷、破れ、汚れ、しわ、異物の付着がないこと。
(2)無菌性保証水準 (SAL) : 10^{-6}

【操作方法又は使用方法等】
キャセーター型 / 標準型 / マイクロ型
1. ガイドワイヤの尾端部を本品の先端から挿入する。
2. 本品をガイドワイヤ先端まで進め、ガイドワイヤ先端部を本品内に納める。

[注意]
・形状付きガイドワイヤの場合、インサーターでガイドワイヤ先端をまっすぐにするときは、ゆっくりと伸ばすこと。(ガイドワイヤの先端形状の変化、キンクにつながる恐れがある)

3. その状態のまま、本品先端をカテーテル等のコネクタ部に挿入する。
4. ガイドワイヤを押し進め、インサーターを引き抜き取り外す。

ピールオフ型
1. ガイドワイヤの尾端部を本品の先端から挿入する。
2. 本品をガイドワイヤ先端まで進め、ガイドワイヤ先端部を本品内に納める。

[注意]
・形状付きガイドワイヤの場合、インサーターでガイドワイヤ先端をまっすぐにするときは、ゆっくりと伸ばすこと。(ガイドワイヤの先端形状の変化、キンクにつながる恐れがある)

3. その状態のまま、本品先端をカテーテル等のコネクタ部に挿入する。
4. ガイドワイヤを押し進め、インサーターを左右に引き裂き取り外す。

【使用方法に関する使用上の注意】
ガイドワイヤの挿入を補助する目的以外に使用しないこと。

【使用上の注意】
[重要な基本的注意]
1. 包装が水濡れ、開封、汚損している場合や、製品に破損などの異常が認められる場合には使用しないこと。
2. 包装開封時に製品を確認し、製品に異常が認められる場合は使用しないこと。
3. 包装の開封は、使用直前に行うこと。開封したらすぐに使用し、使用後は安全な方法で処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】
[貯蔵・保管方法]
水濡れに注意し、紫外線 (直射日光・UV 殺菌灯など) や高温多湿を避けて保管すること。
[有効期間・使用の期限]
包装の使用期限を参照。(自己認証による)

【包装】
1～50 個入／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】
製造販売業者：東郷メディキット株式会社
住所：〒883-0062 宮崎県日向市大字日知屋字亀川 17148-6
電話番号：0982-53-8000

製造業者：東郷メディキット株式会社
住所：〒113-0034　東京都文京区湯島 1 丁目 13 番 2 号

販売業者：メディキット株式会社
住所：〒113-0034　東京都文京区湯島 1 丁目 13 番 2 号
電話番号：03-3839-0201