※2020年8月1日改訂（第4版）
2017年3月13日改訂（第3版）

医療機器認証番号：15400BZZ00586000


機械器具 47　注射針及び穿刺針
管理医療機器　単回使用手動式ランセット 37466000

フタバ採血針


再使用禁止

【警告】
・使用目的に応じて、適切な製品形式を選択すること。

【形状・構造及び原理等】
1. 形状・構造
（ＦＬ－１型）耳朶用

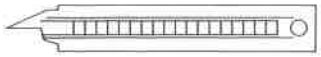


（ＦＬ－３型）新生児・足裏用

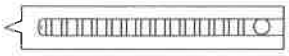


（ＦＬ－５型）小児用



（ＦＬ－７型）耳朶用

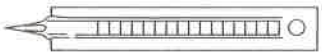

（ＦＬ－１０型）耳朶用

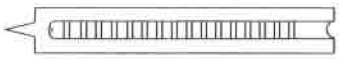

2. 原材料
ステンレス鋼

【使用目的又は効果】※
血液型判定やフェニールケトン症検査やその他の検査の為に耳朶や指頭、新生児足裏から穿刺して極少量の血液を採取、又は嚢や節から排膿するために使用する採血針（Blood Lancet）である。
本品は、ガンマ線滅菌（放射線照射滅菌）により滅菌し、１個ごとに無菌包装されており、１回使い捨て製品であり再使用しない。（ディスポーザブル製品）。

【使用方法等】※
(1)　半透明ポリエチレン袋の個包装から採血針（ランセット）を取り出すときは製品の尾部のほうから取り出す。

(2)　ランセットの中央部分にあるギザギザ部分を親指と人差し指で挟むようにして持ち、刃を採血部位に刺す。

【使用上の注意】
1. 重要な基本的注意
(1)　耳朶等の、組織の薄い部分に使用する場合は、穿刺する力に充分注意し、貫通させないようにすること。【組織を貫通した先端で、誤って使用者の指を穿刺した場合、血液を介した感染の恐れがある。】
(2)　個包装から取り出すときに、刃の先端部分から製品を取り出さないこと。
(3)　本品は滅菌済み（ガンマ線）であるので、個包装を開封したら、直ちに使用すること。
2. その他の注意
(1)　追加工は行わないこと。
(2)　本品を再滅菌しないこと。

【保管方法及び有効期間等】
水濡れ、直射日光および高温多湿を避けて保管すること。
使用期限は、包装に記載（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
（製造販売業者）添付文書請求先
株式会社フタバ
東京都文京区本郷３－３７－１４
電話番号：03-3813-9311

（製造業者）
株式会社フタバ