**2026 年 9 月 第 5 版
*2022 年 9 月 第 4 版

届出番号:13B1X00209000109

機械器具(02) 医療用照明器
一般的名称:一般外科・形成外科用鏡 JMDNコード:32261000
一 般 医 療 機 器


シグマ医療用鏡

**

【禁忌・禁止】
1. 本品は未滅菌のため、使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと。
2. 製品本来の使用目的と違う用途での使用はしないこと。
3. 本品の加工、改造等は絶対に行わないこと。

【形状、構造及び原理等】
1. 材料
ステンレス鋼

2. 形状、構造
1)スチールミラー

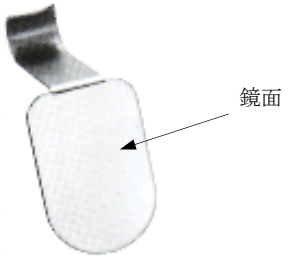

3. 原理
手術時に物体の虚像を表示させたい個所に本品を近づけることにより、鏡面に物体の虚像が表示される。

【使用目的又は効果】
1. 本品の前に置いた物体の虚像を表示する器具で、一般外科・形成外科手術時に医師を支援するために用いる。

【使用方法等】
1. 本品を表示させたい対象物の前に置くことにより、本品の鏡面に虚像が表示される。
2. 使用前に洗浄し、オートクレーブ(121℃20分)又はエチレンオキサイドガスにて滅菌を行う。

【使用上の注意】
1. 鏡面を損傷したり、硬いものに接触させたりして変形や損傷が生じると、器具・器械の寿命を著しく低下させる。
2. 本品を使用するにあたっては、器具と技術に対する適切な理解が必要である。手技に習熟した者以外は使用しないこと。
3. 包装から取り出し洗浄・滅菌を行うこと。洗浄の際、目の粗い磨き粉や、金属ウールで本品の鏡面を磨かないこと。

【保管方法及び有効期間等】
1. 本品を保管する際は、高温・高湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。
2. 水濡れや直射日光は絶対に避けること。

【保守・点検に係る事項】
1. 本品を安全に、より長い間ご使用頂くために、始業・終業・定期点検等は、必ず行うこと。
2. 錆を防ぐ為に以下の事を守ること。
   ① 使用後は速やかに洗浄を行うこと。
   ② 洗浄後に汚れが残った状態での滅菌、消毒はしないこと。
   ③ 洗浄や滅菌に使用する水は、蒸留水か脱塩した水を使用すること。
   ④ 酸やアルカリの強い洗剤の使用は避けること。(中性の洗剤を使用すること)
   ⑤ 超音波洗浄の際には洗浄器メーカー指定の適正な洗剤を使用すること。(家庭用洗剤は使用しないこと)
   ⑥ 洗浄後、湿った状態での放置はしないこと。

**

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者 株式会社 秋山製作所
〒113-0033 東京都文京区本郷 3-31-4
TEL 03-3811-0802 FAX 03-3811-6657

【販売業者及びお問い合わせ先】

株式会社 秋山製作所 シグマ事業部
〒113-0033 東京都文京区本郷 3-31-1 盛和ビル
TEL 03-3815-8275 FAX 03-3815-8699