Teleflex®

2021 年 4 月作成（第 1 版）

届出番号：13B1X00178000019

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器　カテーテル用滅菌スリーブ（70331000）

カテガード

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止、再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】
＜形状、構造等＞
本品は、カテガードのディスタルハブをシースイントロデューサの止血弁に、プロキシマルハブを挿入カテーテル本体に固定することにより、挿入カテーテルを清潔に保つ。カテガードには、ワンタッチでプロキシマルハブをカテーテルに固定できるタイプ（ツイストロックカテガード、図 1）がある。

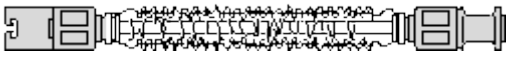


図 1　ツイストロックカテガード

【使用目的又は効果】
シースイントロデューサに取り付け、外部の環境からカテーテルの汚染を防止し、無菌操作を行いやすくするために使用する。

【使用方法等】
1. 使用方法
（1）カテガードをフィードチューブから外さずパッケージから取り出す。
（2）両端のアダプタが開放されていることを確認する。
（3）留置するカテーテル先端をカテガードのプロキシマル端から挿入する。カテガード内のフィードチューブ（インナーチューブ）を介して、カテーテルをカテガードのディスタル端まで押し進める。
（4）カテガード全体をカテーテルのプロキシマル側へスライドさせる。
（5）適切な位置にカテーテルを保持したまま、カテガードのアダプタをフィードチューブから外しカテガードのプロキシマルハブを保持したまま、カテガードのディスタル端アダプタをシースイントロデューサやカテーテルの止血弁側に引き伸ばし、シースイントロデューサやカテーテルに固定する（固定方法は 2. アダプタの開閉とカテーテル固定参照）。
（6）カテーテルのディスタル側をカテガード上から掴み、カテガードのプロキシマルハブを適切な位置まで移動する。カテガードのプロキシマル端アダプタを固定する。
（7）カテーテルが確実に固定されているか、カテーテルをゆっくりと引張り確認する。

2. アダプタの開閉とカテーテル固定
（1）ディスタル用（ダブルツイストロックアダプタ）
図 2 のように「〇」印方向にねじるとカテーテル固定は解除される。「｜」印方向にねじるとカテーテルは固定される。
アダプタをシースイントロデューサに固定する場合は、シースイントロデューサの固定ピンに鉤溝をはめ込み（図 2）、捻って固定する。

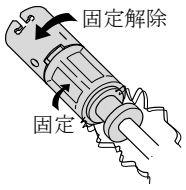


図 2

（2）プロキシマル用（ツイストロックアダプタ）
図 2 のように「〇」印方向にねじるとカテーテル固定は解除される。「｜」印方向にねじるとカテーテルは固定される。

【保管方法及び有効期間等】
保管方法：
水濡れ、高温、多湿、直射日光を避け、常温で保管。
有効期間：
包装上に記載。（自己認証データによる。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者
テレフレックスメディカルジャパン株式会社
カスタマーサービス　Tel：0570-055-160