Teleflex™
Empowering the future of healthcare

** 2026 年 6 月改訂（第 5 版）
＊2018 年 3 月改訂（第 4 版）
届出番号：13B1X00178000041

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器　喉頭・気管用麻酔薬噴霧キット（70251000）

＊ Atomization マジック(喉頭気管粘膜用)

再使用禁止


【禁忌・禁止】
1. 再使用禁止
2. 本品の滅菌は行わないこと。

【形状・構造及び原理等】

**＜形状、構造等＞

本品は、シリンジとアトマイザーから構成され、薬液をシリンジに充填しプランジャを押すことでカニューレの先端からミスト状の薬液が 14～70 ミクロンの微粒子で噴霧される。

＊＜各部の名称＞

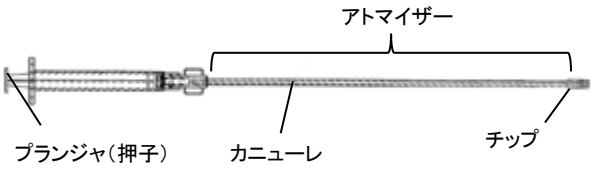

成人用と小児用がある。また、シリンジ付きと無しがある。シリンジの容量は成人用が 3mL、小児用が 5mL である。

品番	製品名
MAD600	マジック 3mL シリンジ
MAD700	マジック 単体
MAD720	マジック 小児用　単体

＊＜材質＞
カニューレ：ポリ塩化ビニル
チップ：ポリカーボネート

【使用目的又は効果】
本品は薬液を、カニューレを通して患者の咽頭部、喉頭部または気管部に局所的に噴霧する器具である。

【使用方法等】
1. シリンジに麻酔薬等の薬液を満たし、シリンジ内の気泡を取り除く。
2. 薬液を満たしたシリンジをアトマイザーと接続する。
3. 試験噴霧を行いカニューレから気泡を取り除き、カニューレを口腔咽頭に合わせ曲げる。
4. カニューレを口腔咽頭内に挿入する。
5. プランジャを押し、口腔咽頭内に薬液を噴霧する。

<使用方法等に関連する使用上の注意>
1. カニューレ及びチップを気管内に挿入しないこと。[気道粘膜の刺激につながる。]
2. シリンジとアトマイザーを確実に接続すること。また、使用直前に緩みがないことを確認すること。

【使用上の注意】

1. 不具合・有害事象

（1） その他の不具合
挿入過多

（2） その他の有害事象
出血

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：
水濡れ、高温、多湿、直射日光を避け、常温で保管。

有効期間：
包装上に記載（自己認証データによる。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
テレフレックスメディカルジャパン株式会社
カスタマーサービス　Tel：0570-055-160