2024年8月 改訂（第2版　製造販売業者住所変更）
2024年3月(作成）
製造販売届出番号:13B3X00138000076

医04　整形用品
一般医療機器　熱傷用ラップ　36093000

NARバーンドレッシング

再使用禁止

禁忌・禁止

再使用禁止

【形状･構造及び原理等】

･布地を厚さ約3.5mmのハイドロゲルで挟んでいる。

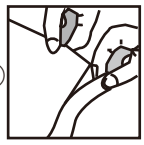
製品名	5x5	6x12	10x10	12x12
製品番号	NAR3114	NAR3115	NAR3110	NAR3116
サイズ	5x5cm	6x12cm	10x10cm	12x12cm
製品名	12x24	20x20	22x28	10x40
製品番号	NAR3117	NAR3118	NAR3119	NAR3111
サイズ	12x24cm	20x20cm	22x28cm	10x40cm
製品名	20x40	40x60		
製品番号	NAR3112	NAR3120		
サイズ	20x40cm	40x60cm		
製品名	フェイス 25x25	フェイス 30x40	フェイス 40x60	
製品番号	NAR3121	NAR3113	NAR3122	
サイズ	25x25cm	30x40cm	40x60cm	

･水分を含むハイドロゲルに､熱傷部の熱が伝達されることにより熱傷を冷却する。

【使用目的又は効果】

- 熱傷部位を冷やし､湿潤を保ち､熱傷の進行を止め､外傷を最小限にし､汚染を防止するために用いる。

【使用方法】


①

熱傷のサイズに応じたバーンドレッシングを選ぶ。(TBSA マークに成人 / 子供別に適用範囲%が表示されている。)
パウチを開封し、バーンドレッシングを取り出す。


②

布地を持ち、バーンドレッシングをケースから取り出す。


③

患部をバーンドレッシングで被覆し、上部のプラスチックシートを剥がす。


④

包帯か柔軟性のあるネットでバーンドレッシングをしっかり固定する。


⑤

バーンドレッシング適用後は出来るだけ早く、専門医の診察をうけること。
ドレッシングは 24 時間ごとに取り換えること。

【使用上の注意】

- 化学物質による熱傷の際は、使用前に該当の化学物質を予め 除去することが 望ましい。
- 水反応性化学物質には適用しないこと。
- 通電している電気機器に接触している傷病者には適用しないこと。
- パウチが開いていたり、損傷していたら、使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 直射日光及び高温多湿を避け室温にて保管
- 有効期限:パウチパックに表示

【主要文献及び文献請求先】

請求先:　アコードインターナショナル株式会社

【製造販売業者の名称及び住所】

製造販売業者:アコードインターナショナル株式会社
〒170-0002　東京都豊島区巣鴨1-14-5 3F
TEL: 03-5810-1735　FAX: 03-5810-1736
製造業者:ノースアメリカンレスキュー社
North American Rescue, LLC
（アメリカ･サウスカロライナ州）