

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材（70757000）

再使用禁止

カムログ マルチユニット技工用器材


【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる
歯科技工用の器具・材料である。本品は単回使用である。

- 形状・構造
マルチユニットアバットメント プラスチックコーピング

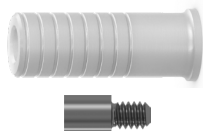

商品コード

PXMUPC

- 原材料
ポリオキシメチレン
チタン合金（付属スクリュー）

【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技
工用の器具・材料である。

【使用方法等】

- 使用方法
 - 模型上のラボアナログ（※）にプラスチックコーピングを付
属スクリューで固定する。
 - 通法どおりワックスアップして補綴物を作製する。

※併用医療機器

販売名	届出番号
マルチユニット 補綴用器具	27B1X00027000173

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

折損、変形などの原因になるため必要以上の力を加えないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 株式会社アルタデント
大阪府大阪市北区芝田 2-8-31
電話 06-6377-2221

製造業者： BioHorizons Implant Systems Inc.（バイオ
ホライズンズ インプラントシステムズ）
アメリカ