

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 救急絆創膏 34864000
セレクトバンフィット


再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止
再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

〈形状〉

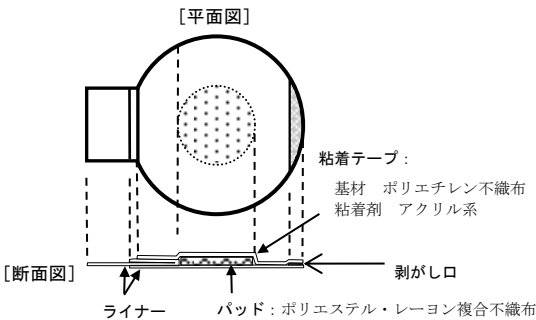

品番	寸法	
	粘着テープ部	パッド部
No. 36	直径 36mm	直径 16mm

〈構造〉

本品は、接着剤を塗布した布製の絆創膏材にパッドを付したものである。

【使用目的又は効果】

傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

【使用方法等】

滅菌袋から本品を取り出し、創部にパッドを当て、周囲のテープで固定する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ・本品使用中に皮膚障害（発疹・発赤・かゆみ等）が生じた場合には、直ちに使用を中止し、適切な治療を行うこと。
- ・本品使用中に創傷部位に感染が起きた場合には、使用を中止し、適切な治療を行うこと。
- ・本品使用中に、濡れたり汚れたりした場合や、血液や滲出液等のにじみが見られた場合、直ちに新しいものと貼り替えること。

2. その他の注意

- ・本品を剥がす際は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくり剥がすこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ・高温・多湿、直射日光及び紫外線の当たる場所を避けて室温にて保管すること。
- ・水濡れに注意。

2. 有効期間

- ・外箱に表示〔自己認証による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売元〉

株式会社アグリス
〒834-0055 福岡県八女市鵜池 477-1
TEL 0943-30-1177