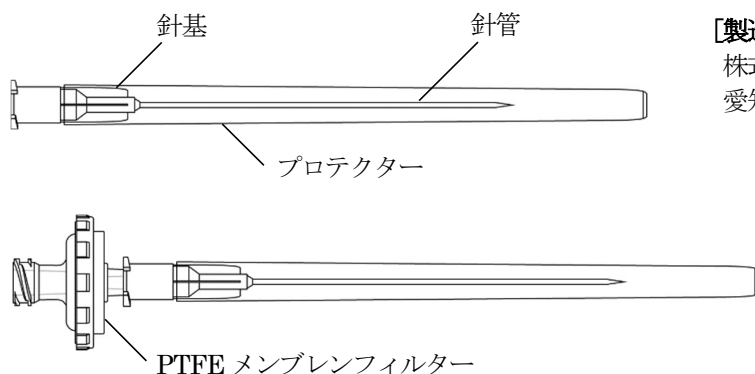


再使用禁止

薬液調整デバイス

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状、構造及び原理等】**【構成図】****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】****【製造販売業者】**

アルゴキュアシステム株式会社

〒473-0924 愛知県豊田市花園町屋敷 198 番地 2

TEL0565-51-0533 FAX0565-51-0528

ホームページ <http://www.argocs.co.jp/>**【製造業者】**

株式会社長谷川綿行 師勝工場

愛知県北名古屋市二子四反地 9 7 7 - 2

【使用目的又は効果】

- ・ 本品は、薬液を容器から他の薬液容器に移す、あるいは混和するために使用する。

【使用方法】

- ・ 本品を包装から取出し、針を容器のゴム栓に穿刺した上、使用する。

【使用上の注意】**【重要な基本的注意】**

- ・ 本品を再使用しないこと。（単回使用の使い捨て製品）
- ・ 開封後に本品の状態をよく点検し、破損や汚れなどが認められたものは使用しないこと。

【その他の注意】

- ・ 針の針管部には直接手を触れないこと。
- ・ 針を容器のゴム栓に穿刺するとき、なるべく穿刺面に対して垂直に刺し、同一箇所を複数回穿刺しないこと。
- ・ 高熱を発する医療機器、火気などに接触させないこと。

【保管方法及び有効期間等】**【保管方法】**

- ・ 水ぬれに注意して保管すること。
- ・ 高温、多湿、直射日光を避け、室内で保管すること。
- ・ 化学薬品の保管場所やガスが発生する場所を避けて保管すること。

【有効期間等】

- ・ 製品ラベル及び箱の使用期限欄を参照すること。〔自己認証（自社データ）による〕