



【D-01-R4】

**2017年8月（第4版）

*2015年6月（第3版 新記載要領に基づく改訂）

承認番号: 21300BZY00403000

機械器具 25 医療用鏡
管理医療機器 人工開口向け単回使用内視鏡用拡張器（JMDNコード：38821002）

アースロスコーピーキャニューレ

再使用禁止


【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】


＜形状＞

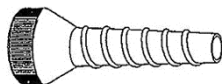


AR-1802D



AR-6565

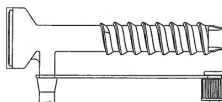

AR-6530、AR-6530N、AR-6535、
AR-6540、AR-6545、AR-6564、AR-6566

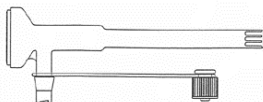

AR-6532、AR-6550、AR-6551L、
AR-6560、AR-6562

＜組成＞

ポリカーボネート、ポリプロピレン、低密度ポリエチレン

＜作動・動作原理＞

作製したポータルに本品を留置することで、器具の出し入れ等を容易にする。

*【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

本品は、関節鏡下の手術の際に、関節内に一時的に留置し洗浄液を注入排出したり、視野を確保して他の術具を挿入するために使用されるキャニューレである。

*【使用方法等】

＜使用方法＞

1. 使用方法

- 1) 専用のオブチュレーターを使用しポータルへ挿入、留置する。
- 2) 必要に応じ、キャニューレのサイドポートより洗浄液の注入や排出を行う。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- **1) 使用後は直ちに破損等がないことを確認すること。破損等が確認された場合は、破損片が体内に遺残していないか確認し、遺残している場合は摘出等の適切な処置を行うこと。

2. 不具合・有害事象

- 1) 重大な不具合

・製品の破損

- 2) 重大な有害事象

**・アレルギー反応・異物反応

**・感染症

**・軟骨・軟部組織損傷

・体内遺残

*【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

1. 包装にきずや破れが生じないように、取り扱い及び保管に注意すること。
2. 本品は高温多湿や直射日光を避け、水濡れに注意し、清潔な場所に保管すること。

**＜有効期間＞

ラベルまたは包装に表示

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：Arthrex Japan 合同会社

電話：03-4578-1000

製造元：アースレックス社（アメリカ合衆国）

Arthrex, Inc.

