** 2017 年 6 月 改訂（第 4 版）（新記載要領に基づく改訂）
＊ 2005 年 12 月 改訂（第 3 版）
医療機器承認番号 ： 14800BZZ00520000


機械器具 47 注射針及び穿刺針
管理医療機器 単回使用フィルタ付針 16266002

# ファインフィルターＦ針

再使用禁止

**【禁忌・禁止】**
・再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】**
＜本品の基本構成＞

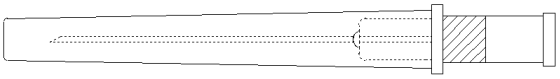

＊ 静脈針サイズ ： 20G

| **型式 | 異物除去率 | |
|---|---|---|
| F162-20G(L) | 10μm以上 | 99% |

**【使用目的又は効果】**
・異物濾過を目的として使用する。
・本品は滅菌済みであるので、そのまま直ちに使用できる。

**【使用方法等】**
1. 汚染に十分注意し、包装から取り出す。
2. 輸液セットのタコ管又は、濾過する薬液等の入った注射器の先端ルアー部等に本品を接続する。
3. 本品のキャップをはずし、注射針を接続する。
4. 注射針が上を向くように垂直に持ち、2～3 滴液が出るまで操作し、フィルター内の空気を徐々に追い出してから使用する。

[使用方法に関連する使用上の注意]
・すべての操作は、無菌的に行うこと。
・粘度の高い薬液や血液、血液製剤等には、使用しないこと。

**【使用上の注意】**
[重要な基本的注意]
・包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意すること。

**【保管方法及び有効期間等】**
[保管方法]
水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

**[使用期限]
箱の使用期限欄を参照のこと。[自己認証による]

*【製造販売業者及び製造業者の名称又は名称等】
[製造販売元]
フォルテ グロウ メディカル株式会社
電話番号：0283-22-2801