2017年11月改訂（第5版　新記載要領に基づく改訂）　　製造販売届出番号：13B1X00048001229
＊2013年 4月改訂（第4版）

再使用禁止

機械器具　42　医療用剥離子

一般医療機器　眼ブラシ　（ＪＭＤＮ：34880000）

販売名：RB-700 岡田氏網膜ﾌﾞﾗｼ　ﾋﾞｯﾄｽｳｨｰﾊﾟｰ

【警告】

替えブラシは、単回使用のため、再滅菌、再使用は絶対にしないこと。


【禁忌・禁止】

1. 本品の二次加工(改造・調整等)は絶対にしないこと[折損及び本来機能を損なう原因となるため]。
2. ブラシ部分を掴んで引き抜いたりしないこと[変形及び本来機能を損なう原因となるため]。
3. 替えブラシは、再使用禁止。

＊【形状、構造及び原理等】

先端のブラシ部は、9-0の糸を二つ折りに束ね、ステンレスの棒に取り付けたもので、ハンドル先端の筒状部分に挿入し使用する。ハンドル部のツマミをスライドさせることでブラシが筒の中に入りブラシの長さ(強度)を調節することが出来る。

外観写真

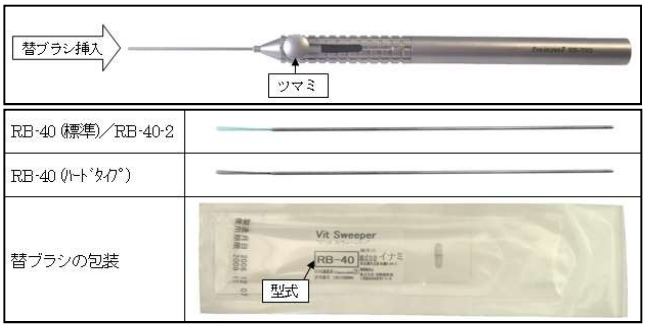

形状及び寸法

ｻｲｽﾞ	型式	商品名	構成品	ハンドル部	ﾌﾞﾗｼ挿入部
20G	RB-700	岡田氏網膜ﾌﾞﾗｼ　ﾋﾞｯﾄｽｳｨｰﾊﾟｰ	ハンドル：RB-700H 替ブラシ：RB-40	108 mm	32 mm
23G	RB-700-23N	岡田氏網膜ﾌﾞﾗｼ　ﾋﾞｯﾄｽｳｨｰﾊﾟｰ 23G ｽﾗｲﾄﾞﾀｲﾌﾟ	ハンドル：RB-700H-23N 替ブラシ：RB-40-2	108 mm	32 mm
25G	RB-700-25N	岡田氏網膜ﾌﾞﾗｼ　ﾋﾞｯﾄｽｳｨｰﾊﾟｰ 25G ｽﾗｲﾄﾞﾀｲﾌﾟ	ハンドル：RB-700H-25N 替ブラシ：RB-40-2	108 mm	32 mm

〔替ブラシ仕様〕

適用替ブラシ	型式	色	9-0糸の使用本数	全長	ﾌﾞﾗｼの長さ
RB-700専用替ブラシ	RB-40（標準）	青	40本 (20本の二つ折り)	95 mm	15 mm
	RB-40（ﾊｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ）	黒			
RB-700-23N／RB-700-25N共通替ブラシ	RB-40-2	青	16本 (8本の二つ折り)	95 mm	15 mm

ハンドル部：ステンレス鋼(SUS303)
替ブラシ：(RB-40)ナイロン製 9-0糸　(RB-40-2)ナイロン製 9-0糸

【使用目的又は効果】

眼科手術の際、網膜・硝子体などの組織を先端部で掃くようにして表面の皮膜などを除去する。

【使用方法等】

ハンドル先端の筒状部分にブラシを挿入・固定後、ツマミをスライドさせ、ブラシの長さ(強さ)を調節し、網膜・硝子体等の組織表面の皮膜等をブラシで掃くようにして除去する。
ハンドル部滅菌方法：高圧蒸気滅菌

【使用上の注意】

1. 包装・製品に破損や異常が認められる場合は使用しないこと。
2. 開封後はすぐに使用すること。開封し、使用しなかったものは廃棄すること。
3. 既定の使用目的以外に使用しないこと。
4. 使用後は医療廃棄物として適切な処理を行うこと。
5. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと。
6. 電気メスを用いた接触凝固は、術者が感電、火傷をする危険性があり、また、器具の表面を損傷するので併用しないこと。
7. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因になるので、出来るだけ使用を避けること。使用中に付着したときには水洗いすること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 高温・多湿・直射日光を避けて保管すること。
2. 使用期限を過ぎたものは廃棄すること（使用期限：滅菌年月日より３年とする)。

【保守・点検に係る事項】

1. 変えブラシが未開封であることを確認すること。開封し、使用しなかったものは廃棄すること。
2. 包装・製品に破損や異常がないことを確認すること。
3. 使用前に埃、異物等が付着していないことを確認すること。
4. （ハンドル部のみ）強アルカリ／強酸性/塩素系/ヨウ素系の洗浄剤・消毒剤は、器具を腐食させるおそれがあるので使用を避けること。
5. （ハンドル部のみ）金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、器具の表面が損傷するので汚物除去及び洗浄時の使用はしないこと。
6. （ハンドル部のみ）使用後は、出来るだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、職業感染防止のために洗浄・消毒すること。
7. 眼ブラシ(替えブラシ)の使用期限を確認すること。
8. （ハンドル部のみ）点検後、セット・包装をし、高圧蒸気滅菌をすること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者　株式会社イナミ
〒113-0033　東京都文京区本郷三丁目24番2号
TEL　03-3814-1731　/　FAX　03-3814-3334

製 造 業 者　株式会社イナミ　美女木研究所
株式会社　河野製作所