

再使用禁止

トランスファー

【禁忌・禁止】
再使用禁止。

**【形状・構造及び原理等】

**1.形状

8537-02 3037-02 3047-02 3057-02 3065-02 9037-02 9047-02



1000-63 1000-62 1000-68 1000-84 1000-83



8530-05 8035-05 8045-05 8057-05




8730-05 8735-05 8745-05 8757-05



8735-05N 8745-05N 8757-05N



8530-08 8035-08 8045-08 8057-08

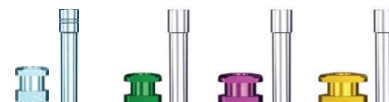


8730-08 8735-08 8745-08 8757-08



8735-08N 8745-08N 8757-08N



8730-08NE 8735-08NE 8745-08NE 8757-08NE

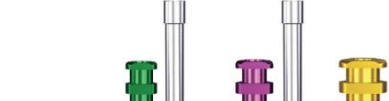


8730-08NE 8735-08NE 8745-08NE 8757-08NE



8730-08NE 8735-08NE 8745-08NE 8757-08NE



8730-08NE 8735-08NE 8745-08NE 8757-08NE

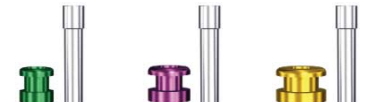


8730-08NE 8735-08NE 8745-08NE 8757-08NE



1000-15 1000-14 1000-06 1000-10 1000-41 1000-26



1000-10XL 1000-26XL

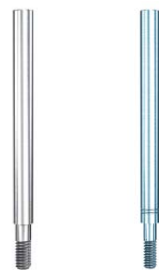


6530-05 6530-05N 6534-05 6534-05N 6534-05W



6530-08 6530-08N 6534-08 6534-08N 6534-08W



9037-05 9048-05 9048-05N 9065-05

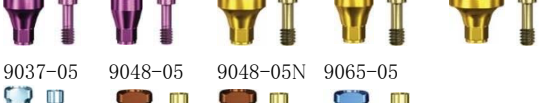

9037-08 9048-08 9048-08N 9065-08



1000-36 1000-33 1000-37 1000-35 1000-42 1000-18 1000-18XL



1000-94-L4, 1000-94-L20



1000-94-L4, 1000-94-L20



1000-94-L4, 1000-94-L20



**2.構成品

カタログ番号	カタログ名	適用アバットメント 外径(mm)
8537-02	LG ストレートアバットメントトランスファー W3.7	3.7
3037-02	ストレートアバットメントトランスファー W3.7	3.7
3047-02	ストレートアバットメントトランスファー W4.7	4.7
3057-02	ストレートアバットメントトランスファー W5.7	5.7
3065-02	ストレートアバットメントトランスファー W6.5	6.5
9037-02	SW ストレートアバットメントトランスファー W3.7	3.7
9047-02	SW ストレートアバットメントトランスファー W4.7	4.7

カタログ番号	カタログ名	プラットフォーム径 (mm)	同梱される スクリュー
1000-63	スクリュー固定式アバットメントトランスファー クローズ	5.0	1000-15
1000-62	スクリュー固定式アバットメントトランスファー オープン	5.0	1000-14

カタログ番号	カタログ名	プラットフォーム径 (mm)
1000-68	スクリュー固定式アバットメント PL トランスファー	5.0
1000-84	ボールアバットメントトランスファー	5.0

カタログ番号	カタログ名	最大外径 (mm)
1000-83	ナイロンライナートランスファー	4.0

カタログ番号	カタログ名	プラットフォーム径 (mm)	同梱される スクリュー
8530-05	LG インプラントトランスファー P3.0W3.8 クローズ	3.0	1000-41
8035-05	LG インプラントトランスファー P3.5W4.7 クローズ	3.5	1000-06
8045-05	LG インプラントトランスファー P4.5 W5.7 クローズ	4.5	1000-06
8057-05	LG インプラントトランスファー P5.7W6.6 クローズ	5.7	1000-06
8730-05	LG IMP トランスファー P3.0W3.8 クローズ CCV	3.0	1000-41
8735-05	LG IMP トランスファー P3.5W4.7 クローズ CCV	3.5	1000-06
8745-05	LG IMP トランスファー P4.5W5.7 クローズ CCV	4.5	1000-06
8757-05	LG IMP トランスファー P5.7W6.6 クローズ CCV	5.7	1000-06
8735-05N	LG IMP トランスファー P3.5W3.8 クローズ CCV	3.5	1000-06
8745-05N	LG IMP トランスファー P4.5W4.7 クローズ CCV	4.5	1000-06
8757-05N	LG IMP トランスファー P5.7W5.7 クローズ CCV	5.7	1000-06
8530-08	LG インプラントトランスファー P3.0W3.8 オープン	3.0	1000-26
8035-08	LG インプラントトランスファー P3.5W4.7 オープン	3.5	1000-10
8045-08	LG インプラントトランスファー P4.5W5.7 オープン	4.5	1000-10
8057-08	LG インプラントトランスファー P5.7W6.6 オープン	5.7	1000-10
8730-08	LG IMP トランスファー P3.0W3.8 オープン CCV	3.0	1000-26
8735-08	LG IMP トランスファー P3.5W4.7 オープン CCV	3.5	1000-10
8745-08	LG IMP トランスファー P4.5W5.7 オープン CCV	4.5	1000-10
8757-08	LG IMP トランスファー P5.7W6.6 オープン CCV	5.7	1000-10
8735-08N	LG IMP トランスファー P3.5W3.8 オープン CCV	3.5	1000-10
8745-08N	LG IMP トランスファー P4.5W4.7 オープン CCV	4.5	1000-10
8757-08N	LG IMP トランスファー P5.7W5.7 オープン CCV	5.7	1000-10
8730-08NE	LG IMP トランスファー P3.0W3.8 オープン CCVNE	3.0	1000-26
8735-08NE	LG IMP トランスファー P3.5W4.7 オープン CCVNE	3.5	1000-10
8745-08NE	LG IMP トランスファー P4.5W5.7 オープン CCVNE	4.5	1000-10
8757-08NE	LG IMP トランスファー P5.7W6.6 オープン CCVNE	5.7	1000-10
8735-08NNE	LG IMP トランスファー P3.5W3.8 オープン CCVNNE	3.5	1000-10
8745-08NNE	LG IMP トランスファー P4.5W4.7 オープン CCVNNE	4.5	1000-10
8757-08NNE	LG IMP トランスファー P5.7W5.7 オープン CCVNNE	5.7	1000-10

カタログ番号	カタログ名	全長 (mm)
1000-15	SRA トランスファースクリュー クローズ D1.8	9.4
1000-14	SRA トランスファースクリュー オープン D1.8	15
1000-06	フィクセーションスクリュー M	9.7
1000-10	LG インプラントトランスファースクリュー D1.8 オープン	20
1000-41	ナロー用フィクセーションスクリュー M	10.5
1000-26	インプラントトランスファースクリュー D1.6 オープン	20
1000-10XL	LG ワキシングスクリュー D1.8	31
1000-26XL	LG ワキシングスクリュー D1.6	31

カタログ番号	カタログ名	プラットフォーム径 (mm)	同梱される スクリュー
6530-05	AC IMP トランスファー P3.0W4.8 クローズ CCV	3.0	1000-36
6530-05N	AC IMP トランスファー P3.0W3.8 クローズ	3.0	1000-36
6534-05	AC IMP トランスファー P3.4W5.7 クローズ CCV	3.4	1000-33
6534-05N	AC IMP トランスファー P3.4W4.8 クローズ	3.4	1000-33
6534-05W	AC IMP トランスファー P3.4W6.6 クローズ CCV	3.4	1000-33
6530-08	AC IMP トランスファー P3.0W4.8 オープン CCV	3.0	1000-37
6530-08N	AC IMP トランスファー P3.0W3.8 オープン	3.0	1000-37

6534-08	AC IMP トランスファー P3.4W5.7 オープン CCV	3.4	1000-35
6534-08N	AC IMP トランスファー P3.4W4.8 オープン	3.4	1000-35
6534-08W	AC IMP トランスファー P3.4W6.6 オープン CCV	3.4	1000-35

カタログ番号	カタログ名	プラットフォーム径 (mm)	同梱される スクリュー
9037-05	SW インプラントトランスファー P3.7W3.8 クローズ	3.7	1000-41
9048-05	SW インプラントトランスファー P4.8W5.7 クローズ	4.8	1000-42
9048-05N	SW インプラントトランスファー P4.8W5.1 クローズ	4.8	1000-42
9065-05	SW インプラントトランスファー P6.5W6.5 クローズ	6.5	1000-42
9037-08	SW インプラントトランスファー P3.7W3.8 オープン	3.7	1000-26
9048-08	SW インプラントトランスファー P4.8W5.7 オープン	4.8	1000-18
9048-08N	SW インプラントトランスファー P4.8W5.1 オープン	4.8	1000-18
9065-08	SW インプラントトランスファー P6.5W6.5 オープン	6.5	1000-18

カタログ番号	カタログ名	全長 (mm)
1000-36	AC フィクセーションスクリュー D1.2 ロング	7.6
1000-33	AC フィクセーションスクリュー D1.4 ロング	8.1
1000-37	AC インプラントトランスファースクリュー D1.2 オープン	20.1
1000-35	AC インプラントトランスファースクリュー D1.4 オープン	20.5
1000-42	SW フィクセーションスクリュー D1.9 ロング	10.3
1000-18	SW インプラントトランスファースクリュー D1.9 オープン	20.0
1000-18XL	SW ワキシングスクリュー D1.9	30.5

カタログ番号	カタログ名	最大外径 (mm)	内部口径 (mm)
1000-94-L4	ロケータ インプレッションコーピング (4 イリ)	5.3	4.5
1000-94-L20	ロケータ インプレッションコーピング (20 イリ)		

3. 組成

PBT、アルミニウム、ポリプロピレン、チタン合金、ポリエチレン

【使用目的又は効果】

印象採得に用いる歯科技工用の器具であり、口腔内のインプラント又はアバットメントの位置を模型上に再現するために用いるものである。

【使用方法等】

本品を口腔内のインプラント又はアバットメントに連結し、通法に従い印象採得を行う。

【使用上の注意】

1. 本品の使用前に、必ずサイズを確認すること。
2. 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
3. 洗浄剤・消毒剤を使用する場合は材質(アルミニウム、樹脂等)への腐食・変質等を避けるため適切な溶液、用量を用いること。
4. 本品の使用後は適切に廃棄し、再使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社 インプラテックス
ホームページ: <http://www.itx.co.jp>
TEL: 03-5850-8555 FAX: 03-5850-8505

輸入先国 : アメリカ合衆国
輸入先製造業者: インプラントダイレクト社
(Implant Direct Sybron Manufacturing, LLC)