医療機器承認番号：23000BZX00090000

機械器具 12　理学診療用器具
高度管理医療機器 手術用ロボット手術ユニット （JMDN コード：38678000）
特定保守管理医療機器

da Vinci X サージカルシステム

再使用禁止（ドレープ）

【警告】

1. **本品は関連学会が推奨するトレーニングプログラムにおいて十分に訓練を受け、実施する手技に熟練した医師及び医療チームのみが使用すること。**
2. **本品を心臓外科に使用する場合は、心臓外科関連学会が提言する適正使用指針に則り、心臓外科関連学会が推奨するトレーニングプログラムにより十分な訓練を受け、実施する手技に熟練した医師及び医療チームのみが使用すること。**
3. **本品は手技に伴う緊急時の対応を含めた十分な体制が整った医療機関で使用すること。**
4. **フォローイングモードに遷移した後、またはガイドツールチェンジを含むインストゥルメント交換時、術者はサージョンコンソール内の 3D ビューアから頭を離すまでは、絶対にハンドコントロール（マスター）から手を離さないこと［ハンドコントロール（マスター）の意図しない動きにより、患者に重篤な損傷を与えるおそれがある］。**
5. **マッチンググリップ及び処置中に、インストゥルメントの先端が必ず術者の視野に入っていること［術者の視野外にある場合、患者に重篤な損傷を与えるおそれがある］。**
6. **回復不能な故障が生じた場合、インストゥルメントを直ちに取り外すこと［インストゥルメント先端部が患者に重篤な損傷を与えるおそれがある］。**

【禁忌・禁止】

<適用対象（患者）>

以下の患者には使用しないこと。

・ 出血性素因の患者［止血困難になるおそれがあるため］


<使用方法>

1. ドレープは再使用禁止
2. 本システムの設置後、カニューラを患者に挿入・留置し、ペイシェントカートのアームにカニューラを取り付けたら、絶対に手術台を動かさないこと［重篤な障害を起こすおそれがある］。

**【形状・構造及び原理等】

1. 構成
   (1) サージョンコンソール
   (2) ペイシェントカート
   (3) ビジョンカート
   (4) システムケーブル
   (5) フットスイッチペダル
   (6) 電源ケーブル
   (7) RCB ケーブル
   (8) モノポーラコード/バイポーラコード
   (9) インストゥルメントアームドレープ（再使用禁止）
   (10) エクステンションアームドレープドレープ（再使用禁止）
   **(11) 画像/音声コミュニケーションツール(Intuitive Hub)：オプション
   ※上記のうち(2)、(10)以外は下記の構成品を用いる
   販売名「 da Vinci Xi サージカルシステム」
   （承認番号： 22700BZX00112000）

2. 各部の名称
ペイシェントカート

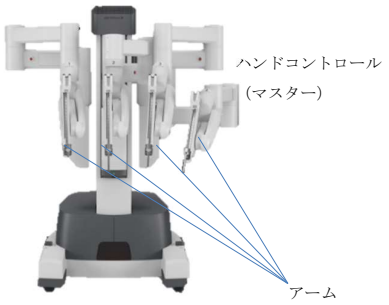

3. 電気的定格

	電圧	周波数	電源入力
ペイシェントカート	100-230V	50/60Hz	1,000VA

注：内部電源での稼働時間は約 5 分

4. 機器の分類

電撃に対する保護の形式による分類	クラス I 機器
電撃に対する保護の程度による装着部の分類	CF 形装着部
水の有害な浸入に対する保護の程度の分類	IPX8

5. レーザーに関する安全基準
レーザー照射部：IEC 60825-1 適合

**6. 付帯する主な機能

機能名称	概要
Firefly	蛍光色素を用いて、血流評価を行うためのイメージング機能である。 蛍光色素（ICG、2.5mg/mL）を用い、最大作動距離 14cm にてイメージングを行うとき、以下が視認可能であることを確認している。 ・ 厚さ 3mm の脂肪/結合組織下における 3mm 径の小血管
テレストレーション	ビデオ画面上にラインを引くことができる。（教育用ツール）
デュアルコンソール	コンソールを並列的に接続し、術者 2 名で施術が可能である。
外部画像表示（TilePro）	映像信号に変換された外部機器の画像/動画を 3D ビューアに表示する。
スケーリング機能	ハンドコントロールの動作とインストゥルメント先端の動作の割合を設定変更する。
Telepresence 機能	画像/音声コミュニケーションツールにより、症例見学又は遠隔手術指導のサポートツールとして用いる。

取扱説明書を必ずご参照ください。

7. 動作原理

本装置は、サージョンコンソールにおいて操作者によるハンドコントロール（マスター）の動きを検出し、ペイシェントカートのアームに伝え、リアルタイムでアームの位置情報のフィードバックを行う。これらの動きをビジョンカートのタッチパネルにてアームの位置情報、内視鏡の角度、ズームなどの操作や画像情報、術者同士のコミュニケーションに用いるためのマイク等、本システム全体の情報を監視することができる。

【使用目的又は効果】

本品は、一般消化器外科、胸部外科、心臓外科（心停止下で心内操作を行う手術に限る。）、泌尿器科、婦人科、頭頸部外科（経口的に行う手術に限る。）及び乳腺外科(乳輪温存乳房切除術に限る。)の各領域において内視鏡手術を実施する際に、組織又は異物の把持、切開、鈍的/鋭的剥離、近置結紮、高周波電流を用いた切開・凝固、縫合及び操作、並びに手術付属品の挿入・運搬を行うために、術者の内視鏡手術器具操作を支援する装置である。

＜使用目的又は効果に関連する使用上の注意＞

冠動脈バイパス術等、心停止下で心内操作を行う心臓外科手術以外の心臓外科手術に対する本品の有効性及び安全性は確認されていない。

***【使用方法等】**

1. 使用方法

＜使用前準備＞

(1) システムの準備をする。

1) サージョンコンソール、ビジョンカート、ペイシェントカートを電源に接続する。（電源コードは付属のものを使用すること。）

2) サージョンコンソールとビジョンカート、及びペイシェントカートとビジョンカートをシステムケーブルで接続する。

3) 併用するエンドスコープをビジョンカートと接続する。

(2) サージョンコンソール、ビジョンカート、ペイシェントカートそれぞれの電源を入れる。セルフテストが始まるのを確認する。

(3) ビジョンカートのモニタのセットアップを行う。

(4) 別途承認または認証を受けたカニューラ等の機器を用いて患者にポートを配置する。

*(5) ティラーを用いて、ペイシェントカートを手術台まで移動し、カニューラマウントを(4)で接続したカニューラ等の器具とドッキングする。必要に応じてターゲティングレーザーを用いる。

(6) エンドスコープをアームに取り付け、クラッチボタンを用いながら患者に挿入する。

＜使用中の操作＞

(1) サージョンコンソールの 3D ビューアへ術者の頭をヘッドインし、マッチンググリップを行う。

(2) 助手はペイシェントカート側にて術者の指示に従い、インストゥルメントのセッティング行い、アームクラッチを用いて患者に挿入する。

(3) サージョンコンソールのハンドコントロール（マスター）及びフットスイッチを用いてインストゥルメント及びエンドスコープ等の操作を行い、処置を行う。必要に応じて、術者は 3D ビューアから頭を離し、システム設定を調節する。

＜使用後＞

(1) ペイシェントカート、アームから付属品を取り外す。

(2) ポートクラッチボタンを用いて、アームを患者から離す。

(3) ティラーを用いてペイシェントカートを手術台から移動させる。

(4) 再使用が可能なものは次回の使用に備えてクリーニング及び消毒を行う。

(5) サージョンコンソール、ペイシェントカート、ビジョンカートの電源を切る。

*＜Da Vinci ハンドヘルドカメラを使用する場合（ロボットによる手術の前後のみ）＞

(1) 使用前準備のビジョンカートのモニタのセットアップを行った後、又は使用後にペイシェントカートを手術台から移動させた後、ライトガイド及び内視鏡を接続した Da Vinci ハンドヘルドカメラをビジョンカートへ接続する。

(2) イルミネータをオンにし、術野の確認を行う。

**＜Telepresence 機能を使用する場合＞

(1) 手術室及びリモート参加者で使用する画像/音声コミュニケーションツールを設定する。

(2) コミュニケーションに支障がないこと（音声のやり取りが大きな遅延なくできること、使用するネットワーク回線が安定していること、ライブカーソルが正常に表示されること）を確認し、使用を開始する。

*2. 組み合わせて使用する医療機器

販売名	承認/認証/届出番号	製造販売業者
da Vinci シリーズカニューラシール	13B1X10126000001	インテュイティブサージカル合同会社
da Vinci シリーズカニューラ	13B1X10126000002	
EndoWrist バイポーラインストゥルメント	22100BZX01048000	
EndoWrist モノポーラインストゥルメント	22100BZX01050000	
EndoWrist インストゥルメント	22100BZX01051000	
da Vinci シリーズエンドスコープ	224ACBZX00026000	
da Vinci シリーズオブチュレータ	224ADBZX00103000	
ディスポーザブル da Vinci シリーズオブチュレータ	224ADBZX00104000	
da Vinci シリーズ ハーモニック ACE インストゥルメント	22600BZX00287000	
EndoWrist ステープラーシステム	226ADBZX00167000	
EndoWrist ステープラーリロード	22600BZX00544000	
ディスポーザブル da Vinci シリーズリデューサ	227ADBZX00163000	
EndoWrist ベッセルシーラーシステム	22900BZX00247000	
SureForm ステープラーインストゥルメント	230ADBZX00110000	
E-200 ジェネレータ	30500BZX00167000	
Da Vinci ハンドヘルドカメラ	13B1X10126000007	
エアシール dV トロカー	303ADBZX00085000	コンメッド・ジャパン株式会社
アクセストランスフォーマ OCTO	224AIBZX00023000	株式会社 Surgical Network Systems
GelPOINT・アドバンスドアクセスプラットフォーム	302ACBZX00027000	Applied Medical Japan 株式会社

※ デュアルコンソール機能については、本品に対して熟練した経験を積み、当該機能に対するトレーニングを受けた者のみが許可されたオプション機能である。使用の際はトレーニングの内容及び取扱説明書を熟読した上で使用すること。

3. 使用方法等に関連する使用上の注意

(1) インストゥルメントを患者体内に挿入する際、インストゥルメントをタッチスクリーンに表示しながら組織や血管の損傷に十分に注意し挿入すること。

(2) インストゥルメントがカニューラから患者体内へ挿入された直後は、視野に入らない場合がある。エンドスコープを動かし、インストゥルメントを見えるようにすること。

(3) インストゥルメントを操作する際は、組織は脆い性質のため、管理の難しい血管又は気管支などの組織の損傷に注意すること。

(4) 体が小さい患者に対して、リモートセンターの位置ずれの可能性がある。体壁への負担を最小にするため、リモートセンターが体壁に対して適切な位置になるように十分注意すること［挿入部位やその周辺組織への損傷のおそれがある］。

(5) 緊急ボタンを押さずに、正常な状態で緊急グリップリリースを行わないこと［意図せずインストゥルメントの動きやグリップリリースメカニズムの破損につながるおそれがある］。

(6) 緊急グリップリリースを行ったインストゥルメントは再使用しないこと［インストゥルメントの破損、患者に重篤な損傷を与えるおそれがある］。

(7) グリップリリースツールを速く回しすぎたり、誤った方向にまわさないこと［意図せずインストゥルメントの動きやグリップリリースメカニズムの

破損につながるおそれがある]。

**(8) 当該システムのサイバーセキュリティの確保については、以下の情報を参照のこと。

意図する使用環境：

・取扱説明書及び「Da Vinci 製品ネットワーク要件概要」を確認すること。

使用者が順守すべき事項：

ネットワークに接続する際は、手術室内でインテュイティブサージカル社が規定する環境において使用し、施設の管理のもと、da Vinci システムへの物理的アクセスを制限すること。

(9) 本品のFirefly機能は、定性的に蛍光強度のトレンドを提供するものであり、標準手技と併用する際の付加的な参照ツールとして用いること。

**(10) Telepresence機能使用中にネットワーク等に異常が発生した場合は、Telepresence機能の使用を中止すること。

**(11) Telepresence機能の使用の際は、遅延が発生することを認識しておくこと。(参考情報：Telepresence機能の検証において確認された総遅延時間は約1.3秒である。)

【使用上の注意】

1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）

(1) 体重10kg未満の小児［腹腔内が狭いため、臓器損傷等の有害事象が発生しやすくなる可能性がある。頭頸部外科領域を除く］。

(2) 病的肥満の患者［インストゥルメントの操作性や視認性が確保できず、術式移行が必要となる可能性があるため］。

(3) 頭頸部外科領域については、

・開口が1.5cmを確保できない場合［術野が確保できないため］

・進行性のがん(頸動脈に浸潤する場合)［血管損傷による出血のおそれ］

2. 重要な基本的注意

(1) 本品を用いて心臓外科手術を行う場合、組織の癒着や術野が十分に確保できないことにより、手術時間や人工心肺装置の使用時間が長くなる可能性や不適切な解剖認識を誘発する可能性があるため、心臓外科手術の実施に際しては、患者の解剖学的特性や状態を考慮し、従来法を含む、最適な術式を選択すること。

(2) 併用するインストゥルメントでアブレーションプローブを把持、操作しないこと［金属微粒子が生じるおそれがある］。

(3) 本品は胸部外科や婦人科領域での使用は認められているが、美容形成術や再建術での使用を目的としていないため、これらの手術では使用しないこと。

(4) 以下の手術では安全性及び有効性が確認されていないため、使用しないこと。

・ 胸部又は腹部大動脈瘤手術
・ 超低体温心停止を要する手術
・ 体重10kg未満の小児[頭頸部外科領域のみ]
・ 下顎骨への浸潤、骨切除が必要な場合、頸動脈走行異常例等[頭頸部外科領域のみ]

(5) 予備電池（内部電源）がフル充電の状態であるよう、ペイシェントカートが使用中でない場合もプラグを差した状態にしておくこと。

(6) 電源損失時に予備電池（内部電源）を使用して手技を継続しないこと［患者から安全にシステムを取り外すことを目的としている］。

(7) 延長コードを使用しないこと。

(8) 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）などを避け、安定した状態を保つこと。

(9) 全てのコードが正確かつ安全に接続されていることを確認すること。

3. 不具合･有害事象

(1) 重大な不具合

・ 動作不良

(2) 重大な有害事象

da Vinci システムやそのインストゥルメント等の使用に伴い、以下のような有害事象の可能性がある。

・ 死亡
・ 出血、出血性ショック、血腫、血清腫
・ 熱傷
・ 血管損傷
・ 組織損傷
・ 創傷合併症
・ 壊死
・ フィスチュラ（瘻）
・ リーク、エアリーク
・ ヘルニア
・ 気腫
・ 水腫、浮腫、リンパ浮腫
・ 体液漏出・貯留（血液、胸水、腹水、リンパ液、乳び、心嚢液、
・ 消化管液、尿等）、漿液腫
・ ガス膨満感
・ 血管閉塞、狭窄、血行障害、血栓症、虚血
・ 腸閉塞、狭窄
・ 膿瘍
・ 潰瘍
・ リンパ腫瘍
・ アレルギー反応
・ 炎症
・ 紅斑、斑状出血
・ 発熱
・ 疼痛、疝痛
・ 感染
・ 播種性血管内凝固症候群（DIC）
・ 敗血症
・ 脳血管障害（脳梗塞、くも膜下出血、脳出血、一過性脳虚血発作等）
・ 麻痺、神経障害
・ 知覚障害
・ 腕神経叢損傷
・ 反回神経麻痺（嗄声）
・ 嚥下障害
・ 動脈瘤
・ 腎動脈仮性動脈瘤
・ 骨折
・ 貧血、失神
・ 術式移行
・ 手術時間延長
・ 手術中止
・ 入院延長、再入院、再手術
・ がんの再発、転移
・ 断端腸性
・ 不整脈（頻脈、心房細動、心室細動、除脈）
・ 血圧異常（高血圧、低血圧）
・ 横紋筋融解症
・ 筋区画症候群
・ 電解質異常（低カルシウム血症等）
・ 臓器機能低下、多臓器不全
・ 呼吸不全、呼吸器疾患
・ 縫合不全、吻合不全

(3) その他の有害事象

以下のような、一般的な腹腔鏡下手術や胸腔鏡下手術で起こり得る有害事象の可能性がある。

＜一般消化器外科＞

・ 腸虚血、腸壊死
・ 腸捻転
・ イレウス
・ 排便機能障害

＜胸部外科＞
・ 気胸
・ 肺炎
・ 無気肺
＜心臓外科＞
・ 心臓損傷（弁組織損傷、心筋損傷、心穿孔等）
・ 冠動脈損傷
・ 心肺停止
・ 心不全（心筋梗塞等）
・ 心膜切開後症候群
・ 心タンポナーデ
＜泌尿器科及び婦人科＞
・ 排尿機能障害（尿漏れ、尿道閉塞等）
・ 性機能障害（勃起障害、射精障害）
・ 腎不全
＜乳腺外科＞
・ 人工乳房関連合併症
・ 乳頭転位、脱落
・ 乳頭乳輪　虚血/変形/壊死

4. 妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用
妊娠中の患者に使用する場合は、胎児への影響を考慮し、使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
(1) ペイシェントカート
高温、多湿、直射日光を避け、常温で保管すること。
(2) ドレープ
・ 高温、多湿、直射日光を避け、常温で保管すること。
・ 包装材料に傷をつけたり、ピンホールを生じさせたりしないように取り扱うこと。
2. 有効期間：ドレープ
邦文ラベルに記載されている「使用期限」等参照。

【保守・点検に係る事項】

1. 医療機関による保守点検事項
(1) クリーニング（ペイシェントカート） 柔らかいリントフリーの布に抗菌中性洗剤液をつけ清拭する。
(2) 始業点検
スタートアップシーケンスで装置の完全性テストを行うこと。
2. 業者による保守点検事項
定期的に資格を持った担当者による保守点検を受けること。

【承認条件】

（一般消化器外科、胸部外科（心臓外科を除く。）、泌尿器科及び婦人科への適応に対する承認条件。）

1. 適切な教育プログラムの受講により、本品の有効性及び安全性を十分に理解し、手技等に関する十分な知識・経験を有する医師及び医療チームによって、本品の適用を遵守して用いられるよう、必要な措置を講ずること。
2. 適応領域の治療に関する十分な経験のある医師を有し、本品を用いた手技に伴う緊急時の対応を含めた十分な体制が整った医療機関で、本品が使用されるよう、必要な措置を講ずること。

（心臓外科（心停止下で心内操作を行う手術に限る。）、頭頸部外科（経口的に行う手術に限る。）及び乳腺外科(乳輪温存乳房切除術に限る。)への適応に対する承認条件。）

3. 本品の有効性及び安全性を十分に理解し、手技等に関する十分な知識・経験を有する医師及び医療チームによって、本品の適用を遵守して用いられるよう、関連学会と協力して作成した適正使用の指針の遵守を徹底し、適切な教育プログラムの受講を医師及び医療チームに徹底するために必要な措置を講ずること。
4. 適応領域の治療に関する十分な経験のある医師を有し、本品を用いた手技に伴う緊急時の対応を含めた十分な体制が整った医療機関で、本品が用いられるよう、関連学会と協力し、策定した施設基準を満たした医療機関での使用を徹底するために必要な措置を講ずること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： インテュイティブサージカル合同会社
電話： 0120-56-5635
製造業者： INTUITIVE SURGICAL, INC
国名： アメリカ合衆国