** 2024 年 5 月改訂（第 3 版）
＊ 2024 年 4 月改訂（第 2 版）

届出番号： 13B1X10396001001

医療用品 04 整形用品


一般医療機器 皮膚バリア粘着プレート 31071000


再使用禁止

コーパルスアドヘッシブパッド

【禁忌・禁止】
創傷には使用しないこと。
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】
1．概要
本品は皮膚の保護を目的として使用する粘着性のあるポリエチレン製品である。

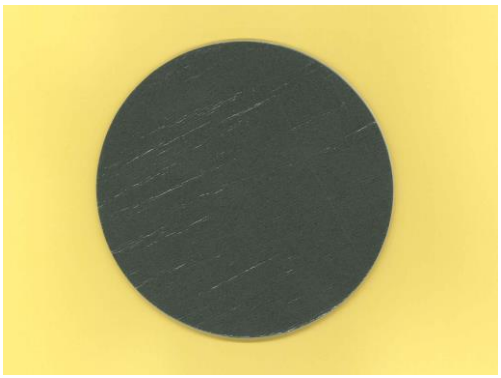

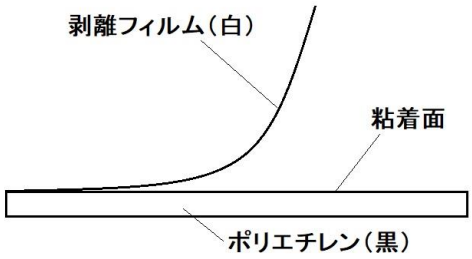

＊ 2．寸法

製品番号	サイズ	入数
09125.10	直径 12 cm　厚さ 3 mm	1 枚、5 枚／袋

3．原材料　ポリエチレン

【使用目的、効能又は効果】
外部の汚染物質から皮膚部位を保護するために皮膚に粘着する。

【使用方法等】
①パッケージからコーパルスアドヘッシブパッドを取り出してください。
②適用部位の水分をふき取り、清浄にしてください。
③剥離フィルムを剥がし、適用部位に貼り付けてください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】
1. 貯蔵・保管方法
直射日光を避け、乾燥した涼しい場所で保管すること。

2. 使用期間
使用期限（自己認証による）は製品包装に記載。

【使用上の注意】
・使用前に製品に変形等異常がないか確認すること。
・使用中に皮膚のふやけ、かゆみ、赤みなどの症状が現れた場合には使用を一時中止してください。症状が改善しない場合、繰り返し同じ症状が現れる場合には、医師にご相談ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
・製造販売業者　：
栄和産業株式会社
東京都江東区深川 1-1-5
問い合わせ先　：　03-6458-5071

・製造業者　：
ゲーエス エレクトロメディツィーニシェ ゲレーテ ゲー シュテンプレ
GS Elektromedizinische Gera(¨)te G. Stemple GmbH
（ドイツ）