
*2017年3月（第2版）（新記載要領に基づく改訂）
2011年2月（新様式第1版）

届出番号　13B3X00554000005

医05副木
一般医療機器　伸縮式手足用副木32302000

レスキュー・スプリント(耐久型)

【警告】
使用方法を習得した人以外は使用しないで下さい。

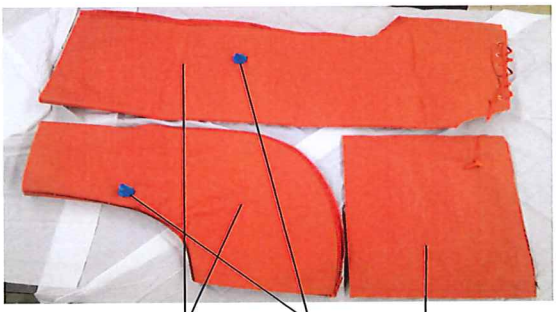

【形状・構造及び原理等】
1　本体　　2バルブ　3収納バッグ

足　用(足裏から大腿部まで)	
腕 用(全腕用)	バッグ(枕兼用)

【使用目的又は効果】
骨折、脱臼の固定が出来る。

【使用方法等】
1　空気を入れる前の状態で本体のファスナーを開き、患部を内側に入れてファスナーを閉じます。
2　バルブを開放し、バルブに口を付け息を吹き込みます。
3　固定を完了した後はバルブを時計方向に回して、しっかりバルブを閉じます。
4　外す時はバルブを時計方向とは反対に回します。中の空気が抜けてきたら、ファスナーを開き本体を外します。

【使用上の注意】
1　使用方法を習得した人以外は使用しないで下さい。
2　装着は2人以上で行って下さい。
3　十分に使用訓練を行って下さい。
4　使用中に傷病者の状態を観察して下さい。
5　本体に異常の無いことを絶えず確認して下さい。
6　傷病者又は本体に異常が見られた時は、傷病者の安全を確保して適切に措置をして下さい。
7　空気を入れる際は必ず口で入れて下さい。他の器具を使用すると加圧過剰となり血行不良となりますので注意して下さい。
8　本製品の使用可能温度は、-35度から+90度の間です。
9　使用後は本体を中性洗剤、もしくは弱アルカリ性の洗剤をぬるま湯で薄めて清拭して下さい。有機溶剤、ベンジン・ガソリン類、漂白剤等は絶対に使用しないで下さい。

【保管方法及び有効期間等】
*1. 保管方法
高温多湿を避け、常温で保管して下さい。
化学薬品の保管場所やガスを発生する場所に保管しないで下さい。
*2.有効期間
*外観を目視で観察しゴムが劣化していないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者　：　栄和産業株式会社
住　　所　：　東京都江東区深川1−1−5
電　　話　：　03-6458-5071(代)

製造業者　：　ドイツ国　W.Soehngen GmbH
(ゼーンゲン社)