

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 薬液調整用器具 70381000
フィルターストロ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

* **【形状・構造及び原理等】**

< 構造図（代表例） >

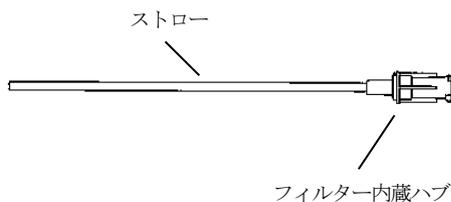

* < 原材料 >

- ストロー：PVC 又は PVC-P（DEHP フリー）
- ハブ：ABS
- フィルター：PA

【使用目的又は効果】

薬液を容器から他の薬液容器に移すために用いる。

【使用方法等】

- 汚染に十分に注意した上で包装内から取りだし、シリンジの先端に接続する。

【使用上の注意】

< 不具合・有害事象 >

以下の不具合が発現する可能性がある。

[重大な不具合]

- 製品の変形、破損、ひび割れ等
- 液漏れ

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水濡れに注意し、直射日光および高温多湿を避けて保管すること。
2. 有効期間
使用期限は外箱を参照のこと。〔自己認証による。〕

* **【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元：ビー・ブラウンエースクラップ株式会社

* 問い合わせ窓口：TEL 0120-401-741

製造元：ビー・ブラウン メディカル、米国

B.Braun Medical Inc.