機械器具　21　内臓機能検査用器具　管理医療機器
非観血血圧モジュール（JMDN ｺｰﾄﾞ 36551000）

「NIBP モジュール TM-2917」の別売品

ディスポカフ新生児用・シリーズ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

＜適用対象(患者)＞


■ 測定部位が下記状態の場合、測定しないでください。
［事故や故障、感染症の要因になります］
・外傷がある状態
・血管内挿管、治療（点滴・輸血）、シャントのある状態

＜使用方法＞

■ 単回使用製品です。再使用や他の患者への使用は行わないでください。［交差感染を引き起こす恐れがあります］

【形状・構造及び原理等】

＜外観図＞

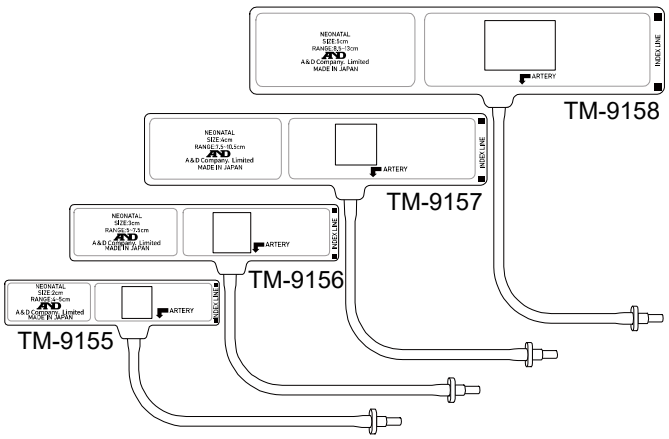

＜種類＞

当社製の非観血血圧モジュールに使用できます。適用可能な腕周は下表の通りです。

型名	サイズ	腕の周囲長	外形寸法
TM-9155	2 cm	4 ～ 5 cm	25 mm × 120 mm
TM-9156	3 cm	5 ～ 7.5 cm	32 mm × 150 mm
TM-9157	4 cm	7.5 ～ 10.5 cm	42 mm × 190 mm
TM-9158	5 cm	8.5 ～ 13 cm	51 mm × 230 mm

【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

生体情報を収集し監視すること。

【使用方法等】

＜使用方法＞

(1) 使用前に本品に損傷がないことを確認してください。損傷があった場合は、使用しないでください。
(2) カフはエアホース新生児用(別売)を介して、NIBP モジュール TM-2917 を組み込んだ医療機器に接続してください。（確実に接続されていることを確認してください）
(3) ARTERY マークが上腕動脈に当たるようにカフを巻いてください。ホースは末梢側に出してください。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

■ 本品は血圧測定用カフです。他の用途に用いないでください。
■ 患者に適したサイズのカフを使用してください。
■ カフを強く装着しすぎることによる、うっ血に注意してください。
■ 少なくとも 8 時間毎に測定部位を点検し、異常があれば測定部位を変更してください。汗によるかぶれ、内出血、末梢の循環不全の原因となります。
■ ホースの屈曲に注意してください。屈曲した状態で使用する、排気不良により測定箇所が長時間圧迫され、末梢に機能障害を生じる恐れがあります。
■ 漏気がないことを確認してください。漏気は測定誤差の原因になります。
■ 放射線やオートクレーブ等による滅菌を行わないでください。カフが劣化します。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

高温多湿、直射日光、水濡れを避け、室温で保管すること。薬品が蒸散している場所、薬品にふれる場所には保管しないこと。
・保管温度：- 20°C ～ + 60°C、
・保管湿度：95%RH 以下（結露なきこと）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者　　株式会社エー・アンド・デイ

お問い合わせ先　　株式会社エー・アンド・デイ
ME 機器相談センター
電話番号 0120-707-188

NIBP モジュール本体の取扱説明書等を必ず参照してください。

1WMPD4005778