

機械器具 （ 7 6 ） 医療用吸入器
管理医療機器 家庭用超音波吸入器(JMDN コード：71020000)

「ポータブル型超音波吸入器 UN-302」の付属品


AC アダプタ AX-TB299-JC

【禁忌・禁止】

- ・本品の接続可能な機器以外には使用しないでください。
[被接続器が正常に動作しません]
- ・AC アダプタのコードやプラグを誤用しないでください。
[感電やショート、発火の原因になります]
- ・コンセントや配線器具の定格を超える使用をしないでください。
[たこ足配線などにより定格を超えると、火災の原因になります]
- ・ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
[感電やけがの原因になります]
- ・長時間ご使用にならないときは、電源プラグを抜いてください。
[絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります]

【形状・構造及び原理等】

(1) 各部品の名前 販売型式名：AX-TB299-JC

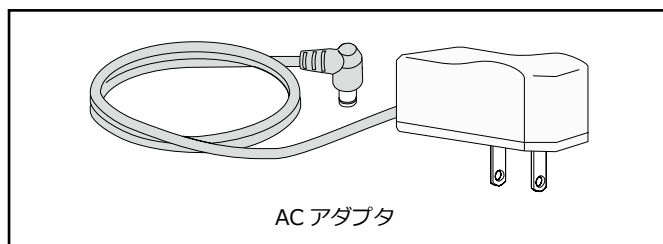

AC アダプタ

構成部品

AC アダプタ	1 個
添付文書	1 部

(2) 電気的定格

定格電圧	: AC100V
電源周波数	: 50 - 60Hz
電源出力	: 5V 1.2A

【使用目的又は効果】


ポータブル型超音波吸入器 UN-302 の本体（鼻腔と咽喉の加湿、洗浄により不快感の改善。一般家庭で使用する。）の付属品で AC アダプタとして使用します。

【使用方法等】

本品に接続可能な機器は以下の通りです。(以下、吸入器と称す)

販売名	認証番号
ポータブル型超音波吸入器 UN-302	303AHBZX00025000

1. DC ジャックカバーを外して DC コネクタを本体の差し込み口に押し込みます。容易に外れないように、正しく確実に接続してください。
2. 専用 AC アダプタをコンセントに押し込みます。容易に外れないように、正しく確実に接続してください。取り付けが悪い場合、正しく噴霧されない場合があります。

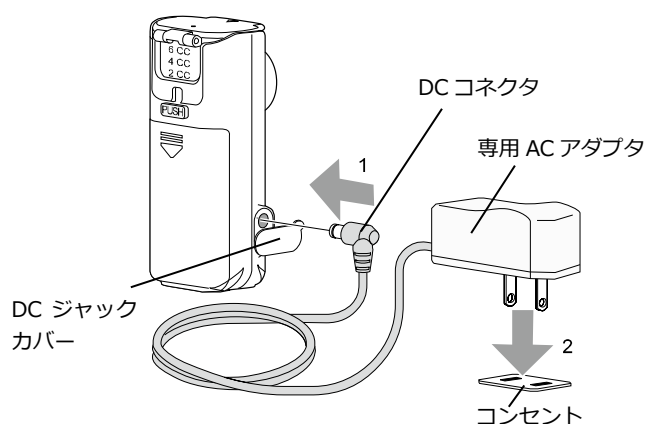

【使用上の注意】

- DC コネクタは根元まで差し込んでください。
- 専用 AC アダプタのコードの取り扱いには以下項目に注意してください。
 - ・傷つけない
 - ・破損させない
 - ・加工しない
 - ・無理に曲げたり、引っ張らない
 - ・ねじらない
 - ・使用時は束ねない重い物を載せない
 - ・挟み込ませない
- お手入れの前には専用 AC アダプタを抜いてください。
- DC コネクタの抜き差しが困難な場所で使わないでください。
- コードを抜く時は DC コネクタを持って引き抜いてください。
- 吸入器本体の添付文書や取扱説明書もご参照ください。

【保管方法及び有効期間等】

- (1) 保管方法
直射日光及び高温多湿を避けて保管してください。
- (2) 耐用期間
5 年(自己認証(当社データ)による)

【保守・点検に係る事項】

<使用者による保守点検事項>
専用 AC アダプタの電源プラグのほこりは拭き取ってください。

吸入器本体の取扱説明書を必ずご参照ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：株式会社エー・アンド・デイ

住所：〒364-8585 埼玉県北本市朝日 1-243

電話：0120-514-016

製造業者

名称：HEALTH & LIFE Co., Ltd(台湾)

ヘルス アンド ライフ