添付文書

2017 年 10 月 23 日作成（第 4 版 新記載要領に基づく改訂）　　医療機器承認番号 20200BZY00919000


2015 年 12 月 1 日作成（第 3 版）

歯科材料 01　歯科用金属
一般医療機器　歯科非鋳造用金合金（70771000）

TANAKA サンライズメタル

【形状、構造及び原理】

形状：

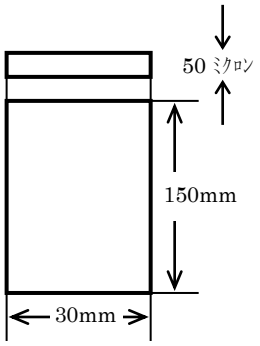

性状：　薄くて、柔らかい

色調：　ゴールド色

成分・分量：

成分	分量
金	96.5%
白金	3.0%
インディアム	0.5%

【使用目的、効能又は効果】

使用目的
　陶材焼付用の金属として用いる。

【使用方法等】

使用方法：
　メタルセラミッククラウンを作成する際、石膏模型の歯牙に本品を巻き付け、プレス機で瞬間圧接し（プレス圧 2000PSI）陶歯用のフレームを作成する

【使用上の注意】

重要な基本的注意
①本合金の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

②本合金又は類似成分の合金に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：
　室温で保管する。

【製造販売業の氏名又は名称等】

製造販売元　株式会社エーティーディー・ジャパン
　TEL　03-5319-1581
　FAX　03-5319-1582
輸入先の国名及び企業名
　米国、　The Argen Corporation