
＊＊2018年3月改訂（第4版）
＊2017年4月改訂（第3版）

届出番号:13B1X000880KS863

機械器具(25) 医療用鏡
一般医療機器　内視鏡用周辺機器コントローラ　70160000
特定保守管理医療機器

IMAGE1　パイロット

【形状･構造及び原理等】
＜全体図＞

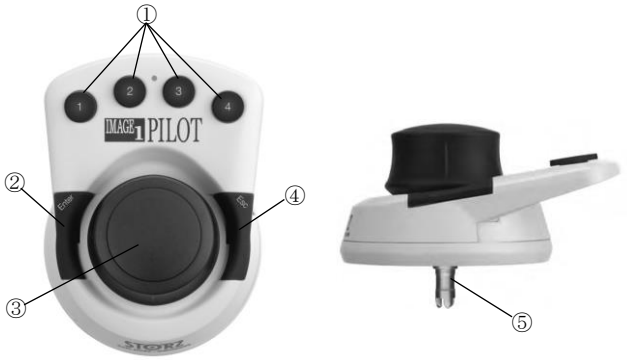

番号	名　称	機能及び動作
①	プログラマブルボタン	各ボタンに対して、特定の機能を設定し、操作を容易にする。
②	Enterボタン	メニューを呼び出し、機能の確認を行う。
③	3Dホイール	表示画像の拡大･縮小、作動距離(Working Distance)の調整、表示領域の移動を行う。
④	Escボタン	メニュー画面から戻る、または機能を取り消す。
⑤	KSLOCKクイックコネクター	ホールディングシステムに接続する。

【使用目的又は効果】
本品は、内視鏡に接続して、または併用して使用する内視鏡用の各種機器と接続し、それらを接続した機器のスイッチングを集中して行うために用いる。

【使用方法等】
1. ホールディングアーム(28272HA／28272HB／28272HC／28272HD)に接続する。
2. ビデオプロセッサーに接続する。
3. 本品及びホールディングアームを滅菌カバー(041150-20)で覆う。
4. 使用後は、滅菌カバーを外し、消毒液で湿らせた布で、装置表面全体の汚れを拭き取る。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞
1. 本品は、滅菌することができないため、必ず専用の滅菌カバーで覆って使用すること。
2. 本品は、専用のホールディングアームに取り付けて使用すること。
3. 使用中、光源光放射口近傍が高温になるため、使用中及び使用直後は注意すること。

【保管方法及び有効期間等】
以下の条件で保管すること。
1. 周囲温度:－10～＋60℃
2. 相対湿度:5～85%(結露なし)
3. 気圧:500～1060hPa

【保守･点検に係る事項】＊＊
◆使用者による保守点検事項
1. しばらく使用しなかった後、再使用する時は、使用前に必ず本品が正常かつ安全に作動することを確認すること。
2. 使用前に動作及び外観に異常がないことを確認すること。（特に可動部分については入念に確認すること。）
3. 器具は使用後速やかに血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄すること。[付着物は修復不能な損傷の原因になる]

◆業者による保守点検事項
1. 定期的に当社の保守点検を受けること。
2. 故障したときは、勝手にいじらず適切な表示を行い、修理は当社に任せること。
3. 修理･保守に関するご相談は担当営業者若しくは下記にご連絡ください。＊
エム･シー･メディカル株式会社 物流センター
TEL:03-5665-7082
FAX:03-5665-7083

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】＊＊
MC MEDICAL
エムシーメディカル株式会社
製造販売業者: エム･シー･メディカル株式会社
電話:03-5715-2800（代表）
製 造 業 者 : カールストルツ社（KARL STORZ SE & Co. KG）
国名:ドイツ

添KS872－4