
機械器具（54）　医療用捲綿子
一般医療機器　未滅菌吸収材付アプリケータ　33721000

# ディスポ・マイクロアプリケータ

**【禁忌・禁止】**
◇　過酸化水素や塩素系漂白剤には使用しないこと。
◇　濃度の高い無機酸には使用しないこと。
◇　再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】**
《形状・構造》先端に吸収材が付いた、樹脂製の棒状。

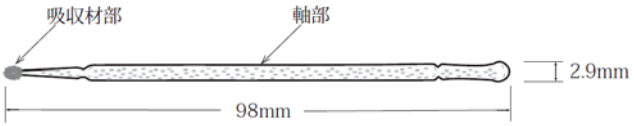


全長:98mm、 外径:2.9mm

《原理》　吸収材に薬剤等を塗布し、さまざまな表面に適用する。

《材質》　吸収材部：ナイロン
　　軸部：ＰＥ

**【使用目的又は効果】**
さまざまな表面に薬剤等を塗布するために用いる。

**【使用方法等】**
１．吸収材に適量の薬剤等を塗布する。
２．薬剤を塗布する場所に吸収材を軽く当てて適用する。

**【使用上の注意】**
使用注意
(1)本品は歯科医療有資格者のみ使用すること。
(2)吸収材部は、歯科領域で使用されるあらゆるボンディング剤、エッチング剤、レジンの他、アセトン、ベンゼンなどの有機溶媒にも耐性がありますが、ナイロンの特性として過酸化水素や塩素系漂白剤、濃度の高い無機酸には侵されるので注意すること。
(3)再使用しないこと。

**【保管方法及び有効期間等】**
貯蔵・保存方法
包装用の箱に入れた状態で、清潔な場所で保管すること。

**【保守・点検に係る事項】**
（使用前の点検の実施）
本品は使用前点検により、破損や変形がないか確認すること。
異常が認められたときは使用しないこと。

**【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】**
■製造販売業者
株式会社エスイーエム
お問合せ先：0572-26-8093

■製造（輸入）
レコデント・インターナショナル社
［Reco-Dent International Co., Ltd.］
台湾
［Taiwan］