

添付文書 (案)

2008 年 03 月 01 日 作成 (第 1 版)


医療機器届出番号：23B3X000300000008

機械器具 70 歯科用鑄造器
一般医療機器 歯科技工用鑄造器関連器具 (70754000)

鑄造ホーマー

【形状・構造及び原理等】

1) 構造

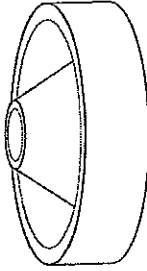

材質：NBR、真鍮

2) 寸法

		(mm)	
サイズ	直径 (外径)	高さ	
小	35	18	
中	43	20	
大	48	40	
特大	53	50	

【使用目的、効能又は効果】

歯科技工物を作製するために用いる鑄造用ホーマー

【品目仕様】

外観：キズ、歪み、その他使用上の欠陥があつてはならない。

【操作方法又は使用方法等】

通法に従い、歯科技工物のパターンを埋没し、鑄造する。

【使用上の注意】

1) 一般

①適用対象：歯科技工物の鑄造

②併用医療機器：歯科用鑄造器、鑄造用リング

2) 使用上の注意

①本品は、[使用目的、効能又は効果]の項に記載の用途以外には使用しないこと。

②本品使用時に変形、歪み、キズがある場合は使用しないこと。

③鑄造時には高温となるので、火傷等に注意すること。

④本品の使用前、使用中に不具合が生じた場合は、使用を中止すること。

⑤本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

3) 重要な基本的注意

①本品に対して発疹、湿疹、発赤、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状のある術者は、手袋などを用いて直接本品には触れないこと。

②本品に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた術者は、使用を中止し、医師の診断を受けること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

【貯蔵・保管方法】

・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

5 個/袋

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社 オオタキ

住所：〒452-0833

愛知県名古屋市区山木一丁目 128-1

電話番号：052-501-9711