


医療機器届出番号：23B3X00030A68001

機械器具68 印象採得又は咬合採得器
一般医療 歯科用咬合器 (10201000)

オオタキ v e r . 1

【形状・構造及び原理等】

構造：外観写真の通り

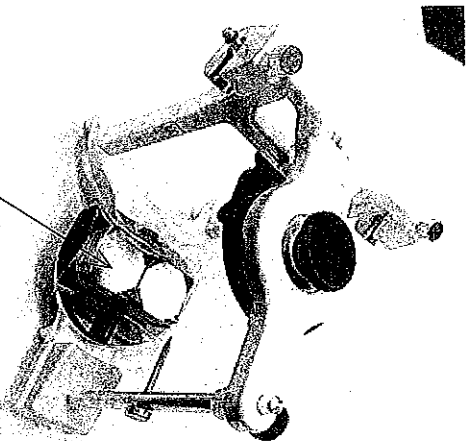

付属品：金属製爪板

材質：本体、切歯指導釘：アルミニウム合金
切歯指導標：SUS304
切歯指導板：ABS樹脂
金属製爪板：鉄

【包装】

セット内容
本体セット 本体 1台
スクリットキヤストプレート(マダネット付) 2個
切歯指導釘 1本
切歯指導標 1本
切歯指導板 1個
金属製爪板 10枚

【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社オオタキ
住所：〒452-0833 愛知県名古屋市中区山本一丁目128番地の1
電話番号：052-501-9711
製造業者：株式会社オオタキ

【使用目的、効能又は効果】

患者の上顎及び下顎模型を本品に取り付け、下顎運動をシミュレートするための器具

【品目仕様】

寸法	高さ	幅
	136mm ±1mm	130mm ±0.5 mm
		93mm ±0.2mm
		105mm ±0.1mm

【操作方法又は使用方法等】

通法に従い、患者の口腔内模型を本品に装着し、咬合機能の調整に使用する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

本品を使用前に予備の移動を行い、不具合がないことを確認すること。

【使用上の注意】

1) 一般

- ①適用対象：口腔内模型による下顎運動のシミュレート
 - ②併用医療機器：歯科用石こう、歯科用ワックス
- 2) 使用上の注意
- ①本品は記載の用途以外には使用しないこと。
 - ②本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
 - 3) 重要な基本的注意
 - ①本品の使用前、使用中に不具合が生じた場合は使用を中止すること。
 - ②本品の使用により、手荒れ等過敏症状があらわれた場合は使用を中止し、医師の診断を受けること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

【貯蔵・保管方法】

- ・機器及び付属品は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- ・水のかからない場所に設置、保管すること。