


機械器具 6 8 印象採取又は咬合採取器

一般医療機器 歯科用咬合器 (10201000)

JSCストマトロジ-咬合器

[形状・構造及び原理等]

構造：外観写真通り

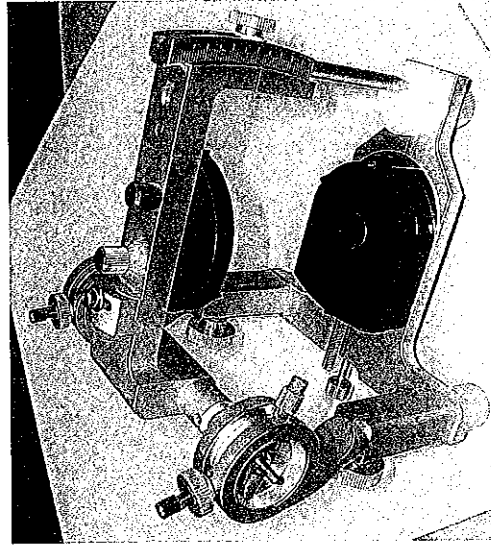

材質：本体、インサイザルロッド：アルミ合金

切歯指導板：ABS樹脂

プレート：アルミニウム合金

[製造販売者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等]

製造販売業者：株式会社 オオタキ

住所：〒452-0833

愛知県名古屋市中区山木一丁目128番地の1

電話番号：052-501-9711

製造業者：株式会社 オオタキ

[包装]

セット内容

本体セット	本体	1台
	インサイザルロッド	1本
	切歯指導板	1個
	プレート	2個

[使用目的、効能又は効果]

患者の上顎及び下顎模型を本品に取り付け、下顎運動をシュミレートするための器具

[品目仕様]

寸法	高さ	: 135mm±1.0mm	顎間距離	: 110mm±0.2mm
	幅	: 142mm±0.5mm	顎頭間距離	: 120mm±0.1mm

[操作方法又は使用方法等]

適法に従い、患者の口腔内模型を本品に装着し、咬合機能の調整に使用する。

[使用方法に関する使用上の注意]

本品を使用する前に予備の稼働を行い、不具合がないことを確認すること。

[使用上の注意]

1) 一般

- ①適用対象：口腔内模型による下顎運動のシュミレート
- ②併用医療機器：歯科用石こう、歯科用ワックス

2) 使用上の注意

- ①本品は記載の用途以外に使用しないこと。
- ②本品を歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 3) 重要な基本的注意
 - ①本品の使用前、使用中に不具合が生じた場合は使用を注意すること。
 - ②本品の使用により手荒れ等過敏状があらわれた場合は使用を中止し、医師の診断を受けること。

[貯蔵・保管方法及び使用期間等]**[貯蔵・保管方法]**

- ・水のかからない場所に設置、保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。