**2017 年 11 月　（第 5 版）（新記載要領に基づく改訂）
*2015 年 1 月　（第 4 版）

医療機器届出番号　13B1X00277000448 号

機械器具 74 医薬品注入器　一般医療機器　単回使用インライン逆流防止バルブ　JMDN コード 34099001

APC フィルター 20132-059

再使用禁止

**【禁忌・禁止】

再使用禁止

使用方法

本製品は修理できない構造になっている。[人体への傷害、機器の破損につながるおそれがあり、また機能の確保ができなくなる。]


【形状・構造及び原理等】

**構造・構成ユニット

1.構成

・APC フィルター　　20132-059

2.各部の名称

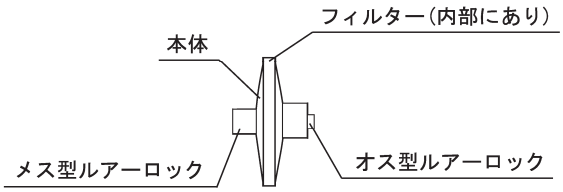

3.仕様

項目	仕様
外径（mm）	Φ33
フィルター孔径	2μm
その他	ディスポーザブル

作動・動作原理

本体内部にあるフィルターが、血液や体液などの液体を取り除き、アルゴンガスや空気などの気体のみを透過させる。

【使用目的又は効果】

使用目的

本品は、当社指定の電気手術器と組み合わせて使用され、電気手術器内への液体等の逆流を防止することを目的とする。

【使用方法等】

使用方法

1.本品の滅菌パックおよび外観に異常がないことを確認する。
2.本品のオス型ルアーロック側を電気手術器に接続し、メス型ルアーロック側をプローブと接続しているケーブル（APC ケーブル）に接続する。
3.使用が終了したら、電気手術器の電源スイッチが OFF になっていることを確認したうえで、本品を電気手術器およびケーブル（APC ケーブル）から取りはずす。
4.本品は、1 症例限りの使い捨てであるため、適切な方法で廃棄する。

【使用上の注意】

**重要な基本的注意

1.一般的事項

本製品を使用する場合は、下記注意事項を厳守のこと。感染、組織の炎症、穿孔、大出血、粘膜損傷、組織の熱傷、ガス塞栓、気腫、患者、使用者、介助者のやけどにつながるおそれや、機器の破損あるいは機能の低下につながるおそれがある。

- 本製品を再使用しないこと。再使用すると感染、組織の炎症などにつながるおそれがある。また、機能の確保ができない。
- 滅菌パックに破れ、シール部のはがれ、水などによるぬれが発生するおそれのある場所に保管しないこと。

2.使用方法

血液や体液の逆流が生じた場合は、直ちに本製品を確認し、本製品が汚れている場合は、新しい本製品に交換すること。逆流した血液や体液などが本製品内に付着し、目詰まりを起こすおそれがある。

**不具合

その他の不具合

- 機能の低下、機器の破損

**有害事象

その他の有害事象

- 感染、組織の炎症、穿孔、大出血、粘膜損傷、組織の熱傷、ガス塞栓、気腫、やけど、人体への傷害

**【保管方法及び有効期間等】

保管方法

水ぬれに注意し、常温、常湿で、かつ直射日光の当たらない清潔な場所に保管すること。

有効期間

滅菌パックに表示された使用期限を確認すること。使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。［自己認証（当社データ）］

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：

オリンパスメディカルシステムズ株式会社
*〒192-8507 東京都八王子市石川町 2951

*お問い合わせ先
*TEL 0120-41-7149（内視鏡お客様相談センター）

外国製造元：

エルベ社
ERBE Elektromedizin GmbH
国名：ドイツ

同時に使用する製品の取扱説明書を必ずご参照ください。

同時に使用する製品の取扱説明書を必ずご参照ください。

©2010 OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP. All rights reserved.

GT6669 05

Printed in Japan 20171113 *0000