*2024 年 7 月　（第 2 版）
2021 年 10 月　（第 1 版）

医療機器届出番号　13B1X00277000684 号

機械器具 25 医療用鏡　一般医療機器　内視鏡用周辺機器コントローラ　JMDN コード 70160000

フットスイッチ　MAJ-679


【形状・構造及び原理等】

構造・構成ユニット

1.構成

・フットスイッチ　　MAJ-679

2.各部の名称

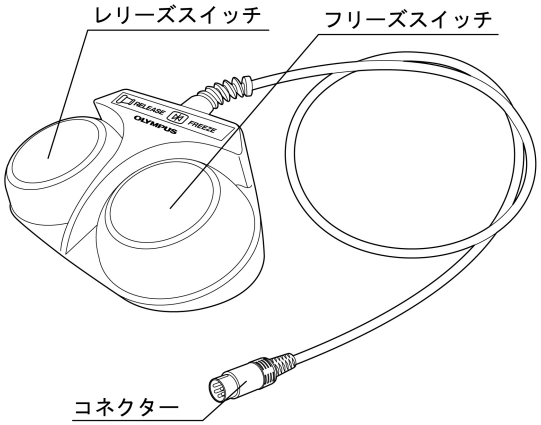

3.仕様

項目	仕様
寸法（コード部は除く）	幅 220×高さ 35×奥行き 130mm
コード長	2.5m
耐水性（コネクター部は除く）	保護等級 IPX1

作動・動作原理

本品のフリーズスイッチを踏むことにより、接続した内視鏡用超音波観測装置の画像がフリーズし、レリーズスイッチを踏むとレリーズする。

【使用目的又は効果】

使用目的

本品は、内視鏡用超音波観測装置に接続し、画像のフリーズ操作、レリーズ操作を行う。

【使用方法等】

使用方法

1.設置・接続
本品を内視鏡用超音波観測装置に接続する。
2.使用前点検
本品を接続した内視鏡用超音波観測装置の『取扱説明書』に従って点検を行う。
3.超音波検査
本品のフリーズスイッチを踏んで、フリーズ操作、レリーズスイッチを踏んでレリーズ操作を行う。
4.超音波検査後の操作
本品を内視鏡用超音波観測装置からはずす。

組み合わせて使用する医療機器

本品は、以下の内視鏡用超音波観測装置と接続して用いる。

販売名	医療機器承認番号
EVIS EUS 内視鏡用超音波観測装置 OLYMPUS EU-ME2	225ABBZX00108000

使用方法等に関連する使用上の注意

1.コネクターは液体に浸さないこと。液体に浸すと接点の変形や腐食により接触不良をおこすおそれがある。
2.ぬれたコネクターを内視鏡用超音波観測装置に接続しないこと。ぬれたコネクターは完全に乾かしてから接続すること。本品や本品を接続した内視鏡用超音波観測装置が破損するおそれがある。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

一般的事項
ぬれたコネクターは完全に乾かしてから接続すること。ぬれたまま使用すると感電事故を起こすおそれがある。

不具合

その他の不具合

機器の破損、作動不良

有害事象

その他の有害事象

感電

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

本品を接続する内視鏡用超音波観測装置の『取扱説明書』の「手入れ」、「保管」を参照すること。

耐用期間

本品の耐用期間は製造出荷後（納品後）5 年とする（自己認証（当社データ）による）。なお、本品を接続する内視鏡用超音波観測装置の『取扱説明書』に示す使用前点検および定期点検を実施し、異常があれば新品と交換すること。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

使用前は本品を接続する内視鏡用超音波観測装置の『取扱説明書』に従い点検し、異常が確認された場合は使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：
オリンパスメディカルシステムズ株式会社
〒192-8507 東京都八王子市石川町 2951

お問い合わせ先
TEL 0120-41-7149（内視鏡お客様相談センター）

©2021 OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP. All rights reserved.