添 付 文 書

*2026 年 6 月　改定(第 1 版)
2025 年 5 月　初版

届出番号　14B2X10038000005

機械器具(25)　医療用鏡

一般医療機器　内視鏡用部品アダプタ　JMDN 37090010

再使用禁止


CSM コネクター

【警告】
使用方法
挿入器具の引戻し・押込みを何回も繰り返すとキャップの上面からジェルが漏れる場合があるので、引戻し時には注意すること。

【禁忌・禁止】
1. 再使用禁止。
2. 再滅菌禁止。

【形状・構造等及び原理等】

＊

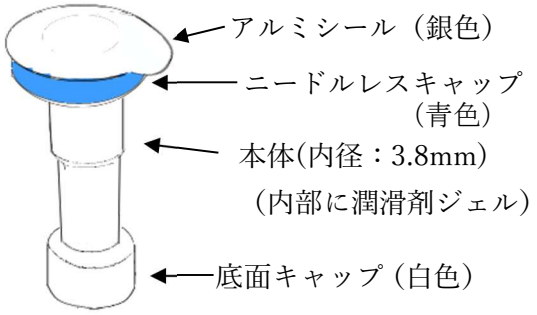

原理
本体内部にグリセリン潤滑剤を充填しており、内視鏡の鉗子口に接続して、挿入器具を通すと挿入器具に潤滑剤が塗布される。

【使用目的又は効果】
鉗子口から挿入する器具が本品内を通過することで潤滑剤が塗布されるので、事前に手で潤滑剤を塗布する手間を省くことが出来る。

【使用方法等】
1. 本品底面のキャップを外す。
2. 本品を鉗子口口に差込む。
＊ 3. 上面のアルミシールを剥がす。
4. ニードルレスキャップの中心から挿入器具をゆっくり差込む。
5. 使用後挿入器具を引抜いた後、本品を外し本品を廃棄する。

【使用上の注意】
〈重要な基本的注意〉
＊1. 本品本体の内径は 3.8mm ですので、外径は 3.3mm 以下の挿入器具を使用すること。
2. 本品を接続する前には次のことを確認・注意すること。
- 本品を取り出す前に袋が破れていないこと。
- 底面キャップを外すとき、青色のニードルレスキャップを持って、底面に触れることの無いように底面キャップを引抜くこと。
- ニードルレスキャップの天面の穴には指等で触れないこと。

3. 本品の使用中は次の事項に注意すること。
- 本品が、接続している鉗子口から抜けかかっていないか確認すること。
- 挿入器具の引戻しを繰返す場合にはニードルレスキャップの上面からジェルの漏れがないか確認をする3.こと。漏れが発生した場合は本品を交換してください。

4. 一度取り外したものを再度接続してはいけない。

【保管方法及び有効期間等】
1. 保管方法
- 火気、水ぬれに注意して、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて保管すること。
- 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所には保管しないこと。

2. 使用期限
製品の包装に表示されている年月の月末日まで
(自己認証による)。

【包装】
最小包装単位　個数は 1 個
50 個/内箱　　200 個(4 内箱)/外箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売元：ORT メディカル株式会社
〒222-0033　神奈川県横浜市港北区新横浜 2-7-19
竹生第2ビル9階
電話：045-534-7015　Fax：045-534-7760

製造業者：四川省広元市康康医療器械有限公司
(中華人民共和国)