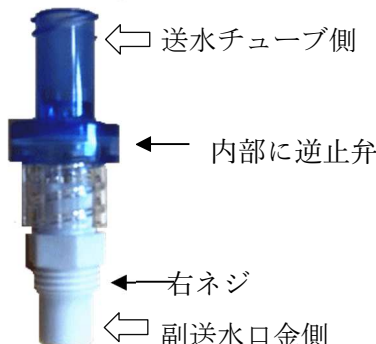


再使用禁止

サブチャンネルコネクタP**【禁忌・禁止】**

- 再使用禁止。
- 再滅菌禁止。
本品は EOG 滅菌品

【形状・構造等及び原理等】**原理**

内視鏡の副送水口金に取付けて青色側に送水チューブの送水側の端を接続する。本器の内部には逆止弁があり逆流の流出を止める。

【使用目的又は効果】

ペンタックス内視鏡の副送水口金に取付け、反対側に送水チューブを接続する。

【使用方法等】

- 本品を包装から取り出す。
- 副送水装置の送水口金にネジ止めする（右回し）。
- 反対側に送水チューブを接続する。
- 使用後は、送水チューブを外した後、本品を左回しして取り外し廃棄する。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 本品を接続する前には次のことを確認・注意すること。
 - 本品を取り出す前に袋が破れていないこと。
 - 本品の中央付近を持ち両端には指等で触れないこと。

- 本品の使用中は次の事項に注意すること。
 - 本品が、接続している金口との接続が緩んでいないか確認すること。
- 使用後は廃棄する。
 - 一度取り外したものを再度接続してはいけない。

【保管方法及び有効期間等】

- 保管方法
 - 火気、水ぬれに注意して、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて保管すること。
 - 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所には保管しないこと。
- 使用期限
製品の包装に表示されている年月の月末日まで（自己認証による）。

【包装】

最小包装単位 1個
50個/内箱 200個/外箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：ORT メディカル株式会社
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-7-19
竹生第2ビル9階
電話：045-534-7015 Fax：045-534-7760

製造業者：フォルテグロウメディカル株式会社