2021 年 12 月 作成（第 1 版）　　医療機器届出番号：11B3X10053IX101W


機械器具 16 体温計
一般医療機器 液体金属毛細管体温計（71091001）

水銀フリー婦人用基礎体温計　IX-101W

【禁忌・禁止】
- 検温結果の自己診断、治療は危険ですので医師の指導に従ってください。（自己診断は、病気が悪化する原因になります。）
- 人の検温以外に使用しないでください。
- 本製品は口中用の体温計です。
  舌下以外（耳やわきの下など）で検温しないでください。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- お子様だけでのご使用はさけてください。

【形状・構造及び原理等】

1. 主要部の形状と名称

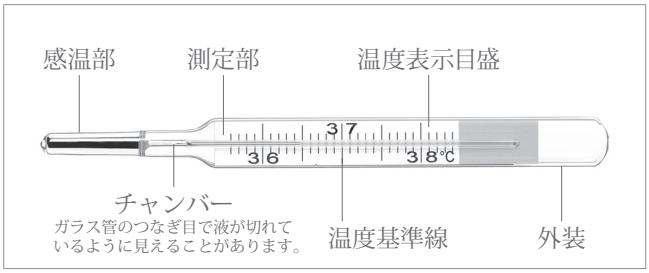

2. 構成
付属品

収納ケース	1 個
ラベルシール	1 枚
基礎体温表	1 部
取扱説明書（品質保証書付）	1 部
医療機器添付文書	1 部

3. 本体寸法及び重量
外形寸法：幅12×長さ131×厚さ9㎜
本体重量：約9g

4. 作動・動作原理
本製品は、上部と下部が密閉されたガラス製の細い中空管にガリンスタン液が充填された構造で、毛細管原理に基づいて機能し、熱によって目盛付きカラムに充填された媒体が比例的に膨張します。

5. 性能及び安全性に関する規格等
⑴ 測温範囲：35.6℃～38.4℃
⑵ 保証された精度：＋0.1/－0.1℃
⑶ 環境にやさしいガリンスタン測定液を採用しています。
⑷ 簡単な洗浄と硝子体の安全な消毒により衛生的な状態に保つことが可能です。
⑸ 防水仕様
⑹ 収納ケース付き

【使用目的又は効果】
感温部を舌下に接触させて、人の体温を測定し、一定時間後に最高温度を表示します。

【使用方法等】
⑴ ガリンスタン液柱が36℃未満に下がっていることを確認し、下がっていない場合には体温計を振って液柱を下げます。
⑵ 体温計の感温部を舌下に挿入し密着させます。そのまま4分以上検温します。温度上昇には個人差がありますので、より正しく体温を検温するには、約10分間温度変化がなくなるまで測り続けてください。また、測定中は口を開けず、鼻で呼吸してください。（会話も避けてください。）
⑶ 所定時間経過後、液柱の最上部を目盛りで確認し、測定温度を読み取ります。
⑷ 使用後は液柱を36℃未満に下げておきます。

【使用上の注意】
⑴ 周囲温度が－15℃～39℃の範囲で使用してください。
⑵ 検温中、感温部を検温する部位に密着させるように固定し、空隙はつくらないようにしてください。また、大幅に動かさないでください。
⑶ 起床直後、床の中で検温してください。
⑷ 本体を噛まないでください。
⑸ 本体や収納ケースに強い衝撃を与えたり、落としたり、踏んだりしないでください。

【保管方法及び有効期間等】
1. 保管方法
⑴ 次のようなところに保管しないでください。
- 水のかかるところ。
- 高温多湿のところ、直射日光があたるところ、暖房器具のそば、ほこりが多いところ、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ。
- 振動、重圧、衝撃（運搬時を含む）のあるところ。
- 化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ。

⑵ 保管環境条件：－15℃～39℃
2. 耐用期間
標準的な使用期間：無期限（ガラスの破損が無い場合）

【保守・点検に係る事項】
⑴ 故障（破損）した場合は勝手に修理、分解せず、製品サポート窓口にご連絡ください。
⑵ 本体と収納ケースを洗う際には、水で洗ってください。
汚れがひどい場合は、中性洗剤を含ませた布で汚れを落とし、水で洗った後、洗剤をよく拭き取ってください。
⑶ 消毒する場合は、本体を消毒用アルコール綿で清拭して自然乾燥させてください。
⑷ 消毒液等に浸さないでください。
⑸ 超音波洗浄はしないでください。
⑹ 熱湯消毒はしないでください。

【製造販売元及び製造業者等の氏名又は名称等】
製造販売元：オンスクエア株式会社
電話番号：048-242-3220（製品サポート窓口）
E-mail：support2@onsquare.jp
製造元：ゲーラテルム・メディカル株式会社
Geratherm Medical AG（ドイツ）

取扱説明書を必ずご参照ください。