

2022 年 9 月 30 日 作成

届出番号 25B3X10007000003

歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科鑄造用シートワックス JMDN 70894000

コスモスシートワックス


【警告】

- ・本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。

【禁忌・禁止】

- ・指定された用途以外には使用しないこと。
- ・溶解された本材を直接人体に使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

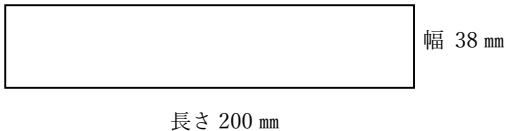

厚さ：0.5 mm, 0.6 mm, 0.7 mm, 0.8 mm, 0.9 mm、1.0 mm

内容量：300g／箱

主成分：パラフィンワックス、マイクロクリスタリン
ワックス、着色剤

【使用目的又は効果】

床、バー、クラスプ等の鑄造ろう型を作製するために用いるワックスです。

【使用方法等】

- ① 金属床などの蠟型の作製時に使用します。
- ② 弱い火炎で軟化すれば複雑な形状の原型にも使用できます。
- ③ 埋没は、通常方法に従い作業してください。

【使用上の注意】

1) 警告

【警告】の項目に記載のとおり。

2) 禁忌・禁止

【禁忌・禁止】の項目に記載のとおり。

3) 使用注意

- ・可燃性であるので、使用の際に火傷をしないように注意する。
- ・義歯床のロウ型作製以外の目的に使用しない。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・直射日光、高温多湿の場所を避けて保管する。
- ・火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しない。
- ・歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕

株式会社 キャスティング・オカモト

〒 520-1603

滋賀県高島市今津町北仰 452

TEL：0740-22-5011 FAX：0740-22-5070

〔製造業者〕

株式会社 キャスティング・オカモト

〒 520-1603

滋賀県高島市今津町北仰 452

TEL：0740-22-5011 FAX：0740-22-5070