機械器具 25　医療用鏡

管理医療機器　再使用可能な電気手術向け内視鏡用スネア　35623000

「カネカバイポーラシース　B-Wave」の付属品

（バイポーラスネア用延長コード）

【警告】

1. 本品を使用中に、異臭、発熱、変色、変形など、通常と異なるときは、直ちに使用を中止すること
［そのまま使用すると通電不可、破裂、発火等の可能性があるため］


【禁忌・禁止】

1. 弊社バイポーラ処置具以外との組み合わせによる使用
［接触不良等による不通電、感電等が生じ人体に熱損傷等の有害事象を与える可能性があるため］

【形状・構造及び原理等】

本品は、高周波電気手術器と弊社バイポーラ処置具（本品「カネカバイポーラシース　B-Wave」（承認番号：21100BZZ00185000）と「カネカバイポーラスネア S」（承認番号：20700BZZ00425000））との接続に用いられる。
本添付文書は、下記バイポーラスネア用延長コードに適用する。

〈形状・構造〉

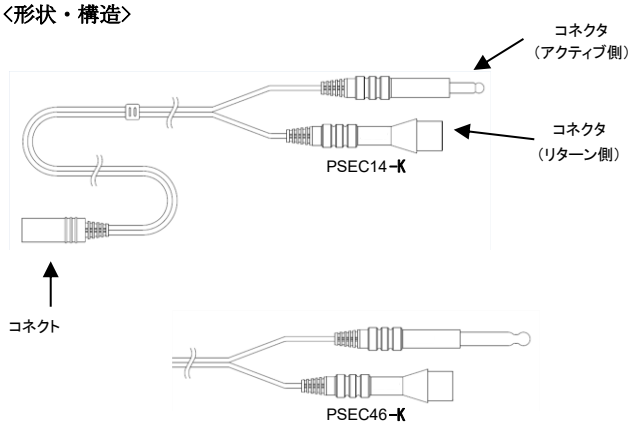

＜図1＞バイポーラスネア用延長コード

・バイポーラスネア用延長コード

品番	仕様
PSEC14-K	オリンパス　PSD-30、PSD-60 用
PSEC46-K	エルベ／バリーラブ用

【使用目的又は効果】

1. 本品は、内視鏡を通してポリープの切除術時に用いられるバイポーラスネアの操作部であり、既に製造承認取得済みのワイヤー（承認番号： 20700BZZ00425000，承認年月日 平成 7 年 4 月 20 日）と組み合わせて使用する。

【使用方法等】

1. 使用方法

注意

- ○ バイポーラスネアを使用する際は、当該製品の添付文書を熟読すること。
- ○ 差し込みが困難な場合は、無理な操作を行わないこと。
［高周波電気手術器あるいは当該製品の破損につながる恐れがあるため］
- ○ 差し込んだ接続コネクタに過度な力をかけないこと。
［高周波電気手術器あるいは当該製品の破損につながる恐れがあるため］
- ○ 延長コードは過度な力で引っ張ったり、折り曲げたりしないこと。
［当該製品の破損につながる恐れがあるため］

1) 使用前にバイポーラスネア用延長コードに変形、変色等の異常がないことを確認してください。
2) 使用する高周波電気手術器に適したバイポーラスネア用延長コードのコネクタ基を、高周波電気手術器のアクティブ側並びにリターン側コネクタにゆっくりと差し込んでください。
3) バイポーラスネア用延長コードのコネクト基に弊社バイポーラ処置具のコネクトコードを接続してください。
4) 弊社バイポーラ処置具の使用に関しては、各処置具の添付文書の内容に準じて、ご使用ください。

注意

- ○ バイポーラスネア用延長コードを高周波電気手術器から引き抜く際は、コネクタ基を把持し、垂直に引き抜くこと。むやみにねじらないこと。
［高周波電気手術器あるいは当該製品の破損につながる恐れがあるため］
- ○ バイポーラスネア用延長コードをコネクトコードから引き抜く際は、コネクト基を把持して引き抜くこと。コード部分を引っ張らないこと。
［断線等につながる恐れがあるため］

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
1)万一の緊急処置として、外科的処置等を必要とすることがある。緊急時の処置に対する十分な用意をすること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水濡れに注意し、直射日光・高温多湿を避け室温にて保管のこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売元〉
名　　称：株式会社カネカ
電話番号：06-6226-5256

〈製造元〉
名　　称：ゼオンメディカル株式会社　高岡工場

〈販売元の氏名又は名称等〉
名　　称：株式会社カネカメディックス