GADELIUS

2020 年 4 月作成（第 1 版）

医療機器届出番号：14B1X00004000117

医療用品 03　手術用手袋及び指サック

一般医療機器　単回使用指保護具（JMDN コード：35073000）

Ｔ－ＲＩＮＧ　デジットターニケット

再使用禁止

【禁忌・禁止】
1．再使用禁止
2．再滅菌禁止
3．本品を 90 分以上連続で使用しないこと。


【形状・構造及び原理等】

1．概要

本品は、損傷した指からの出血を、損傷部位に接触せずに指にはめて止血し保護する製品である。本品は、滅菌済みのディスポーザブル製品である。

2．形状、構造

本品は形状の違いにより、以下の 2 種類がある。

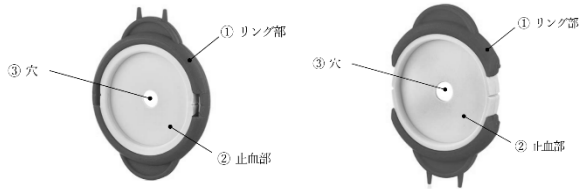

T-RING　　T-RING FLEX

3．動作原理

本品を中心の穴の部分に手や足の指を通して指にはめて、損傷部位の止血に使用する。止血部は弾性があり、指のサイズに応じて適切な圧力がかかる。

【使用目的又は効果】


本品は、損傷した指からの出血を、損傷部位に接触せずに指にはめて止血し保護する器具である。

【使用方法等】

1．使用方法


（1）T-RING のつけ方

① 指にスライドして取り付けます。
② 止血後、損傷部位を処置してください。

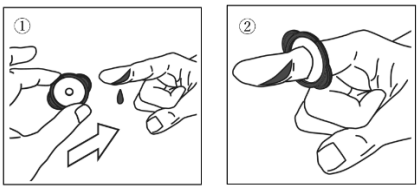


＜大きい指や損傷部位が大きな場合＞

① 取り付け前に、リング部のタブ A を把持してリングを折ります。（FLEX は除く）
② 止血部を伸ばし、穴を広げて損傷部位を超えたところまでスライドして、指に取り付けます。
③ 止血後、損傷部位を処置してください。

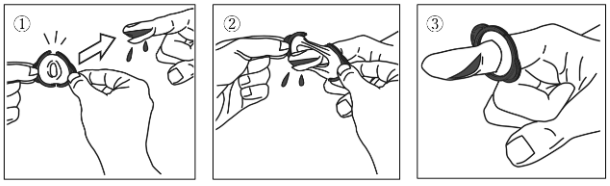

（2）T-RING の外し方

① 取り外す前に、リング部のタブ A を把持してリングを折ります。（FLEX は除く）
② 止血部を伸ばし、穴を広げて指から取り外します。
③ 必要に応じてリングを広げ、止血部をはさみでカットして取り外します。

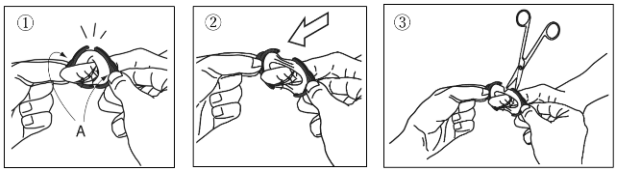

【使用上の注意】

1．重要な基本的注意

1）清潔な環境で使用してください。衛生的でない場合、または製品が汚染された環境で使用される場合は、製品の汚染や患者や使用者が感染する可能性があります。
2）使用前に滅菌日を確認し、使用期限内の製品を使用してください。
3）滅菌パッケージが未開封または破損していないことを確認してください。開封済及び破損がある場合は、使用を中止して、廃棄してください。
4）本品は滅菌済みであり、1 回限りの使用を目的としています。再利用または再滅菌しないでください。
5）手・足の指以外の止血をしないでください。
6）本品の使用で指の組織へのさらなる損傷が考えられる場合は使用しないでください。
7）本品で 90 分以上止血しないでください。

2．一般的注意事項

1）使用後は医療廃棄物として処理してください。

【保管方法及び有効期間等】

1．保管方法

・本品は、高温多湿、直射日光、殺菌灯等の紫外線および水濡れを避けて保管すること。

2．有効期間

・外箱および本品包装に記載(自己認証による)。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞
ガデリウス・メディカル株式会社
電話：042-769-3221

＜外国製造業者＞
プレシジョン　メディカル　デバイスズ
(Precision Medical Devices, LLC)
製造先国：アメリカ合衆国

添付文書番号: PM-TRG01-001