2020 年 11 月(第 1 版)
*2021 年 04 月(第 2 版)


医療機器届出番号：11B3X10044000005

機械器具 74　医薬品注入器
一般医療機器　浣腸用キット　11582000

エネマフラッシュ

【禁忌・禁止】
・肛門・直腸の穿孔又はその疑いのある患者及び急性出血のある患者には使用しないこと。
［症状を増悪させる恐れがあるため］

【形状・構造及び原理等】
〈形状・構造〉
1. 本品は、液を直腸に注入するために用いる用具である。
2. 本品は、未滅菌品である。

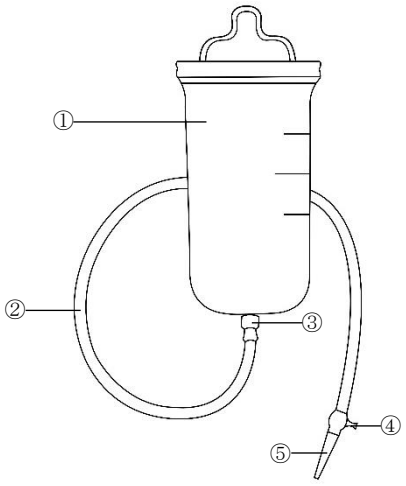

〈原理〉
本品を組み立てた状態で流量ハンドルタップを閉じ、2L ポーチに液を入れる。2L ポーチをS字フックで吊るし、ノズルの先端を肛門へ挿入する。流量ハンドルを開き液が流下することで、直腸へ液が注入される。

〈原材料〉

No.	名称	原材料
①	2L ポーチ	塩化ビニル
②	ホース	塩化ビニル
③	ホースコネクタ	ポリプロピレン
④	流量ハンドルタップ	ポリアセタール
⑤	ノズル（大、小）	ポリエチレン
—	S 字フック	塩化ビニル被覆（鉄）

【使用目的又は効果】
本品は、液を直腸に注入することで、大腸の排便を促進することを目的に使用する。

【使用方法等】
〈使用準備〉
1. ホースコネクタを 2L ポーチに固定します。
2. 流量ハンドルタップにノズルを固定します。
3. 流量タップが閉じていることを確認します。

〈使用方法〉
1. 体温程度に調整したぬるま湯 1.5～2L 程度を用意します。
2. 液を 2L ポーチに注ぎます。その際ホース内の気泡を抜いておきます。
3. S 字フックを用いて 2L ポーチを吊るします。
4. ノズルの先端を肛門へ挿入し流量ハンドルタップを開けます。液は、1 分程度で大腸内に注入されます。
5. 液を注入し終えたらお腹をマッサージし、速やかに排泄してください。

詳細については、取扱説明書をよくお読みください。

【使用上の注意】
1. 液の注入時に気泡流入を防ぐために、使用前に液でホース内を満たし気泡がないことを確認すること。
2. 液の逆流を防ぐためにノズルよりも高い位置に 2L ポーチを吊るすこと。
3. ノズルを肛門に挿入する際には、あらかじめ直腸の触診を行い慎重に挿入すること。
4. ノズルを挿入したままの体位変換は腸壁を傷つけないよう慎重に行うこと。

【保管方法及び有効期間等】
1. 保管方法
(1) 次のようなところに保管しないこと。
・水のかかるところ
・塩分など、暖房器具のそば、ほこり、直射日光、多湿・高温を含んだ空気の影響を受けるところ
・化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ
(2) 保管環境条件　：　室温／10～95%RH（結露なきこと）

2. 耐用期間
標準的な使用期間　：3 年［自己認証（当社データ）による］

【保守・点検に係る事項】
〈洗浄方法〉
使用後にすべての部品を分解し、温水ですすぎ、よく水を切って、自然乾燥してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】＊
〈製造販売業元〉
カーターテクノロジーズ株式会社
埼玉県北葛飾郡松伏町松伏 3207
TEL. 048-993-4422

取扱説明書を必ずご参照下さい。