
医療用品 04 整形用品
一般医療機器　皮膚バリア粘着プレート　JMDN コード：31071000

傷跡パッチ Cata-MEDICA

【禁忌・禁止】
次の部位には使用しないでください。
・治療中の傷口（開いている傷口又は炎症を起こしている傷口）
・異常な皮膚病変部位
・ニキビのある皮膚

【形状・構造及び原理等】
〈形状・構造〉
本品は、皮膚部位に接する粘着性を有したシリコーン層と、それを支持する粘着性を有しないシリコーン層を一体成型した、柔らかく伸縮性のあるシリコーンゲルシートです。

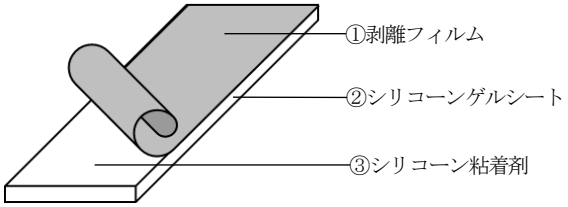

〈原理〉
本品は、粘着性を有するシリコーン層が適用部位へ粘着することで、外部の汚染物質から皮膚を保護します。

〈原材料及びサイズ〉


製品番号	サイズ(cm)	原材料
KP0315	3×15	シリコーン
KP0612	6×12	
KP1012	10×12	

【使用目的又は効果】
熱傷、外傷、手術等の跡が赤く盛り上がった部位、及び酸素マスク等の医療機器による圧迫から皮膚部位を保護することを目的に使用する皮膚保護剤です。

【使用方法等】
①傷跡への本品の貼付



1. 手指をよく洗い清潔にします。
2. 傷口を綺麗に洗い清潔を保ちます。
3. 包装袋から本品を取り出します。

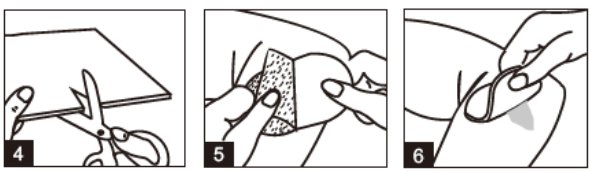

4. 傷跡より少し大きめに本品を切ってください。
5. 剥離フィルムを丁寧に剥がしてください。
6. 傷跡が中心に来るように本品を貼付してください。

②傷跡からの本品の剥がし
1. 本品は、1 日 8 時間以上、可能であれば 24 時間続けて使用します。
2. 使用後は、本品の粘着面にシャワー等で濡らしながら、ゆっくり徐々に剥がします。
3. 剥がした後の本品は、入浴用石けんやボディーソープなどで軽くこするように洗い、清潔なぬるま湯で良くすすいでください。
4. 洗浄後は本品を軽く振って水気をきり、清潔な所で粘着面を上にして自然乾燥させてください。

③傷跡への本品の再貼付
1. 本品は一度、剥がし洗浄乾燥後に傷跡へ再貼付して使用します。
2. 再貼付する際は、必ず本品が乾燥していることを確認してから使用してください。
3. 洗浄しても汚れが落ちなくなった、粘着が弱くなった際には、新しい製品と交換してください。

【使用上の注意】
1. 重要な基本的注意
1）本品の使用により発疹、発赤、かゆみ、皮膚炎等の過敏症状又はアレルギー症状が認められた場合には、使用を中止し、医師に相談してください。
2）痛みを感じる場合は、無理に使用せず使用を中止してください。使用中止後も痛みが続く場合は専門医の診察を受けてください。
2. その他の注意
1）本品を貼付する前に貼付部位を良く洗い、良く乾かしてから使用してください。
2）軟膏やクリーム等との併用は避けてください。
3）酸素マスクや医療用ギプス・シーネ等の医療機器による圧迫から皮膚を保護するために、適切な大きさに切り抜いて使用してください。
4）口の周りや汗をかきやすい部位等に貼付する際は、本品が剥がれやすくなりますので、ご注意してご使用ください。
5）肘・膝などの関節や、かかとなどの動きやすい部位に貼付する場合は、必要に応じてテープや伸縮性包帯などで軽く押さえてください。その際は、貼付部位を圧迫しないでください。

【保管方法及び有効期間等】
〈保管方法〉
1. 可燃物のため、火のそばや高温の所には放置しないでください。
2. 保管環境条件：温度：1～30℃、湿度：10～95%RH（結露なきこと）
3. 本品を口や鼻に入れると窒息の危険がありますので、小児や高齢者の手の届かない所に保管してください。

〈有効期間〉
使用期限は製品包装に記載［自己認証（当社データ）による］

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
〈製造販売業者〉
カーターテクノロジーズ株式会社
埼玉県北葛飾郡松伏町松伏 3207
TEL. 048-993-4422
〈製造業者〉
Huizhou Foryou Medical Devices Co., Ltd.